

Autores

Chernogubov V.A

Ibraguimova R.R

**Recomendaciones metodológicas del uso del
aparato electromagnético de bajas frecuencias
“Dispositivo para la corrección de los sistemas
naturales biológicos LIFE BALANCE**

Puede encontrar la versión en inglés más abajo

Todos los derechos protegidos

Están prohibidos la reproducción, traspaso de los datos y propagación de este documento de cualquier forma y cualquier parte de él sin el permiso anticipado por escrito de la Empresa de producción científica “Lidomed-Bio”

Empresa de producción científica “Lidomed-Bio”

Jarkov Ucrania



Tabla de contenido

Instrucciones generales

1. Introducción
2. Propósito del dispositivo
3. Información sobre el dispositivo
4. Preparación para el trabajo
5. Cómo usar el dispositivo
6. Niveles de exposición
7. Características del dispositivo
8. Contraindicaciones para el uso
9. Precauciones para usar con el dispositivo
10. Mantenimiento del dispositivo
11. Características
 - 11.1 Protección antiparasitaria
 - 11.1.1 Programas básicos
 - 11.2 Regulación y armonización del organismo
 - 11.2.1 Programas básicos
 - 11.3 El Programa Energía Universal
12. Nota:

Indicaciones generales:

Este es el manual de instrucciones para el uso del “Dispositivo LIFE BALANCE destinado para la corrección de los sistemas naturales biológicos “ que en adelante será denominado El Dispositivo. Este manual está destinado a los que quieren conocer su finalidad, su diseño y las reglas para su aplicación y mantenimiento

1- Introducción

En el mundo moderno ya actúan las tecnologías de bioresonancia, implantadas en diferentes aparatos de uso doméstico. Estas tecnologías están basadas en el hecho de que todos los organismos vivos tienen su propia frecuencia de oscilación, y también todos emanan unas ondas determinadas que pueden ser captadas y medidas. Cuando aparecen perturbaciones de salud también cambia la longitud de la onda, porque aparece una frecuencia impropia para los órganos y tejidos sanos. Todas las indicaciones del organismo pueden ser medidas con bastante precisión y también corregidas en el caso de que estas indicaciones demuestren algunos problemas de salud que la persona antes desconocía. Esto quiere decir que cada uno puede hacerse un examen básico de su estado de salud con la ayuda de aparatos especiales de bioresonancia sin tener que someterse a intervenciones graves. Según las últimas investigaciones el resultado de la mejora de la salud llega a 95%. **Para este fin ofrecemos el Dispositivo LIFE BALANCE destinado a corregir la radiación electromagnética de los biosistemas naturales y a reforzar las defensas propias del cuerpo.**

Este dispositivo electromagnético es único y no tiene análogos, mantiene la salud a nivel muy alto. Su funcionamiento está basado en la radiación electromagnética que resuena contactando con las oscilaciones de diferentes tipos de parásitos, tales como los virus y las lombrices que viven en el cuerpo humano. El aparato Life Balance

influye determinada y selectivamente sobre los agentes causales de las enfermedades para inactivarlos después. Esto permite al organismo humano funcionar en las condiciones naturales libre de agentes externos dañinos, armonizando los órganos y sistemas del cuerpo. Actualmente el dispositivo se produce en la Empresa de producción científica "Lidomed-Bio", la ciudad de Jarkov, Ucrania.

Lo principal: ¡ahora tenemos dispositivos que nos permiten mantenernos saludables!

Las personas necesitan mantener su estado de salud a cualquier edad. No importa si una persona es joven o mayor, debe amarse a sí mismo, protegerse y mantener su salud durante toda su vida

Atención: Los dispositivos para ajustar los biosistemas naturales Life Balance no son dispositivos médicos!

2. Propósito del dispositivo

El principio básico del "Life Balance" es corregir las funciones del cuerpo con la ayuda de radiación electromagnética. En este caso, toda la radiación tiene ciertos parámetros que pueden interactuar con los biorritmos del cuerpo humano. El efecto se basa en la selección individual de una determinada frecuencia que, debido a la influencia en el cuerpo, puede fortalecer los procesos fisiológicos, armonizando y estabilizando todos los procesos en el cuerpo humano por exposición a señales electromagnéticas débiles.

3. Información sobre el dispositivo

La carcasa del dispositivo está hecho de poliestireno

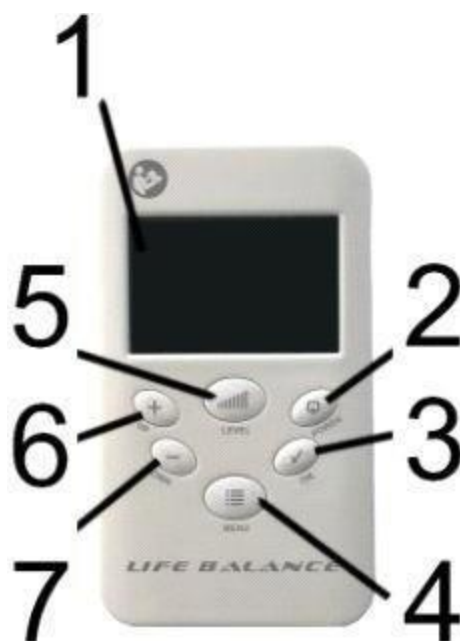


Fig. 2 «Life-Balance»

- 1 - La pantalla del dispositivo «Life-Balance».
- 2 - Botón de encendido / apagado del dispositivo.
- 3 - Botón de selección.
- 4 - Botón de menú.
- 5. Botón de configuración del nivel de señal.
- 6 - Botón de selección de programa - arriba.
- 7. Botón de selección de programa - abajo.

4. Procedimientos de preajuste

4.1 Después de transportar o almacenar el dispositivo a bajas temperaturas, el dispositivo debe **mantenerse** durante al menos 2 horas a temperatura ambiente.

4.2 Retire el dispositivo del paquete e inspecciónelo con una inspección externa para asegurarse de que no haya daños mecánicos. Verifique la integridad del dispositivo.

4.3 Encienda el aparato y siga las instrucciones en la pantalla.

5. Procedimiento operacional

5.1 Encienda el aparato presionando el botón 2;

- Use el botón para seleccionar el programa deseado.
- Una vez que se completa el programa, el dispositivo se apagará automáticamente. Si es necesario, utilice el menú de configuración con el botón 4, seleccione un idioma de interfaz diferente y también ajuste el nivel de señal con el botón 5.

6. Niveles de exposición.

Por defecto, el dispositivo tiene un nivel óptimo de intensidad de radiación **nivel 1**.

Este nivel se usa para la profilacticas y corrección del organismo en presencia de cambios inalterables en los órganos y sistemas, se usa cuando el dispositivo está cerca el uno del otro, por ejemplo, usando el dispositivo en un bolsillo de la ropa.

El dispositivo debe ubicarse lo más cerca posible del área problemática (por ejemplo: corazón, sistema broncopulmonar - en el bolsillo del pecho, sistema urogenital - en el bolsillo de los pantalones, etc.).

El segundo nivel de intensidad se usa en presencia de procesos

inflamatorios crónicos lentos en órganos y sistemas, durante la exacerbación, así como en presencia de cambios inflamatorios agudos en el cuerpo.

El tercer nivel de intensidad se recomienda instalar cuando el dispositivo está ligeramente alejado durante el uso (por ejemplo, el dispositivo se encuentra en el salpicadero del automóvil o en la mesa).

El cuarto nivel de intensidad se recomienda cuando se trabaja bajo la supervisión de un médico después de realizar pruebas en el equipo Life Profi (con enfermedades previamente difíciles de tratar). Este modo se puede usar cuando el dispositivo se coloca tanto en la proximidad inmediata del cuerpo como a una distancia de 1 metro.

El quinto nivel de intensidad se usa para sanación de toda la familia a una distancia de hasta 1.5 metros.

En este modo, el dispositivo emite una señal de máxima potencia y, en consecuencia, consume la mayor corriente. El nivel puede ser utilizado para prevenir el desarrollo de la enfermedad, así como en caso de sanación de un organismo de microbios parásitarios (helmintos, protozoos, virus, etc.), por ejemplo el uso preventivo en cargas estacionales virales (influenza, adenovirus, rotavirus, etc.). Es aconsejable usar el modo 5 bajo la supervisión de un médico.

Debe tenerse en cuenta que cuanto mayor es la intensidad de radiación, menor es el tiempo de funcionamiento continuo del dispositivo, ya que la batería se descarga más rápido.

Importante: Al utilizar programas compilados individualmente en modo automático, según los resultados de las pruebas en el dispositivo LIFE EXPERT utilizará 1 o 2 niveles de intensidad de impacto. Los niveles 3, 4, 5 deben usarse bajo supervisión médica.

7. Características del dispositivo

- La presencia de 35 programas antiparasitarios integrados,
- 35 programas de regulación y armonización,
- 1 programa Life Energy (programa universal para la eliminación de la fatiga y la normalización de las funciones protectoras del cuerpo).
- Radio de acción hasta 1.5 m
- Rango de frecuencia (Operating frequency range) 0.1Hz - 100KHz;
- Paso de ajuste de frecuencia: 0.01 Hz;
- El número de antenas internas - emisores - 2 piezas, que trabajan en frecuencias portadoras de 27MHz y 10KHz
- Programación del dispositivo por complejos sin programador a través de un cable USB estándar;
- Control de nivel manual;
- Pantalla a color con menú multilingüe;
- Potencia: batería Li-Ion;
- El tiempo de funcionamiento continuo se regula mediante la elección del nivel de intensidad de radiación del dispositivo y es de 3 a 8 horas.

8. Contraindicaciones para el uso

Absoluto:

- Presencia de un marcapasos implantado
- Presencia de órganos transplantados

Relativo:

- Neoplasmas benignos y malignos
- La coagulopatía de la sangre
- Trastornos agudos de la circulación cerebral y coronaria
- Embarazo (primer trimestre)
- Epilepsia
- Intolerancia individual a la interferencia electromagnética
- Enfermedades mentales
- Niños menores de 1 año estrictamente bajo la supervisión de un médico

Atención: En el proceso de uso de los programas, puede producirse una agravación de la enfermedad subyacente, que puede ir acompañada de malestar general, debilidad, diarrea, micción frecuente, sed, somnolencia y reacción a la temperatura. En este caso, incrementar el intervalo entre sesiones para mejorar el bienestar. Todas las reacciones pueden observarse solo en las primeras dos semanas de uso del dispositivo. Estos fenómenos están asociados con la reacción individual del cuerpo a los efectos de onda del dispositivo e indican una intensificación de las reacciones excretoras del organismo contaminado. En algunos casos, las reacciones pueden ocurrir en una fecha posterior y mantener un estado de malestar dentro de 1 mes después del inicio del dispositivo.

9. Medidas de precauciones

El dispositivo es eléctricamente seguro, no se requiere conexión a tierra.

No conecte ni desconecte los electrodos durante el funcionamiento.

Estrictamente prohibido:

- Realizar cualquier procedimiento con la ayuda de un dispositivo defectuoso;
- Realizar los trabajos de reparación con el dispositivo encendido.
- Hacer la terapia con un dispositivo defectuoso.

Si encuentra algún problema con el dispositivo, detenga los procedimientos inmediatamente y contacte con el fabricante.

¡IMPORTANTE! ¡Cuando se utiliza el programa Life Balance, es NECESARIO cumplir regimen de hidratacion! (30 ml / 1 kg de peso).

10. Mantenimiento del dispositivo

El consumidor es responsable del mantenimiento y las pruebas del rendimiento del dispositivo. Mantenga el dispositivo alejado de la humedad y del ambiente corrosivo. Protege contra los golpes y el cambio rápido de temperatura.

Atención por favor! Para evitar dañar el dispositivo, no usar los solventes o abrasivos para limpiar el exterior del dispositivo.

A medida que se utiliza el dispositivo, los electrodos y contactos se oxidan y oscurecen, esto es consecuencia del funcionamiento del dispositivo y no afecta la calidad del dispositivo.

A medida que se utiliza el dispositivo "Life Balance", la batería pierde gradualmente su capacidad. Este es un deterioro natural de la duración de la batería debido al uso del dispositivo.

"El dispositivo de regulación de biosistemas naturales"Life Balance" es un dispositivo electromagnético para mantener un alto factor de salud, efecto suave y segura en el cuerpo humano, sin perturbar el equilibrio energético en su totalidad o de forma local.

La ventaja más importante del **"dispositivo para el ajuste de los biosistemas naturales "Life Balance»** - es la posibilidad de elaborar programas individuales para los resultados de las pruebas automáticas en el dispositivo 'Life Expert', la posibilidad de utilizar automatizado, programas de diseño personalizado para mantener alto factor de la salud en la presencia de una amplia variedad de factores externos e internos. Además, el propietario del dispositivo tiene la oportunidad de utilizar programas preventivos diseñados personalmente en el modo manual. Esto le permite elegir un curso de prevención individual para cada persona.

El impacto del dispositivo "Life Balance" es absolutamente inofensivo , porque las frecuencias de parásitos se encuentran en el rango de 100 - 900 KHz. Las frecuencias de resonancia de las estructuras del cuerpo humano están en el rango de 1-10 MHz. Las frecuencias peligrosas para el cuerpo humano se encuentran fuera del 1 MHz.



¡El dispositivo de corrección de biosistemas naturales "Life Balance" no es un dispositivo médico!

Atención por favor! El dispositivo tiene una contraindicación para las mujeres en el primer trimestre del embarazo y las personas con

órganos trasplantados. Tampoco se recomienda su uso durante los dos primeros meses después de un infarto de miocardio. En caso de enfermedades cardíacas graves, el dispositivo debe estar ubicado a menos de 0,5 m del cuerpo.

11. Posibilidades

Life Balance está diseñado principalmente para 3 áreas focales:

-
- Protección antiparasitaria
- Regulación y armonización del cuerpo humano
- Programa de energía universal

Protección antiparasitaria.

11.1 Protección antiparasitaria.

Los programas del dispositivo de Protección antiparasitaria de Life Balance permiten una limpieza efectiva y segura de los órganos y tejidos de las toxinas, restauran la función de los sistemas excretores, fortalecen la inmunidad y también eliminan muchos tipos de infecciones presentes en el cuerpo.

Los programas antiparasitarios del dispositivo tienen un espectro de acción muy amplio, gracias al principio básico de trabajo: los efectos de frecuencia de resonancia direccional, contribuyen a la prevención del desarrollo de muchas enfermedades.

11.1.1 Programas básicos

1. Helmintos

Muy a menudo, la infección con una variedad de infecciones intestinales ocurre a través de frutas sucias, carne y pescado insuficientemente procesados térmicamente, manos sucias. El cuerpo puede obtener helmintos (gusanos). Viviendo en el cuerpo humano, se alimentan de sus tejidos, liberan sustancias tóxicas. Bajo la acción del programa Helminthes, el cuerpo queda libre de estos microbios. El programa no tiene un efecto tóxico en el cuerpo humano.

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

2. Antiséptico

Algunas lesiones o cortes menores son una parte integral del estilo de vida activo. La mayoría de las veces simplemente son ignorados. Pero la desintegración de la piel puede estar seguida por la penetración de la infección y los microorganismos que causan el proceso inflamatorio. En este caso, desinfectelos y aplique un antiséptico. El programa Antiséptico ayudará a matar sustancias dañinas en el cuerpo y promover una recuperación rápida

Aplicación: el programa se utiliza para todos los procesos inflamatorios. La frecuencia de la aplicación depende del grado de inflamación (2-3 veces al día). Después de eso, debe usar programas para limpiar la linfa, el hígado y los riñones.

3. Infecciones bacterianas básicas

Muchas bacterias, en particular los estafilococos y los estreptococos, están constantemente en la piel y las membranas mucosas de la garganta y la nariz. A menudo, durante los viajes, las personas no duermen lo suficiente, se sobreenfrían, se cansan físicamente. La inmunidad se está debilitando. En este caso, las bacterias ya comienzan a tener un efecto nocivo en el cuerpo.

Una persona siente dolor en la garganta, fiebre, fiebre. El programa **"Infecciones bacterianas básicas"** reduce el efecto negativo de las bacterias, permite que el cuerpo recupere la fuerza y la inmunidad.

Aplicación: El programa debe aplicarse diariamente, hasta que la salud se restaure por completo. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

4. Virus de papilloma

El virus del papiloma se considera una de las infecciones más comunes transmitidas de persona a persona. Según las estadísticas, el virus está presente en el cuerpo de aproximadamente el 90 por ciento de las personas, mientras que una persona a menudo no sospecha que es un portador. El virus

del papiloma afecta las células del epitelio de toda la piel, incluidas las superficies mucosas de la boca y los órganos genitales. Una característica del virus es la capacidad de causar una proliferación celular anormal, a menudo con la formación de verrugas genitales y papilomas. La infección ocurre después de la penetración del virus del papiloma a través de pequeñas grietas, roces y otros microtraumas

cutáneos. Al colocarse en la piel no dañada, no habrá infección, porque el virus no puede reproducirse en las células muertas, además, las capas superiores de la piel se desprenden rápidamente. Solo cuando golpea partes inmaduras del epitelio, el virus del papiloma se reproduce rápidamente causando hiperplasia o lesión en la piel

Aplicación :: El programa debe usarse a diario, hasta que la salud se restaure por completo. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

5. Virus Epstein-Barra

El virus de Epstein-Barr pertenece a la familia de los herpesvirus (herpes del 4to tipo) y es la infección viral más común.

Según las estadísticas, hasta el 60% de los niños y casi el 100% de los adultos están infectados con este virus. El virus de Epstein-Barr se transmite por gotitas aerotransportadas (con besos), contacto doméstico (elementos comunes del hogar), con menos frecuencia a través de la sangre (transmisión) y de la madre al feto (vía vertical).

La fuente de infección es solo una persona, la mayoría de las veces son pacientes con una forma latente y asintomática. El virus de Epstein-Barr ingresa al cuerpo a través del tracto respiratorio superior, desde donde ingresa al tejido linfático, causando daño a los nódulos linfáticos, amígdalas, hígado y bazo.

Aplicación :: El programa debe usarse para enfermedades crónicas 1-2 veces al día durante 10-14 días; diariamente, hasta la recuperación completa de la salud en presencia de signos de enfermedad.

Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

6. Herpes genital

El herpes genital es una enfermedad crónica (de larga duración) que ocurre cuando un virus del herpes simple tipo 2 ingresa al cuerpo. El virus se almacena en el cuerpo y se puede activar de vez en cuando. En promedio, en los primeros dos años después de la infección ocurren 4-5 recaídas.

Aplicación :: El programa debe usarse para enfermedades crónicas 1-2 veces al día durante 10-14 días, diariamente, hasta la recuperación completa de la salud con signos de activación de la enfermedad. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

7. Herpes zoster

El virus del herpes zoster ingresa al cuerpo de una persona susceptible por vía aérea o por contacto con el hogar. El virus zoster, que afecta al cuerpo humano, inicialmente provoca el desarrollo de una enfermedad como la varicela . Después de la recuperación, este virus no desaparece, sino que se instala en las células nerviosas de los nódulos espinales y puede existir durante años y no se manifiesta de ninguna manera. Sin embargo, bajo la influencia de condiciones desfavorables, deja el estado de reposo y se expresa en forma de culebrilla.

Aplicación :: El programa debe usarse a diario durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

8. Hongos y moho

El programa protege al cuerpo contra la infección con un hongo común, como *Candida* y variedades de hongos en forma de moho. Este microorganismo es parte de la microflora normal del intestino, la vagina y la boca. Pero con una disminución de la inmunidad, el *Candida* comienza a multiplicarse activamente y dañar el cuerpo. Los hongos mohosos destruyen la salud de las personas y sus hogares. Incluso en una habitación limpia, una persona inhala aire lleno de esporas. Una vez que la inmunidad humana se debilita después de una enfermedad, los "agentes secretos" del moho que viven en el cuerpo comienzan a causar enfermedades al afectar los órganos y los huesos.

El moho puede liberar sustancias tóxicas, micotoxinas, que pueden dañar el cuerpo de personas y animales. El efecto del moho se siente cuando sus esporas penetran a través del aire inhalado, a través de la superficie de la piel o se ingieren con alimentos.

El moho está en todas partes, pero a menudo lo tratan con desprecio, cortar las manchas de moho verde de una corteza de pan o un trozo de queso viejo, eliminar una fina película blanca de la mermelada, y con calma comer lo que queda, sin saber siquiera lo peligroso que es. Incluso si solo la mitad de la naranja se ve afectada por el moho, significa que la fruta entera se ve afectada. La prevención de la candidiasis y la infección por hongos del moho con el programa "hongos y moho" normaliza el equilibrio ácido-base, que inhibe la reproducción del hongo

Aplicación: El programa debe aplicarse de 1 a 3 veces al día durante 2 a 4 semanas. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

9. La gripe

La influenza es una infección viral grave. Pero el virus en sí no es peligroso, sino complicaciones después de la enfermedad. Con la inmunidad debilitada, el cuerpo queda expuesto al "taque" de otras infecciones. Para evitar consecuencias desagradables durante una enfermedad en masa, use el programa "Gripe". Para prevenir la infección bacteriana, debería usar el "Programa básico de infecciones bacterianas" y un programa para limpiar la linfa, el hígado y los riñones.

Aplicación: con el propósito de prevenir durante la epidemia, el programa se aplica 1 vez en 2 días. Si es necesario, todos los días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

10. Dermatomicosis

Los Hongos microscópicos patógenos son capaces de infectar la piel, causando la enfermedad comúnmente conocida como Dermatomicosis - trastornos de la piel causadas por varios hongos diferentes y generalmente clasificadas dependiendo de la ubicación de la erupción en la piel. El programa de ayuda al cuerpo en la eliminación de toxinas de las funciones vitales de hongos, lo que reduce la carga sobre los cuerpos, la aceleración de los sistemas y la eliminación de sustancias dañinas del cuerpo.

Aplicación: el programa se puede aplicar diariamente 1 vez por día. El curso es de 2 semanas. Cuando se usa el programa, es necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

11. Desintoxicación Hongos y moho

El programa ayuda al cuerpo a eliminar las toxinas de la vida de los hongos, reduciendo la carga sobre los órganos y sistemas y acelerando la eliminación de sustancias dañinas del cuerpo.

Aplicación :: El programa se puede aplicar diariamente 1 vez por día. El curso es de 2 semanas. Cuando se usa el programa, es necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

12. Desintoxicación

Todos los días, las personas consumen alimentos nocivos en forma de comidas rápidas y semiacabadas, respiran aire envenenado, beben alcohol, drogas, se ahogan con el humo del tabaco, se infectan con microbios patógenos. Y como resultado, el cuerpo funciona mal.

Hay dolores de cabeza, la memoria empeora, la espalda comienza a doler, el estreñimiento, la comida parece insípida. ¿Qué hacer en este caso? Es necesario llevar a cabo la desintoxicación del cuerpo.

El programa ayuda a acelerar la eliminación de sustancias nocivas del cuerpo.

Aplicación :: El programa se aplica una vez en 3 días. Cuando se usa el programa, es necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

13. Drenaje

El programa está dirigido a activar las funciones excretoras del cuerpo para eliminar las toxinas.

Un requisito previo para llevar a cabo la terapia de drenaje es una bebida abundante de agua pura no carbonatada y sin hervir en un

volumen de al menos 30 ml por kilogramo de peso por día. El programa asegura la eliminación de toxinas del cuerpo por envenenamiento químico y por parásitos y productos de su actividad vital. Normaliza el sistema nervioso, inmune, linfático, endocrino, el trabajo de los órganos del tracto gastrointestinal: el hígado, los riñones, los intestinos, el sistema circulatorio y la hematopoyesis.

Aplicación :: El programa se aplica una vez en 3 días.

Una condición obligatoria para llevar a cabo el programa de drenaje es una bebida abundante de agua pura, sin hervir, en un volumen de al menos 30 ml por kilogramo de peso por día.

14. Tracto respiratorio y nariz

La respiración libre es el componente principal de una buena salud. Con la falta de respiración, el cuerpo carece de oxígeno, lo que significa que no produce la energía necesaria para el funcionamiento normal del cuerpo y todo procesos de vida. El programa "Tracto respiratorio y nariz" lucha contra la nariz tapada, causada por diversas razones.

Aplicación :: El programa se aplica una vez cada 2 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

15. Candida

Candida es un hongo de levadura que parasita en el cuerpo humano y causa candidiasis. La candidiasis es un efecto secundario frecuente del uso prolongado e incontrolado de la terapia con

antibióticos. El uso a largo plazo de antibióticos destruye todas las bacterias, interrumpe la microflora normal del cuerpo humano, lo que conduce a la reproducción y distribución de setas activo. El programa ayuda al cuerpo, evitando la reproducción de hongos de levadura.

Aplicación: el programa se aplica una vez cada 2 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

16.Candida Albicans

Aproximadamente el 80% de los habitantes del mundo son portadores del hongo parásito Candida Albicans. ¿Qué es? No todos lo saben. Pero la enfermedad llamada

"Tordo" es familiar para muchos. En medicina, se llama candidiasis. Puede aparecer a cualquier edad, y en bebés recién nacidos, y en adultos respetables. El programa protege al cuerpo contra la infección con un hongo común, como la Candida albicans. Con una disminución de la inmunidad, Candida albicans comienza a multiplicarse activamente y dañar el cuerpo. La prevención de la candidiasis con la ayuda del programa "Stop Candida" normaliza el equilibrio ácido-base, que impide la reproducción del hongo.

Aplicación: El programa debe aplicarse de 1 a 3 veces al día durante 2 a 4 semanas. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

17. E.Coli

El programa puede suprimir el efecto negativo del E.Coli y mejorar la resistencia del cuerpo a sus efectos. El E.Coli, al entrar en el cuerpo humano con alimentos o agua de mala calidad y mal preparados, causa intoxicaciones graves. Usar el programa "E. coli" ayuda a proteger al cuerpo de microorganismos dañinos, pero no daña la microflora intestinal.

Aplicación :: aplicar el programa se recomienda diariamente durante 10-20 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

18. Linfa y desintoxicacion

Uno de los programas principales para limpiar el cuerpo es "Linfa y desintoxicación". El sistema linfático no solo cumple la función de neutralizar sustancias nocivas y tóxicas, sino que también limpia los órganos y tejidos de ellos. Con diversas enfermedades, la cantidad de sustancias nocivas aumenta muchas veces.

El sistema linfático no tiene tiempo para eliminarlos y el cuerpo puede intoxicarse de nuevo. El programa "Linfa Pura" tiene como objetivo acelerar la purificación de la linfa, sin cargar el sistema linfático.

Se recomienda aplicar una semana antes del viaje para descansar, lo que ayudará a fortalecer el sistema inmune y preparar el cuerpo para la aclimatación.

Aplicación :: Se recomienda aplicar el programa una vez cada 3 días. Cuando se utiliza el programa "Linfa Pura" es necesario

beber agua potable limpia en una cantidad de al menos 1-1.5 litros por día.

19. Lamblia intestinalis

Lamblia intestinalis parasita solamente en el organismo de la persona, causando la enfermedad llamada Giardiasis. Durante la vida, muchas personas se enfrentan a ella. Se meten en el cuerpo a través de manos sucias, alimentos sin lavar y agua sin hervir. El programa protege contra el impacto negativo en el cuerpo humano de estos

microbios. La aplicación estricta de las normas de higiene personal y el uso regular del programa "Giardia intestinalis" como medida preventiva, para proteger a las personas de estos microorganismos.

Aplicación :: se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

20. Micosis de pies y uñas

Las micosis del pie son dolencias de cualquier naturaleza que afectan la piel y las uñas de una persona, transmitidas de persona a persona. Muy a menudo, el lugar de localización primaria del proceso patológico es pliegues interdigitales (hay raras excepciones). La infección en el 30% de los casos ocurre en la familia, de un familiar que padece un hongo. En la mayoría de los casos, la infección se transmite a través de zapatos comunes y otros artículos domésticos. Con la misma frecuencia,

la infección ocurre en lugares públicos: en baños, duchas, gimnasios y piscinas

El programa "Micosis pies y uñas" hace que el cuerpo sea más resistente a los efectos de los hongos, reduce su desarrollo. Ponga este programa como una prevención de enfermedades fúngicas y siempre tendrá unos pies limpios y hermosos.

Aplicación: El programa debe administrarse 2 veces al día durante 15 días antes de que los síntomas desaparezcan. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

22. Mycoplasma

El micoplasma es una bacteria parásita o saprófita que tiene un efecto nocivo en el cuerpo humano. Pueden provocar infertilidad en mujeres y hombres, causar enfermedades inflamatorias y también afectar negativamente el curso del embarazo. Si el micoplasma se diagnostica tarde y se presenta sin síntomas, lo que a su vez provoca la inflamación crónica de los ovarios del útero, la vejiga y la próstata en los hombres.

.Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez cada 3 días,. con portador crónico 1-2 veces al día 10-14 días. . Al menos 10 sesiones. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

23. Nematodos (gusanos redondos) básicos

Los nematodos o lombrices intestinales son el segundo grupo más grande de los tipos más comunes de helmintos en humanos y animales multicelulares en la Tierra (después de los artrópodos). Los representantes más famosos de los nematodos para nosotros son los ascaridos, oxiuros, tricocéfalos. Viviendo en el cuerpo humano, se alimentan de sus tejidos, liberan sustancias tóxicas. Bajo el programa "Nematodos (gusanos redondos) básicos", el cuerpo se limpia de las toxinas de estos microbios. El programa no tiene un efecto tóxico en el cuerpo humano.

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

23. Infecciones respiratorias agudas (IRA)

La mayoría de las infecciones respiratorias agudas se transmiten por gotitas en el aire. En el trabajo, en el transporte, en el cine, alguien estornudó y los que lo rodean se ponen en peligro inmediatamente. Todos los que estuvieron en la misma habitación con una persona enferma o que se han sobrealimentado fuertemente, es necesario tomar medidas preventivas para usar el programa IRA. No permitirá que los virus se multipliquen y protejerán su cuerpo.

Aplicación: con el propósito de prevención, el programa se usa 2 veces al día. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa

"Desintoxicación".

24. Enterobiosis

La enterobiosis es la enfermedad parasitaria más común causada por helmintos del género pinworm. Oyster a menudo infecta a los niños, por lo que la enterobiosis es la forma más común de helmintosis. La infección normalmente se produce a través de frutas sin lavar carne insuficientemente cocida y el pescado, las manos sucias, se caracteriza por alteraciones del funcionamiento de los intestinos, la intoxicación cuerpo y picazón severa alrededor del ano. Bajo la acción del programa "Enterobiosis", el cuerpo queda libre de estos microbios. El programa no tiene un efecto tóxico en el cuerpo humano.

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

25. Enfermedad periodontal

El parodontium es los tejidos que rodean el diente y lo mantienen en su lugar. Enfermedad periodontal

esta es una lesión sistémica del complejo de tejido periodontal. No está aislado, es siempre una enfermedad generalizada que afecta a toda la cavidad oral de una vez. Y a pesar de que no ocurre muy a menudo, el principal peligro radica en el hecho de que se lleva a

cabo de manera casi imperceptible, por lo que el tratamiento se inicia muy tarde. Además, en los huecos, que surgen de la atrofia de tejido puede comenzar a desarrollar patógenos, lo que complica aún más la vida de la paciente.

Aplicación: para fines preventivos, aplique el programa una vez cada 3 días. No menos de 10 sesiones Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

26. Protozoos

El programa protege contra los efectos negativos en el cuerpo humano de una gran cantidad de parásitos unicelulares. Se meten en el cuerpo a través de manos sucias, alimentos sin lavar y agua sin hervir. El programa funciona en

Protozoos, destruyéndolos. El estricto cumplimiento de las normas de higiene personal y el uso regular del programa "No Protozoos" como medida preventiva protege a una persona de estos microorganismos.

Aplicación: se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

27. Herpes simple

El herpes oral es la forma más común de herpes. También puede manifestarse en los genitales, en el cuello, la cabeza y las manos, en forma de pequeñas úlceras y vesículas. El herpes puede

penetrar el sistema nervioso, causando varios desórdenes. Al entrar en el cuerpo, el herpes penetra en las células nerviosas y allí permanece, pero se manifiesta solo con una disminución de la inmunidad. El portador del virus puede infectar a otras personas con besos e incluso simplemente a través de las áreas abiertas de la piel.

Aplicación :: Se recomienda que el programa "No herpes" 2-3 veces al día durante una semana y luego durante 3 semanas, una vez al día. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa

"Desintoxicación".

28.Rotavirus

El rotavirus es un agente patógeno específico que es el principal causante del desarrollo de una afección llamada gripe intestinal, en la que se desarrolla una intoxicación pronunciada y deshidratación del cuerpo, así como varios síntomas del resfriado común. Todos los que estuvieron en la misma habitación con una persona enferma o que se han sobrealimentado fuertemente, es necesario tomar medidas preventivas para usar el programa "Rotavirus". No permitirá que los virus se multipliquen y protejan el cuerpo.

El programa evitará el desarrollo de la enfermedad durante un contacto con una persona enferma

Aplicación: con el propósito de prevención, el programa se usa 2 veces al día. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa

"Desintoxicación".

29. Infección Staphylosto-streptococo

Los estafilococos y los estreptococos se encuentran constantemente en la piel y las membranas mucosas de la garganta y la nariz. A menudo, durante los viajes, las personas no duermen lo suficiente, se sobreenfrían, se cansan físicamente. La inmunidad se está debilitando. En este caso, los cocos ya comienzan a tener un efecto nocivo en el cuerpo. Una persona siente dolor en la garganta, fiebre, fiebre. El programa "Infección estafilocócica" reduce el efecto negativo de los cocos, permite que el cuerpo recupere la fuerza y la inmunidad.

Aplicación :: El programa debe usarse a diario, hasta que la salud se restaure por completo. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

30. Toxoplasma

Toxoplasma es el microorganismo más simple. Cuando entra al cuerpo humano, puede desarrollarse una enfermedad de toxoplasmosis. Los Toxosoplasmas entran en contacto con los gatos, ya que los gatos son el anfitrión definitivo del toxoplasma. El programa protege contra los efectos negativos en el cuerpo humano de toxoplasma. El estricto cumplimiento de las normas de higiene personal y el uso regular del programa "Toxoplasma" como medida preventiva protege a una persona de estos microorganismos.

Aplicación :: se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día durante 10-14 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

31. Fortalecimiento de las defensas del cuerpo

Inmunidad: la capacidad del cuerpo para resistir la acción de virus patógenos, bacterias y otros factores ambientales dañinos. Mientras más fuerte sea la inmunidad, menos personas están en riesgo de contraer enfermedades. Fortalecer las defensas es una de las prioridades de la dirección de Wellness (Bienestar). Esto se ve facilitado por el rechazo de los malos hábitos, una dieta equilibrada y un estilo de vida saludable. El programa "Fortalecimiento de las fuerzas protectoras" respalda las fuerzas inmunológicas del cuerpo y brinda protección confiable contra influencias externas

Aplicación :: Aplique el programa diariamente en la mañana 1 vez al día 10-14 días. Inmediatamente después del despertar. No se recomienda utilizar el programa por la noche, ya que puede causar insomnio.

32. Ureaplasma

Ureaplasma es la bacteria más pequeña que habita los órganos genitales mucosos y el tracto urinario de una persona. Ureaplasma puede provocar la inflamación de cualquier parte del tracto urinario

- la vejiga, uretra, próstata, testículos y sus apéndices, y las mujeres - la vagina, el útero y anejos, puede causar inflamación de las articulaciones, especialmente en la artritis reumatoide Medios de protección contra las infecciones de transmisión sexual no

siempre pueden proporcionar la plena seguridad Para protegerse, puede usar el programa

"Salud íntima", que tiene como objetivo prevenir una amplia gama de patógenos de infecciones de transmisión sexual.

Aplicación: el programa se recomienda diariamente una vez al día para un curso de 10-20 días. Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

33. Helicobacter pylori

Helicobacter pylori es una bacteria dañina única que causa numerosas enfermedades del tracto gastrointestinal. Está demostrado que resiste fácilmente la poderosa acción destructiva del típico ambiente ácido del estómago. Con la ayuda de sus flagelos, esta bacteria puede moverse fácilmente en las paredes mucosas del estómago y también puede unirse a ellos.

Durante la reproducción, estos microorganismos son destructivos para todas las células del estómago, lo que conduce a diversos procesos inflamatorios. Hasta la fecha, la destrucción de tales bacterias peligrosas puede evitar el desarrollo inevitable de muchas patologías. El programa Helicobacter pylori normaliza la actividad de los intestinos y el estómago, elimina las sustancias peligrosas del cuerpo.

Aplicación :: Se recomienda aplicar el programa diariamente durante

Curso de 10-20 días Una vez cada 3 días, se recomienda utilizar este programa junto con el programa "Desintoxicación".

34. Clamidiosis

La clamidia es un grupo de infecciones agudas y crónicas causadas por parásitos intracelulares: clamidias. Es una de las infecciones urogenitales más comunes, a menudo asintomática. Según diferentes datos, del 5 al 15% de las personas jóvenes sexualmente activas están infectadas con la infección por Chlamydia. En este caso, la clamidia es la causa de la mitad de los matrimonios infértiles.

El programa "Chlamydia" permite prevenir la infección con parásitos intracelulares: clamidia.

Aplicación :: El programa debe aplicarse de 1 a 2 veces por día. El curso dura de 10 a 20 días. Para desintoxicarse después de este programa, se deben usar programas para limpiar la linfa, el hígado y los riñones.

11.2 Regulación y armonización del organismo

Los programas de regulación y armonización del organismo "Dispositivos para la corrección de los biosistemas naturales naturales Life Balance" se basan en los desarrollos de los científicos R. Voll y A.F. Cramer, que estudió la radiación electromagnética del cuerpo. De acuerdo con la investigación de los científicos, cada cuerpo tiene sus propias fluctuaciones. Las oscilaciones de los órganos debilitados difieren de las sanas.

El dispositivo Life Balance es un dispositivo único. Su objetivo es mejorar el estado general del cuerpo. Cada órgano humano tiene sus propias frecuencias de resonancia, que emite. Con la

influencia de varios factores desde el lado, estas lecturas se desvían de la norma y existe el riesgo de la enfermedad. Muy a menudo, esta tendencia se observa en las grandes ciudades, con un ritmo de vida muy rápido, que se acompaña de estrés. En su arsenal contiene 35 programas básicos que pueden mantener la salud y el bienestar.

Las frecuencias especiales de biorresonancia de baja intensidad de Life Balance simulan las vibraciones de los órganos sanos y "restablecen" el cuerpo a una ola saludable, lo que permite que el cuerpo trabaje para la autocuración.

Atención: El dispositivo Life Balance afecta al cuerpo humano sin violar el equilibrio de energía e información tanto en general como a nivel local (a través del área de la proyección del órgano), ajustando los órganos internos a una ola saludable. Normaliza el trabajo del cuerpo, te da la oportunidad de olvidarte del estrés y la fatiga crónica.

11.2.1 Programas básicos

2.1.1. Alergia

La alergia es una mayor sensibilidad de un organismo a cualquier sustancia

: productos, lana, polvo, polen, químicos, agentes infecciosos. Casi la mitad de la población mundial sufre de alergias. La causa de las alergias es más a menudo la desnutrición y el estilo de vida poco saludable.

El programa ayuda a prevenir el desarrollo de síntomas de alergia, ayuda a reducir las principales manifestaciones de las alergias,

facilita la condición humana y ayuda a estabilizar el sistema inmunológico.

Aplicación: el programa se usa todas las mañanas con fines preventivos una vez al día durante 5 días. Para aliviar los ataques de alergia, se recomienda utilizar el programa 1-2 veces al día. En el proceso de trabajar con el programa, se sentirá mejor, también podrá quitar la sinusitis, será más fácil respirar.

2.1.2. Activación de la función hepática

El hígado es un órgano único del cuerpo humano. El hígado es el órgano más grande en el sistema digestivo humano. A diferencia de otros órganos internos, que son responsables de solo unos pocos procesos, o incluso uno, el hígado ha asumido alrededor de quinientas funciones. Funciona como un filtro enorme, que pasa sangre a través de sí mismo: elimina las toxinas, regula la producción de bilis, el nivel de grasas y carbohidratos en el cuerpo. Su papel inmediato se observa en la formación de la mitad de la linfa y la urea humanas. Cuando hay una falta de energía, esta es nuestra batería o un generador de repuesto, porque en él contiene glucógeno, que bajo ciertas condiciones se convierte en glucosa, apoyando las fuerzas vitales del cuerpo.

Aplicación :: El programa se aplica una vez al día. Cuando use el programa "Activation de la función del hígado", debe usar agua potable limpia en una cantidad de al menos 1-1.5 litros por día.

2.1.3. Protección activa

El cuerpo humano existe en las condiciones de cambios incesantes en el entorno externo e interno, a lo que constantemente se ve obligado a adaptarse. Muchas de las influencias externas no se

pueden llamar útiles. Particular importancia para la salud es el equilibrio de todos los procesos del cuerpo, así como su capacidad de autorregulación. Comida sana, aire fresco, ejercicio regular, emociones positivas y un programa

La "protección activa" es la primera ayuda en el cuidado de la salud.

Aplicación :: El programa se usa a diario por la mañana. No se recomienda aplicar por la noche, ya que el exceso de energía puede causar insomnio.

2.1.4. Anti-vibración

La enfermedad por vibración es causada por la exposición prolongada a la vibración. Las vibraciones se dividen en herramientas locales (desde herramientas manuales) y generales (desde máquinas herramienta, equipos, máquinas en movimiento, subterráneas). El impacto de la vibración se encuentra en muchas profesiones.

La exposición prolongada a la vibración tiene un efecto muy dañino en el cuerpo humano. En los hombres, esto conduce a la impotencia.

Aplicación :: El programa "Antivibración" se puede utilizar en cualquier momento del día si es necesario. El dispositivo debe estar ubicado en el bolsillo o en el salpicadero del automóvil.

2.1.5. Antiestrés (trastorno del sueño)

Todos los días, una persona se encuentra con situaciones estresantes: en el trabajo, en el camino, en casa, incluso de

vacaciones. Una mente sana y entrenada neutraliza fácilmente los efectos del estrés. Con una constante estratificación del estrés o un cambio brusco en el ritmo de vida habitual, el cuerpo puede necesitar ayuda. El programa "Antiestrés" - un asistente en cualquier situación difícil, con estrés psicológico o físico. Normaliza el trabajo del sistema nervioso, promueve una rápida conciliación y un sueño profundo. Tiene un efecto calmante en otros sistemas de órganos.

Aplicación :: El programa se usa antes de acostarse. El dispositivo está ubicado debajo de la almohada. Si al finalizar el programa no se duerme, deberá repetir la sesión. Atención por favor! No se recomienda el uso del modo en el trabajo o mientras conduce un automóvil.

2.1.6. Artritis-artrosis

A menudo, las restricciones y el dolor en las articulaciones interfieren con el trabajo, el descanso activo y la forma física. Una de las razones de la limitación de la movilidad es una violación del suministro de sangre a las articulaciones y la acumulación de sustancias tóxicas en ellas. El programa

"Artritis-artrosis" ayuda a mejorar la circulación sanguínea, eliminando sustancias dañinas de ellos. Por lo tanto, puede hacer su actividad favorita al máximo, estar activo y saludable.

Aplicación: el programa se usa una vez cada 2 días durante el día.

2.1.7. Broncoespasmo

Restaura bien las funciones de los bronquios y los pulmones, normaliza la función pulmonar, alivia los espasmos y mejora el suministro de sangre y la absorción de oxígeno.

Coloque el dispositivo en el bolsillo del pecho, más cerca de los pulmones. Cuando los formularios se estén ejecutando, repita la sesión después del final del programa.

Aplicación :: El programa "Broncoespasmo" como un programa de

primeros auxilios debe incluirse cuando hay un espasmo de los pulmones.

2.1.8. Limpieza profunda

Todos los días, podemos quedar atrapados por cosas desagradables: comer en exceso, sensación de pesadez en el estómago, malestar general, fatiga, dispepsia e incluso envenenamiento. Para ayudar al cuerpo a superar estas tensiones, use el programa "Purificación profunda", que está diseñado para eliminar las toxinas de diversas fuentes del cuerpo.

Aplicación: El programa "Limpieza profunda" se puede usar en cualquier momento del día si es necesario. El dispositivo debe colocarse en el bolsillo del pecho o directamente cerca del cuerpo. Cuando se usa el programa, es necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

2.1.9. Purificación profunda del cuerpo, programa curativo

El programa "Purificación profunda del cuerpo programa curativo" está diseñado para eliminar las toxinas del cuerpo durante una aguda infección o la exacerbación de un proceso crónico en el cuerpo. El programa es efectivo para eliminar toxinas de Peso molecular hasta 4000, incluidos los venenos de serpiente. Se excretan a través del sistema circulatorio. El

programa "Limpieza profunda del cuerpo" ha demostrado que restaura el cuerpo después de la intoxicación con alcohol. También se puede usar para un consumo excesivo de alcohol.

Aplicación :: El programa "Purificación profunda del cuerpo. programa "se puede utilizar en cualquier momento del día si es necesario. El dispositivo debe colocarse en el bolsillo del pecho o directamente cerca del cuerpo. Cuando se usa el programa, es

necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

2.1.10. Depresión

Depresión, ansiedad, miedo: estos conceptos están interrelacionados. La ansiedad y el miedo son un signo de depresión. Muy a menudo esta condición conduce a enfermedades psicosomáticas, agotamiento emocional, insatisfacción con uno mismo. Los temores son factores fuertes que impiden que una persona revele sus habilidades y logre el éxito. El programa le permite detener el estado de depresión, reducir la ansiedad, normalizar el sueño, mejorar el estado de ánimo y la actividad mental.

Aplicación: diaria. 1 vez en el día.

Aplicación: el programa se puede usar a diario una vez al día por la mañana o por la noche.

2.1.11. Desintoxicación del hígado

El hígado es el principal órgano que neutraliza las sustancias tóxicas y otras sustancias nocivas que se forman en el cuerpo.

El hígado está bajo una carga pesada, su rendimiento disminuye y él mismo necesita ser limpiado de toxinas

Aplicación: el programa se aplica una vez cada 3 días. Cuando se usa el programa "Limpiar hígado", es necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

2.1.12. Energía vital

La energía vital es cuánto se siente una persona llena del deseo de vivir. Si hay energía vital, entonces el hombre: quiere, puede, busca, crea, y enciende a los demás

Vital energía - esta energía que impregna y llena todas las células y los átomos de nuestro cuerpo, uniéndolos en una sola unidad, en un solo organismo integrado, haciendo que pequeñas partículas de vibrar el cuerpo a una frecuencia diferente, en combinación, en el extremo, en una potente naturales absorbente y emisor de energía. El programa

La "energía vital" aumenta la actividad mental, normaliza el sueño, alivia la ansiedad y la tensión emocional.

Aplicación: el programa se puede usar 1 vez al día

2.1.13. Estreñimiento

Estreñimiento: vaciado del intestino retrasado, difícil o sistemáticamente insuficiente. La situación en la que una persona no tienen heces por más de 24 horas. Solo unas pocas personas son realmente conscientes del papel del intestino grueso para mantener una salud fuerte y estable. Los sabios de la antigüedad, el yoga, los curanderos tibetanos y egipcios hace mucho tiempo sabían la verdad de que el intestino grueso se debe mantener en perfecto estado si una persona quiere estar sana.

Aplicación: el programa se aplica a diario. Cuando se usa el programa, es necesario beber agua potable limpia de al menos 1-1.5 litros por día.

2.1.14. El sistema inmune

Inmunidad: la capacidad del cuerpo para resistir los factores nocivos. Mientras más fuerte sea la inmunidad, menos personas están en riesgo de contraer enfermedades. El estado del sistema inmune depende de muchos factores: rechazo de malos hábitos, nutrición equilibrada, un estilo de vida saludable.

El programa "Inmunidad" tiene un efecto estimulante en el cuerpo, aumenta la resistencia a los factores agresivos externos y aumenta la actividad física.

Aplicación: el modo se puede usar en cualquier momento del día.

Ideal para la prevención de resfriados.

Atención por favor! No se recomienda aplicar el programa por la noche, ya que puede causar insomnio.

2.1.15 Programa terapéutico para la piel (regulación)

La regeneración de la piel es un proceso que restaura el tejido después del daño mecánico. Dependiendo de cuán rápido este proceso tenga lugar, dependerá de si la piel se quedará con cicatrices o rastros. Tal recuperación depende de la inmunidad, la nutrición y el estado de salud. Este programa está destinado a ayudar al cuerpo al restaurar la piel como resultado de daños mecánicos

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento del día.

2.1.16. Normalización del hígado

Los procesos de regeneración natural son una verdadera salvación para el hígado. En la gran mayoría de las enfermedades del hígado diga un firme "NO" a la desesperación o a rendirse ya que, debido a que el hígado es el único órgano que incluso después de lesiones graves de sus células es capaz de recuperarse por completo. Incluso si una gran parte del hígado está fuera de servicio, las células sanas restantes pueden, al dividirse gradualmente, eventualmente reemplazar a las heridas y realizar

su trabajo al máximo; podría compararse con la capacidad del lagarto para volver a crecer su cola. De esta manera, la naturaleza protege de forma fiable el hígado, un órgano sin el cual la actividad vital normal de todo el cuerpo es imposible. En la mayoría de las enfermedades terminales y de última etapa, el hígado puede salvarse y recuperarse

El programa "Normalización del hígado" ayudará a acelerar la restauración del hígado después de las enfermedades.

Aplicación: El programa "Normalización del hígado" se puede utilizar en cualquier momento del día.

2.1.17. Proceso de recuperación de mal estado

Programa "proceso de cicatrización deficiente en marcha", puede sincronizar, regular el funcionamiento de todos los órganos y sistemas del cuerpo, aumenta la conductividad de los meridianos, proporciona una circulación completa de la energía y la sangre. Mejora la circulación de la sangre y el metabolismo, activa las células, aumenta el tono vital del cuerpo, limpia la sangre, reduce su escorificación y la viscosidad.

Aplicación: El programa "recuperación de mal estado" se puede utilizar en cualquier momento del día según sea necesario.

2.1.18. Páncreas (frecuencias de control)

El páncreas es un órgano único. Este es el único hígado en el cuerpo humano con secreción mixta. Produce hormonas que regulan todo tipo de metabolismo y, por lo tanto, se considera el órgano del sistema endocrino. Al mismo tiempo, el páncreas secreta enzimas en la cavidad del duodeno y, por lo tanto, se puede llamar con seguridad el órgano digestivo.

Aplicación: El programa "Páncreas" se puede utilizar en cualquier momento del día según sea necesario. Es deseable usar junto con el programa "Regulación del tracto gastrointestinal"

2.1.19. Regulación del tracto gastrointestinal

La nutrición completa y equilibrada es una de las condiciones más importantes para mantener una buena salud. La transición a los alimentos inusuales, no familiares, trastorno de la dieta, el estrés prolongado tendrá inevitablemente un aumento de la carga en el tracto digestivo, que puede conducir a consecuencias muy desagradables. El programa "Digestión" tiene un efecto beneficioso en el trabajo de todos los órganos del tracto gastrointestinal, ayuda a digerir los alimentos con mayor facilidad, reduce el riesgo de trastornos alimentarios.

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento del día. El tiempo de uso óptimo es de 7.00 a 9.00. Reutilizar en media hora.

2.1.20. Regulación del sistema genitourinario femenino

La mala ecología, los malos hábitos afectan negativamente al cuerpo femenino, aceleran el proceso de envejecimiento y causan problemas en el cuerpo de la mujer. El programa cubre una amplia gama de problemas femeninos y es útil a cualquier edad. Reduce la tensión premenstrual, las sensaciones dolorosas, corrige los trastornos climatéricos. El programa está diseñado para prevenir trastornos del sistema genitourinario femenino y es útil para mujeres de cualquier edad

Aplicación: para fines de prevención, el programa se usa una vez a la semana en cualquier momento.

Se aconseja a las niñas durante la pubertad que lo utilicen 1-2 veces por semana.

Mujeres que experimentan dolor y malestar durante la menstruación, todos los días en este período.

Atención por favor! No se recomienda utilizar el programa durante el embarazo o si la mujer quiere quedar embarazada.

2.1.21. Regulación y limpieza del sistema linfático

El sistema linfático está protegiendo la pureza del cuerpo las 24 horas del día. Desempeña un papel importante en la eliminación de productos metabólicos, así como en el mantenimiento de la inmunidad. Naturalmente, la linfa se elimina y pasa a través de los ganglios linfáticos, pero a veces esto no es suficiente. Cuando se alteran las funciones del sistema linfático, hasta el 83% de las sustancias nocivas se acumulan en el espacio intercelular. Esto aumenta la carga en todos los órganos de excreción: el hígado, los intestinos, los riñones.

El programa contribuye a la licuefacción de la linfa, la eliminación de toxinas del cuerpo y el exceso de agua, mejora el metabolismo en las células, normaliza la presión arterial, aumenta la inmunidad.

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento. Durante el programa, se recomienda realizar un ligero masaje en forma de caricias.

Atención por favor! Para la extracción más efectiva de toxinas, use agua potable limpia - 1-1.5 litros por día.

2.1.22. Regulación de la circulación sanguínea

Estilo de vida sedentario, malos hábitos, desnutrición, estrés - aquellas condiciones que afectan adversamente la condición del sistema circulatorio, interrumpiendo no solo su trabajo, sino también el metabolismo en general. El programa "Flujo de sangre" está diseñado para evitar el mal funcionamiento del sistema circulatorio, que es clave para mantener la salud y un buen rendimiento.

Aplicación: El programa se puede usar en cualquier momento del día si es necesario, pero el tiempo de uso óptimo es de 11.00 a 13.00. El dispositivo debe colocarse en un bolsillo en el pecho o cerca del cuerpo.

2.1.23. Regulación del sistema genitourinario masculino

La salud de los hombres no solo es una potencia sexual saludable, sino también el funcionamiento apropiado de otros órganos internos. Cuidar la salud de los hombres es necesario desde una edad temprana. El programa está diseñado para armonizar el sistema genitourinario masculino. Regula los procesos de orinar, el

trabajo de las glándulas sexuales masculinas, incluida la próstata. Cuanto mayor es el hombre, más útil es este programa.

Aplicación: el programa se usa una vez a la semana, de manera óptima de 21:00 a 23:00.

2.1.24. Regulación del sistema endocrino

El sistema endocrino regula la actividad de los órganos con la ayuda de hormonas y asegura la constancia del entorno interno (homeostasis). El sistema endocrino está involucrado en el desarrollo del cuerpo, su crecimiento, función reproductiva. También regula el estado mental y las reacciones emocionales.

El programa normaliza la función del sistema hipotálamo-pituitaria-adrenal

las glándulas sexuales y regula los procesos excretores en el cuerpo.

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento del día.

2.1.25. El modo Antidolor

El dolor es la reacción de los órganos y sistemas del cuerpo a la influencia agresiva del entorno externo o al colapso de las funciones de los órganos internos. El dolor crea una gran incomodidad, no le permite sentir la plenitud de la vida. La única manera efectiva de combatir el dolor es eliminar las causas de su aparición. El programa

"Antidolor" incluye un conjunto de frecuencias que neutralizan las causas del dolor de una variedad de origen.

Aplicación :: El programa se aplica en cualquier momento del día según sea necesario. Si el dolor no pasa dentro de una hora, entonces necesita repetir la sesión.

2.1.26. Modo renal

Las funciones realizadas por los riñones son múltiples. El principal es la regulación del metabolismo del agua y electrolitos en el cuerpo, que mantiene un volumen y presión constantes de sangre y otros fluidos. Además, los riñones regulan el equilibrio ácido-base en el cuerpo. Excretan los productos del metabolismo del nitrógeno: urea, creatinina, ácido úrico, etc.

La alteración de la nutrición (especialmente el exceso de nutrición), el metabolismo, la falta de vitamina A, la hipotermia y las infecciones infecciosas causan contaminación renal, la formación de arena y piedras.

El programa promueve la eliminación activa de toxinas del cuerpo, regula el trabajo de los riñones y también previene la formación de cálculos renales.

Aplicación: el programa se puede utilizar en cualquier momento del día, de manera óptima, de 17:00 a 19:00. En caso de daño tóxico o infeccioso en el cuerpo, repita después de 0,5 horas. Para el funcionamiento normal de los riñones, asegúrese de usar agua potable limpia - 1-1.5 litros por día.

Atención por favor! Durante el trabajo de este programa, puede haber un aumento de la producción de orina.

2.1.27. Siete chakras

El humano es una estructura de energía compleja, que se basa en siete centros de energía (chakras), ubicados a lo largo de la

columna vertebral. Cada chakra está asociado con ciertos órganos, si se dañan los chakras, se interrumpe el trabajo de los órganos correspondientes. En los chakras hay una acumulación de energía. La energía negativa obstruye los chakras y afecta desastrosamente al cuerpo como un todo.

La acción del programa: armoniza la energía perdida, la distribuye correctamente y por lo tanto restaura el trabajo de los órganos y sistemas como un todo.

Aplicación: el programa se usa durante el día

2.1.28. Regulación del corazón

La actividad del corazón asegura el suministro de órganos con oxígeno y nutrientes, lo que significa un buen rendimiento de todo el cuerpo. Los trastornos cardíacos son causados por un estilo de vida incorrecto, estrés y sobrecarga física.

El programa regula la circulación sanguínea y la presión sanguínea complejas, proporciona un suministro de sangre normal al músculo cardíaco, promueve la autorregulación del corazón y su trabajo estable.

Aplicación: Úselo en cualquier momento del día solo, si es necesario, dos veces (de manera óptima, de 11:00 a 13:00).

Atención por favor! No se recomienda utilizar el programa durante 2 meses después de un infarto de miocardio.

2.1.29. Síndrome de fatiga crónica

Todos experimentaron este estado en la vida cotidiana después del trabajo duro y la falta de sueño. Por lo general, la fatiga pasa

después de un buen descanso y sueño adecuados. Si los síntomas persisten, significa que su cuerpo quiere saber que está enfermo. Los largos períodos de fatiga pueden ser un signo de una enfermedad grave conocida como síndrome de fatiga crónica (SFC), que afecta principalmente a las mujeres.

Para prevenir esta condición, se recomienda utilizar el programa "Síndrome de fatiga crónica".

Aplicación: use el programa 1 - 2 veces al día por la mañana.

2.1.30. Reducción de peso (tratamiento de la obesidad)

La obesidad es una condición del cuerpo en la que los depósitos grasos comienzan a acumularse en exceso en su fibra, tejidos y órganos. La obesidad, cuyos síntomas consisten en aumentar el peso del 20% o más en comparación con los valores medios, no es solo la causa de la incomodidad general. También lleva a la aparición de problemas psicofísicos en este contexto, problemas con las articulaciones y la columna vertebral, problemas asociados con la vida sexual, así como problemas asociados con el desarrollo de otras condiciones que acompañan a este tipo de cambios en el cuerpo. Se recomienda utilizar el programa "Reducción de peso" durante el tratamiento de la obesidad por cualquier medio disponible

Aplicación: puede usar el programa diariamente.

2.1.31. Eliminación de la fatiga ocular

La carga constante en los ojos (leer, trabajar en la computadora), así como cambiar las condiciones y el ritmo de la vida causan fatiga e irritación ocular, pérdida de la visión.

El programa reduce la fatiga visual, alivia la fatiga y el dolor, promueve la normalización de la visión.

Uso: usar a la hora de acostarse todos los días, durante 7 días. Entonces un día, descansa. Repita las sesiones hasta obtener el resultado deseado. Después de que termine el programa, no esfuerces tus ojos.

Atención: para obtener el mejor resultado, combine con ejercicios para el músculo ciliar.

2.1.32. Fatiga mental

La fatiga mental y la disminución del rendimiento asociado tienen sus detalles. Usualmente ocurren después de un trabajo intenso y duradero y están asociados con un aumento o deterioro excesivo de la actividad de los sentidos externos. La fatiga mental causa deterioro de la memoria seguido de un lavado que es una eliminación rápida de la memoria de lo que se aprendió poco antes. El programa

La "fatiga mental" aumenta la eficiencia del cerebro, mejora la memoria y, junto con un estilo de vida saludable, establece el componente psicoemocional de una persona en positivo.

Aplicación: diaria. 1-2 veces al día durante el día.

2.1.33. Fatiga de la espalda

La columna vertebral juega el papel del núcleo del cuerpo. La carga pesada cae cuando se transportan cargas pesadas. Especialmente las lesiones de la columna vertebral son comunes entre los atletas y aquellos que realizan trabajos físicos intensos.

La posición sentada incorrecta también predispone a problemas futuros de la columna vertebral.

El programa está diseñado para fortalecer la columna vertebral. El programa "Fatiga de la espalda" ayuda a mantener la columna vertebral en buenas condiciones. Esto mejora el intercambio de fósforo y calcio. Las funciones protectoras del cuerpo se fortalecen.

Aplicación: El programa "Fatiga de espalda" se puede utilizar en un momento conveniente si es necesario.

2.1.34. Colesterol

La hipercolesterolemia no es una enfermedad, sino un factor de riesgo para el desarrollo de la aterosclerosis. Este término denota un aumento en el contenido de colesterol en la sangre. El colesterol es una parte de las membranas celulares. Sin embargo, una cantidad excesiva de colesterol en la sangre conduce a la formación de placas ateroscleróticas.

Usar el programa "Colesterol" reducirá el colesterol en la sangre, reducirá el riesgo de aterosclerosis, ayudará a limpiar y fortalecer los vasos.

Aplicación: El programa se recomienda para utilizar cursos, al menos 1 mes. Cuanto más pronunciadas son las violaciones del metabolismo de los lípidos, más tiempo es necesario para aplicar el programa. Para la prevención, el programa se puede incluir 1-2 veces por semana.

2.1.35. Sensibilidad dental

El aumento de la sensibilidad de los dientes (hiperestesia) puede causar muchos problemas. Parece que nuestros dientes

comienzan a reaccionar ante cualquier estímulo: caliente, frío, dulce, picante. Las estadísticas de los últimos años han demostrado que el atractivo del cuidado dental sobre la mayor sensibilidad de los dientes ha crecido varias veces, lo que indica el crecimiento de enfermedades no cariosas. El programa "Sensibilidad de los dientes" permite prevenir el desarrollo y eliminar la dolencia: aumento de la sensibilidad de los dientes

Aplicación: el programa se puede usar en cualquier momento según sea necesario

Atención por favor! El dispositivo tiene una contraindicación para el uso por mujeres en el primer trimestre de embarazo y personas que se han sometido a un trasplante de órganos. Tampoco se recomienda su uso durante los primeros dos meses después del infarto de miocardio. En caso de enfermedad cardíaca severa, el dispositivo debe ubicarse a una distancia no menor a 0.5 m del cuerpo.

2.1.36 El Programa de Energía Universal

El programa Universal Energy es un programa único capaz de eliminar la fatiga y prevenir su aparición, protegerlo de la somnolencia, el mal humor y otros inconvenientes diarios que aquejan a cualquier persona moderna. El problema de la disminución de la fuerza y la mala salud es especialmente urgente para los habitantes de las ciudades. Y está relacionado no solo con el estrés y la ecología deficiente, sino también con los campos biopatógenos que nos rodean (computadoras, teléfonos inteligentes, electrodomésticos).

El dispositivo Life Balance, al operar el programa de Energía Universal, irradia frecuencias electromagnéticas armónicas que igualan los indicadores bioenergéticos, activan las funciones de regulación del cuerpo, basado en fenómenos de resonancia, protege contra factores bio y geopatogénicos. programa de

restauraciones de acción electromagnéticas diseñado correctamente y mejora los indicadores fisiológicos, alivia el estrés emocional , carga con energía, contribuye a la adquisición de buen humor, excelente estado de salud. Al desarrollar el programa de Energía universal, se utilizó el principio de "frecuencias flotantes", que por definición son más fisiológicas y mejor percibidas por el cuerpo.

Se sabe que la energía en el cuerpo humano fluye continuamente. Sin embargo, a menudo en el cuerpo existen tales "islas" de energía estancada negativa. El programa de Energía universal nos permitirá canalizar nuestra energía en la dirección correcta para eliminar el estancamiento de la información negativa.

Aplicación: este programa se puede usar de 1 a 2 veces al día durante el día.

Atención por favor! No use el programa más de 2 veces al día. No usar en la noche

El programa de Energía universal se utiliza para fortalecer sus propias fuerzas de protección y para corregir los efectos de las emisiones electromagnéticas naturales de los biosistemas naturales.

La principal ventaja del dispositivo de ajuste de biosistemas naturales Life Balance es la capacidad de componer un programa automático individual basado en los resultados de las pruebas realizadas con el dispositivo Life Expert y la disponibilidad de programas automatizados y personalizados para mantener una alta tasa de salud independientemente de diversos factores externos e internos . Además, el usuario puede aplicar sus programas personalizados en modo manual. Permite

seleccionar un curso preventivo individual para cada persona en particular.

"¡Dispositivo para ajustar el Life Balance natural de los biosistemas naturales" no es un dispositivo médico!

Atención por favor! El dispositivo tiene una contraindicación para el uso por mujeres del primer trimestre de embarazo y personas que se han sometido a un trasplante de órganos. Tampoco se recomienda su uso durante los primeros dos meses después del infarto de miocardio. En caso de enfermedad cardíaca severa, el dispositivo debe ubicarse a una distancia no menor a 0.5 m del cuerpo.

12. Nota: Se recomienda el uso de un dispositivo de biosistemas

naturales Life Balance junto con el dispositivo de prueba de biosistemas naturales. " Life Expert " para obtener el resultado más efectivo.