

Συγγραφείς:
Chernogubov V. A.
Ibragimova R. R.

Lidomed-Bio Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης LLC - Χάρκοβο, Ουκρανία

Οδηγίες Χρήσεως
της ηλεκτρομαγνητικής συσκευής χαμηλών συχνοτήτων
“Life Balance”
Συσκευή ρύθμισης φυσικών βιοσυστημάτων



Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στον κατασκευαστή.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή κοινοποίηση των δεδομένων, καθώς και η διανομή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγγράφου, σε οποιαδήποτε μορφή, δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Lidomed-Bio R&D Enterprise ή της αντιπροσωπίας Ελλάδος BioWeb.

Περιεχόμενα	σελ.
1. Γενικές οδηγίες	2
1.2. Εισαγωγή	2
2. Εκχώρηση συσκευής	3
3. Πληροφορίες συσκευής	3
4. Διαδικασίες προετοιμασίας	3
5. Διαδικασίες χειρισμού	3
6. Επίπεδα έντασης	4
7. Δυνατότητες συσκευής	4
8. Αντενδείξεις	5
9. Μέτρα προφύλαξης	5
10. Συντήρηση	5
11. Δυνατότητες	6
11.1. Προστασία κατά των παρασίτων	6
11.1.1. Βασικά προγράμματα	6 με 14
11.2. Ρύθμιση και εναρμόνιση του σώματος	15
11.2.1. Βασικά προγράμματα	15 με 22
11.3. Ενεργειακό πρόγραμμα γενικής χρήσης	22
12. Σημειώσεις	23

1. Γενικές οδηγίες:

Αυτός είναι ένας οδηγός χρήσης, για τη συσκευή ρύθμισης των φυσικών βιοσυστημάτων Life Balance (εφεξής η συσκευή). Αυτός ο οδηγός προορίζεται για την γνωριμία της συσκευής, τη δομή της, τη διαδικασία λειτουργίας, των κανόνων λειτουργίας και των κανονισμών συντήρησής της.

1.2. Εισαγωγή:

Οι τεχνολογίες βιοσυντονισμού, εισχώρησαν και ενσωματώθηκαν στην καθημερινότητά μας ως συσκευές βελτίωσης της υγείας για οικιακή χρήση. Αυτές οι τεχνολογίες, βασίζονται στο γεγονός ότι όλες οι μορφές ζωής έχουν τις δικές τους συχνότητες ταλάντωσης και εκπέμπουν τα δικά τους κύματα ειδικού τύπου. Μπορούν να εντοπιστούν και να μετρηθούν. Όταν το σώμα παρουσιάζει δυσλειτουργίες, το μήκος κύματος αλλάζει και τότε, στα υγιή όργανα και τους ιστούς αρχίζουν να εμφανίζονται μη φυσιολογικές συχνότητες. Όλες οι παράμετροι μπορούν να μετρηθούν με αρκετή ακρίβεια και να ρυθμιστούν, εάν υπάρχουν προβλήματα υγείας, τα οποία ένα άτομο δεν μπορεί από πριν να γνωρίζει ότι υπάρχουν. Αυτό σημαίνει ότι κάθε άτομο, μπορεί να υποβληθεί σε προκαταρκτική αξιολόγηση οργανισμού, αποφεύγοντας την βαριά παρεμβολή πολύ εξειδικευμένων συσκευών δυνατής ακτινοβολίας. Σύμφωνα με αποτελέσματα εξετάσεων, ένα τέτοιο είδος αναζωογόνησης, προσφέρει θετικά αποτελέσματα μέχρι και 95%.

Διαθέτουμε τη συσκευή ρύθμισης φυσικών βιοσυστημάτων «Life Balance», που συντελεί στη ενίσχυση της άμυνας του σώματος και την προσαρμογή του στην έκθεση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας των φυσικών βιοσυστημάτων.

Πρόκειται για μια μοναδική ηλεκτρομαγνητική συσκευή παγκόσμιας κλάσης, που συντελεί στη διατήρηση υψηλού ποσοστού υγείας. Η λειτουργία της, βασίζεται στην ακτινοβολία των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων των οργάνων του σώματος και των συστημάτων, που συντονίζονται με τις ταλαντώσεις των διαφόρων παρασίτων, ιών και έλμινθων. Η «Life Balance», επιλεκτικά, επηρεάζει και απενεργοποιεί τους παθογόνους παράγοντες, επιτρέποντας στον ανθρώπινο οργανισμό να λειτουργεί σε φυσιολογικές συνθήκες, ανεπηρέαστο από εξωτερικούς παράγοντες. Βοηθά στην εναρμόνιση των οργάνων και των συστημάτων. Η εταιρεία “Lidomed Bio Research & Development Enterprise LLC” με έδρα το Χάρκοβο της Ουκρανίας, είναι αυτή που σήμερα κατασκευάζει συσκευές αυτού του τύπου.

Σημαντικό: Τώρα πλέον διαθέτουμε συσκευές, που επιτρέπουν να σώσετε την υγεία σας!

Άνθρωποι οποιασδήποτε ηλικίας, χρειάζονται να διατηρούν την υγεία τους σε πολύ καλή κατάσταση. Είτε πρόκειται για βρέφος είτε για ηλικιωμένο, το άτομο πρέπει πάντα να αγαπά και να φροντίζει τον εαυτό του και την υγεία του καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του.


2. Αποστολή συσκευής:

Η λειτουργία της συσκευής Life Balance, βασίζεται κυρίως στην ρύθμιση των λειτουργιών του οργανισμού, μέσω ηλεκτρομαγνητικής εκπομπής. Η εκπομπή, έχει τις δικές της παραμέτρους, ικανές να αλληλεπιδρούν με τους βιορυθμούς του ανθρώπινου οργανισμού. Το αποτέλεσμα εξαρτάται από την ατομική επιλογή συγκεκριμένης συχνότητας, η οποία λόγω της επίδρασης στον οργανισμό, μπορεί να εντείνει τις φυσικές διεργασίες, εναρμονίζοντας και σταθεροποιώντας όλες τις διαδικασίες του ανθρώπινου οργανισμού, μέσω χαμηλών ηλεκτρομαγνητικών συχνοτήτων.

3. Πληροφορίες για τη συσκευή:

Το εξωτερικό της συσκευής είναι κατασκευασμένο από πολυεστέρα.

- 1 - Οθόνη
- 2 - Πλήκτρο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 3 - Πλήκτρο επιλογών/επιβεβαίωσης
- 4 - Πλήκτρο μενού
- 5 - Πλήκτρο ρύθμισης έντασης σήματος
- 6 - Πλήκτρο επιλογής προγράμματος - επάνω
- 7 - Πλήκτρο επιλογής προγράμματος - κάτω

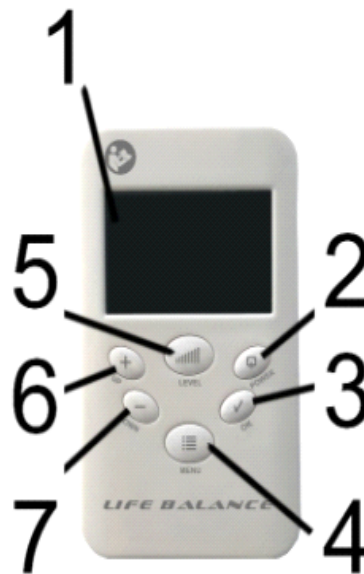

Εικόνα: Life Balance

4. Διαδικασίες προετοιμασίας:

- Βγάλτε τη συσκευή από τη συσκευασία και επιθεωρήστε την οπτικά, για οποιαδήποτε εξωτερική βλάβη. Ελέγξτε την πληρότητα της συσκευής.
- Μετά τη μεταφορά ή την αποθήκευση της συσκευής σε χαμηλές θερμοκρασίες, διατηρήστε τη σε θερμοκρασία δωματίου για τουλάχιστον 2 ώρες.
- Ενεργοποιήστε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήση.

5. Διαδικασίες χειρισμού:

- Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το πλήκτρο 2.
- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 3 για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα.
- Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.
- Εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο 4, για να επιλέξετε από τις ρυθμίσεις άλλη γλώσσα ή το πλήκτρο 5, για να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης του σήματος.

6. Επίπεδα έντασης:

Το **1ο επίπεδο** έντασης της εκπομπής της συσκευής, είναι προεπιλεγμένο. Το επίπεδο αυτό, χρησιμοποιείται για την πρόληψη και την προστασία του σώματος από απρόσμενες αλλαγές στα όργανα και στα συστήματα. Πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η συσκευή βρίσκεται σε άμεση επαφή με το σώμα (π.χ. μεταφορά της συσκευής σε τσέπη). Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην πληγείσα περιοχή (για παράδειγμα: α) βρογχοπνευμονικό σύστημα - σε θήκη στο στήθος, β) ουρογεννητικό σύστημα - σε τσέπη παντελονιού, κλπ.).

Το **2ο επίπεδο** έντασης, χρησιμοποιείται σε υφιστάμενες χρόνιες φλεγμονώδεις διεργασίες στα όργανα και τα συστήματα, κατά την έξαρση ή στις οξείες φλεγμονώδεις μεταβολές του οργανισμού.

Το **3ο επίπεδο** έντασης, συνιστάται όταν η συσκευή είναι ελαφρώς απομακρυσμένη κατά τη διάρκεια της χρήσης (για παράδειγμα, η συσκευή βρίσκεται στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στο τραπέζι).

Το **4ο επίπεδο** έντασης, συνιστάται όταν το χρησιμοποιείτε υπό τη φροντίδα ενός θεραπευτή, μετά από αξιολόγηση στη συσκευή Life Profi (για χρόνιες ασθένειες). Αυτός ο τρόπος λειτουργίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η συσκευή τοποθετείται τόσο σε άμεση επαφή με το σώμα, όσο και σε απόσταση ενός μέτρου.

Το **5ο επίπεδο** έντασης, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία ολόκληρης της οικογένειας, σε απόσταση έως και 1,5 μέτρο. Σε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή έχει το ισχυρότερο σήμα και κατά συνέπεια, καταναλώνει το περισσότερο ρεύμα. Το επίπεδο αυτό, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόληψη της ανάπτυξης της νόσου ή για την εξάλειψη παρασιτικών μικροβίων από τον οργανισμό (έλμινθες, πρωτόζωα, ιώσεις κ.λπ.). Για παράδειγμα, είναι ιδανική η προληπτική χρήση, κατά τη διάρκεια των εποχιακών ιώσεων (γρίπη, αδενοϊός, ροταϊός, κ.λπ.). Η χρήση του επιπέδου 5, είναι επιθυμητή υπό την επίβλεψη θεραπευτή. Λάβετε υπόψη, όσο υψηλότερη είναι η ένταση της εκπομπής, τόσο μικρότερη είναι η διάρκεια της συνεχούς λειτουργίας της συσκευής, καθώς η μπαταρία εκφορτίζεται γρηγορότερα.

Σημαντικό: Όταν χρησιμοποιείτε τα ατομικά προγράμματα αυτόματης λειτουργίας, με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών με τη συσκευή Life Expert, ενεργοποιήστε το 1ο ή το 2ο επίπεδο έντασης. Τα επίπεδα 3, 4 και 5 πρέπει να χρησιμοποιούνται με την παρακολούθηση του θεραπευτή.

7. Δυνατότητες συσκευής:

- 35 ενσωματωμένα αντιπαρασιτικά προγράμματα, 35 ενσωματωμένα προγράμματα προσαρμογής και εναρμόνισης, 1 ενσωματωμένο πρόγραμμα γενικής χρήσης, για την καταπολέμηση της κούρασης και την αποκατάσταση των προστατευτικών λειτουργιών του σώματος.
- Εύρος λειτουργίας έως 1,5 μέτρο.
- Εύρος συχνότητας: από 0.1Hz έως 99.99kHz.
- Ρύθμιση συχνότητας: 0.01Hz
- Υβριδική κεραία 2 πομπών, με φέρον σήμα τριγωνικής και ορθογώνιας μορφής, με φέρουσες συχνότητες 27mHz (θεραπευτικά) και 10kHz (αντιπαρασιτικά) αντίστοιχα.
- Προγραμματισμός συσκευών χωρίς προγραμματιστή, μέσω καλωδίου USB.
- Χειροκίνητη ρύθμιση επιπέδου έντασης σήματος.
- Έγχρωμη οθόνη και πολύγλωσσο μενού.
- Μπαταρία ιόντων λιθίου, 12 ωρών συνεχόμενης λειτουργίας, στο επίπεδο 5.

Ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας της συσκευής, είναι από 12 ώρες έως και 5 ημέρες, ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο έντασης εκπομπής.

8. Αντενδείξεις:

Μόνο υπό την επίβλεψη θεραπευτή

- Εμφυτευμένος βηματοδότης
- Μεταμοσχευμένα όργανα
- Καλοήθη και κακοήθη νεοπλασμάτα
- Διαταραχή αιμορραγίας
- Διαταραχές οξείας εγκεφαλικής και στεφανιαίας κυκλοφορίας
- Εγκυμοσύνη (πρώτο τρίμηνο)
- Επιληψία (κρίση)
- Ατομική δυσανεξία στην ηλεκτρομαγνητική έκθεση
- Ψυχικές ασθένειες
- Παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους, υπό αυστηρή παρακολούθηση θεραπευτή

Προσοχή! Όταν χρησιμοποιείτε τα προγράμματα, μπορεί να εμφανιστεί οξεία επιδείνωση της κύριας νόσου, η οποία μπορεί να συνοδεύεται από γενική δυσφορία, αδυναμία, διάρροια, συχνή ούρηση, δίψα, υπνηλία ή άνοδο θερμοκρασίας. Σε αυτή την περίπτωση, αυξήστε το διάστημα μεταξύ των συνεδριών. Όλες οι αντιδράσεις μπορεί να εμφανιστούν μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες από τη χρήση της συσκευής. Αυτά τα φαινόμενα, σχετίζονται με την ατομική αντίδραση του οργανισμού στην επίδραση των συχνοτήτων της συσκευής και υποδεικνύουν εντατικοποίηση των αντιδράσεων του μολυσμένου οργανισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εμφανιστούν αντιδράσεις σε μεταγενέστερο χρόνο και η δυσφορία μπορεί να επιμείνει έως ενός μήνα από την έναρξη της χρήσης της συσκευής.

9. Μέτρα προφύλαξης:

Η συσκευή είναι ηλεκτρικά ασφαλής, χωρίς να απαιτείται γείωση.

Απαγορεύεται αυστηρά να:

- Εκτελέσετε οποιεσδήποτε διαδικασίες χρησιμοποιώντας μια ελαττωματική συσκευή.
- Εκτελέσετε εργασίες επισκευής, όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Πραγματοποιήσετε θεραπεία με συσκευή που δεν λειτουργεί σωστά.

Εάν δείτε τυχόν σφάλματα στη λειτουργία της συσκευής, σταματήστε αμέσως τις διαδικασίες και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή την αντιπροσωπία.

Προσοχή! Όταν χρησιμοποιείτε προγράμματα της συσκευής «Life Balance», θα πρέπει να καταναλώνετε πόσιμο νερό! (30 ml / 1 kg σωματικού βάρους).

10. Συντήρηση:

Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση και τη δοκιμή της απόδοσης της συσκευής. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από την υγρασία και διαβρωτικό περιβάλλον. Προστατεύστε την από κραδασμούς και απότομη αλλαγή θερμοκρασίας.

Προσοχή! Για να αποφύγετε βλάβη στη συσκευή, μην χρησιμοποιείτε διαλύτες ή γυαλιστικά για τον καθαρισμό του εξωτερικού μέρους. Καθώς χρησιμοποιείται η «Life Balance», η μπαταρία εξασθενεί με την πάροδο του χρόνου. Αυτή είναι η φυσική φθορά της μπαταρίας εξαιτίας της λειτουργίας της συσκευής.

Η συσκευή ρύθμισης φυσικών βιοσυστημάτων «Life Balance», είναι μια ηλεκτρομαγνητική συσκευή που συντελεί στη διατήρηση ενός υψηλού ποσοστού υγείας, επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό με έναν ήπιο και ασφαλή τρόπο, χωρίς να διαταράσσει την ενεργειακή του ισορροπία, ούτε ειδικά, ούτε γενικά. Το βασικό πλεονέκτημα της συσκευής, είναι η δυνατότητα σύνθεσης ενός προσωπικού αυτόματου προγράμματος, βασισμένου στα αποτελέσματα αξιολόγησης με τη συσκευή «Life Expert», ή τη χρήση προσαρμοσμένων προγραμμάτων για τη διατήρηση υψηλού

ποσοστού υγείας κάτω από διαφορετικές εξωτερικές και εσωτερικές συνθήκες. Εκτός αυτού, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης προσωπικών προληπτικών προγραμμάτων, με χειροκίνητη λειτουργία. Επιτρέπει την επιλογή ενός εξατομικευμένου προγράμματος πρόληψης για κάθε άτομο. Η επίδραση της «Life Balance», είναι **απολύτως αβλαβής**, επειδή οι συχνότητες των παρασίτων κυμαίνονται από 100 kHz έως 900 kHz. Ενώ οι συχνότητες συντονισμού των δομών του ανθρώπινου οργανισμού, κυμαίνονται από 1 mHz έως 10 mHz. Οι συχνότητες που είναι επιβλαβείς για το ανθρώπινο οργανισμό, βρίσκονται πέραν του εύρους των 1 mHz.

Η συσκευή ρύθμισης φυσικών βιοσυστημάτων Life Balance δεν είναι ιατρική συσκευή!

Προσοχή! Η συσκευή, δεν ενδείκνυται (προληπτικά) για τις γυναίκες, κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και τα άτομα με μεταμοσχευμένα όργανα. Επίσης, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σε περίπτωση σοβαρών καρδιακών παθήσεων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση όχι μικρότερη από μισό μέτρο από το σώμα.

11. Δυνατότητες:

Η «Life Balance», έχει σχεδιαστεί να εστιάζει κυρίως σε 3 σημεία:

- Προστασία κατά των παρασίτων
- Ρύθμιση και εναρμόνιση του ανθρώπινου σώματος
- Προγραμματισμό γενικής ενεργειακής κατάστασης

11.1. Προστασία κατά των παρασίτων:

Τα αντιπαρασιτικά προγράμματα της συσκευής Life Balance, επιτρέπουν την αποτελεσματική και ασφαλή αποτοξίνωση οργάνων και ιστών, την αποκατάσταση της λειτουργίας των συστημάτων, την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την εξάλειψη διαφόρων λοιμώξεων από τον οργανισμό. Η συσκευή, διαθέτει 35 βασικά προγράμματα, τα οποία είναι πολυδύναμα, χάρη στην αρχή της βασικής λειτουργίας, η οποία στοχεύει στην έκθεση συχνότητας συντονισμού, εμποδίζοντας την ανάπτυξη πολλών ασθενειών.

11.1.1. Βασικά προγράμματα:

1. Έλμινθες

Τις περισσότερες φορές, παθαίνουμε διάφορες εντερικές λοιμώξεις από άπλυτα φρούτα, μη ορθά μαγειρεμένο κρέας και ψάρια ή βρώμικα χέρια, επειδή στο σώμα μας εισέβαλαν κάποιοι έλμινθες (σκώληκες). Η εισβολή αυτή, δεν οδηγεί σε στιγμιαίο θάνατο, αλλά συντηρούμενα από τις τροφές που βρίσκονται στο ανθρώπινο έντερο, τα παράσιτα προκαλούν έλλειψη πολλών χρήσιμων ουσιών στον οργανισμό. Ως αποτέλεσμα, αναπτύσσεται αναιμία και έλλειψη σιδήρου. Οι έλμινθες, χαρακτηρίζονται από την αλλοίωση των προϊόντων ζωτικής δραστηριότητας. Αυτοί είναι οι λόγοι, που προκαλούν την αργή δηλητηρίαση του οργανισμού μας, τη σταδιακή γενική αδυναμία μας, την ευερεθιστότητα, τους πονοκεφάλους και τους πόνους στις αρθρώσεις, την αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής μας και για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλήματα στην ψυχολογία μας, ενώ στα παιδιά, να προκαλέσουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη, έλλειψη ή διαστροφή της όρεξης και εξασθένηση. Πολύ συχνά στα παιδιά που έχουν έλμινθες, δημιουργείται αυξημένη λαχτάρα για γλυκά τρόφιμα. Η ανάπτυξη των έλμινθων, μειώνει περαιτέρω την όρεξή μας. Όταν ζουν στο ανθρώπινο σώμα, τρέφονται από τους ιστούς του και αποβάλλουν τοξικές ουσίες. Αυτές οι τοξίνες, επηρεάζουν την πεπτική μας οδό και συμβάλλουν στη μείωση της ολικής έκκρισης και της οξύτητας των γαστρικών υγρών. Επιδεινώνεται η διαδικασία της πέψης των περιεχομένων του στομάχου και των εντέρων, και η παθογόνος μικροχλωρίδα πολλαπλασιάζεται ραγδαία. Γι' αυτό το λόγο συχνά, έχουμε δυσκοιλιότητα και φούσκωμα. Το πρόγραμμα, επιτρέπει την εκκαθάριση του σώματος από αυτά τα μικρόβια (σκουλήκια). Είναι μη τοξικό για το ανθρώπινο σώμα.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα μία φορά κάθε 3 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 10. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

2. Αντισηπτικό γενικό

Ορισμένες μικρές εκδορές ή πληγές, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του ενεργού τρόπου ζωής. Τις περισσότερες φορές, απλώς τις αγνοούμε, αλλά η αποσύνθεση του δέρματος μπορεί να ακολουθηθεί από μόλυνση, λόγω διείσδυσης μικροοργανισμών που προκαλούν τη φλεγμονώδη διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση, τα απολυμαίνουμε και τοποθετούμε αντισηπτικό. Έτσι και το αντισηπτικό πρόγραμμα της συσκευής, θα βοηθήσει στην αποβολή επιβλαβών ουσιών στο σώμα και στην προώθηση της ταχείας ανάκαμψης.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, χρησιμοποιείται για όλες τις φλεγμονώδεις διεργασίες. Η συχνότητα εφαρμογής, εξαρτάται από τον βαθμό φλεγμονής (2-3 φορές την ημέρα). Στη συνέχεια, χρησιμοποιούμε προγράμματα καθαρισμού για τη λέμφο, το ήπαρ και τους νεφρούς.

3. Βακτηριακές μολύνσεις (βασικό πρόγραμμα)

Ένας μεγάλος αριθμός βακτηρίων, ιδιαίτερα σταφυλόκοκκοι και στρεπτόκοκκοι, βρίσκονται συνεχώς στο δέρμα και το στοματικό ή ρινικό βλεννογόνο. Κατά τη διάρκεια των εξάρσεων τους, οι άνθρωποι συχνά δεν έχουν αρκετό ύπνο, αισθάνονται κρύο ή κούραση. Το ανοσοποιητικό γίνεται ασθενέστερο. Σε αυτή την περίπτωση, τα βακτήρια ξεκινούν τη βλαβερή τους επίδραση στο σώμα. Το άτομο αρχίζει να αισθάνεται πονόλαιμο, υψηλή θερμοκρασία και πυρετό. Το πρόγραμμα, μειώνει την αρνητική επίδραση των βακτηριδίων και βοηθά το σώμα να αποκαταστήσει τη δύναμη και την ανοσία του.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά μέχρι την πλήρη ανάκτηση. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

4. Ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV)

Ο ιός του θηλώματος, πιστεύεται ότι είναι μια από τις συνηθέστερες μεταδιδόμενες από άνθρωπο σε άνθρωπο μολύνσεις. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, σχεδόν το 90% των ανθρώπων, έχουν τον ιό στο σώμα τους και δεν το υποψιάζονται. Ο ιός του θηλώματος, επηρεάζει επιθηλιακά κύτταρα ολόκληρου του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του στοματικού και γεννητικού βλεννογόνου. Το ειδικό χαρακτηριστικό του ιού, είναι η ικανότητα να προκαλεί μη φυσιολογική αναπαραγωγή κυττάρων κι εμφανίζει κονδυλώματα των γεννητικών οργάνων και θηλώματα. Η μόλυνση εμφανίζεται μετά τη διείσδυση του ιού του θηλώματος, μέσω μικρών σχισμών, τραχύτητας και άλλων μικροτραυματισμών του δέρματος. Σε άθικτο δέρμα, δεν υπάρχει λοίμωξη, επειδή ο ιός δεν μπορεί να αναπαραχθεί στα νεκρά κύτταρα της επιφάνειας του δέρματος και στα ανώτερα στρώματα του δέρματος που ξεφλουδίζουν γρήγορα. Μόνο όταν προσβάλει τα ανώριμα μέρη του επιθηλίου χωρίς τραυματισμό, ο ιός του θηλώματος αναπαράγεται γρήγορα και προκαλεί υπερπλασία του δέρματος ή βλάβη.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά μέχρι την πλήρη ανάκτηση. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

5. Ιός Επσταίν-Μπαρ

Ο ιός Epstein-Barr, ανήκει στην οικογένεια του ιού του έρπητα (HHV-4) και είναι η πλέον διαδεδομένη ιογενής λοίμωξη. Σύμφωνα με τις στατιστικές, έως και το 60% των παιδιών και σχεδόν το 100% των ενηλίκων, μολύνονται με αυτόν τον ιό. Ο ιός Epstein-Barr, μεταδίδεται με τον αέρα (μέσω φιλιών), μέσω **μη** σεξουαλικής επαφής (κοινά οικιακά αντικείμενα) και λιγότερο συχνά μέσω του αίματος και μέσω της μητέρας προς το παιδί (κύηση). Η μόνη πηγή μόλυνσης, είναι ο άνθρωπος, συνήθως ασθενής με λανθάνοντες ή ασυμπτωματικούς τύπους μόλυνσης. Ο ιός, εισέρχεται στο σώμα, μέσω της αναπνευστικής οδού, από όπου διεισδύει στον λεμφικό ιστό,

επηρεάζοντας τους λεμφαδένες, τις αμυγδαλές, το ήπαρ και τη σπλήνα.

Εφαρμογή: Για την κατάσταση του χρόνιου φορέα, το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 1-2 φορές ημερησίως για 10 έως 14 ημέρες, μέχρι την πλήρη ανάρρωση. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

6. Γεννητικός έρπης

Ο γεννητικός έρπης, είναι μια χρόνια (μακροχρόνια) ασθένεια, που προκαλείται από τον ιό του απλού έρπητα, τύπου 2. Ο ιός παραμένει στο σώμα και μπορεί να ενεργοποιηθεί από στιγμή σε στιγμή. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν 4-5 υποτροπές, κατά τα πρώτα δύο έτη μετά τη μόλυνση. Η υποτροπή είναι εκ νέου ανάπτυξη της νόσου.

Εφαρμογή: Για τη χρόνια κατάσταση, το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται 1-2 φορές ημερησίως για 10 έως 14 ημέρες, μέχρι την πλήρη ανάρρωση. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

7. Έρπης ζωστήρας

Ο ιός του έρπητα ζωστήρα, εισέρχεται στο σώμα ευπαθούς ατόμου, με αερομεταφερόμενη μετάδοση ή μέσω μη σεξουαλικής επαφής. Ο ιός ζωστήρας, αφού διεισδύσει στο ανθρώπινο σώμα, αρχικά προκαλεί ανάπτυξη της ανεμοβλογιάς. Μετά την αποκατάσταση, αυτός ο ιός δεν εξαφανίζεται, αλλά εισέρχεται σε νευρικά κύτταρα των νωτιαίων κόμβων. Μπορεί να υπάρχει εδώ και χρόνια η μόλυνση, χωρίς καμία εκδήλωση. Ωστόσο, υπό δυσμενείς συνθήκες, ενεργοποιείται και εκδηλώνεται ως έρπητας ζωστήρας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά για 10 έως 14 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

8. Μύκητες και μούχλα

Το πρόγραμμα, προστατεύει το σώμα από τη μόλυνση από κοινούς μύκητες, όπως candida ή μύκητες μούχλας. Αυτοί οι μικροοργανισμοί, αποτελούν μέρος της φυσιολογικής μικροχλωρίδας του εντέρου, του κόλπου και του στόματος. Αλλά με μείωση του ανοσοποιητικού, η candida αρχίζει να πολλαπλασιάζεται ενεργά και να επηρεάζει τον οργανισμό. Οι μύκητες μούχλας, καταστρέφουν την υγεία των ανθρώπων και των σπιτιών τους. Το άτομο, εισπνέει τον αέρα που γεμίζει με τα σπόρια της η μύχλα, ακόμη και σε ένα καθαρό δωμάτιο. Μόλις η ανθρώπινη ανοσία αποδυναμωθεί, μετά από οποιαδήποτε ασθένεια, οι κρυφοί παράγοντες του μύκητα μούχλας που ζει στον οργανισμό, αρχίζουν να προκαλούν ασθένειες, επηρεάζοντας τα όργανα και τα οστά. Ο μύκητας μπορεί να απελευθερώσει τοξικούς παράγοντες (μυκοτοξίνες), που μπορεί να είναι επιβλαβείς για ανθρώπους και ζώα. Μπορούμε να καταλάβουμε την επίδραση του μύκητα, όταν τα σπόρια του διεισδύσουν μέσα μας, μέσω του εισπνεόμενου αέρα, του δέρματος ή των ιδροποιών αδένων. Ο μύκητας είναι παντού, αλλά το αγνοούμε συνήθως. Μπορεί να κόβουμε τους πράσινους λεκέδες από το ψωμί, από το τυρί, να αφαιρούμε το λεπτό λευκό στρώμα από την μαρμελάδα και απλά να τρώμε το υπόλοιπο, αλλά δεν έχουμε αποφύγει τον επικίνδυνο, γιατί ο μύκητας είναι παντού. Ακόμα κι αν μόνο ένα σημείο του πορτοκαλιού επηρεαστεί από μούχλα, αυτό σημαίνει ότι ολόκληρο το φρούτο είναι χαλασμένο. Η πρόληψη του μύκητα candida ή μούχλας, μέσω του προγράμματος, αποκαθιστά την ισορροπία της όξινης βάσης, που εμποδίζει την αναπαραγωγή του μύκητα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 1-3 φορές την ημέρα για 2 έως 4 εβδομάδες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

9. Γρίπη

Η γρίπη, είναι μια σοβαρή ιογενής λοίμωξη. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιός που είναι επικίνδυνος, αλλά οι επιπλοκές μετά την προσβολή του. Με τη χαμηλή ανοσία, το σώμα γίνεται επιρρεπές σε επιθέσεις άλλων λοιμώξεων. Για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες συνέπειες κατά τη διάρκεια μίας

επιδημίας, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα «Γρίπη». Για την πρόληψη της βακτηριακής μόλυνσης, θα πρέπει επίσης, να χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα «Βασικές βακτηριακές λοιμώξεις» και προγράμματα για τον καθαρισμό των λεμφαδένων, του ήπατος και των νεφρών.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη κατά τη διάρκεια της επιδημίας, το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά κάθε 2 ημέρες και αν είναι απαραίτητο, καθημερινά. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

10. Δερματομυκητιάσεις

Οι παθογόνοι μικροσκοπικοί μύκητες, μπορούν να επηρεάσουν το δέρμα, προκαλώντας ασθένειες που είναι κοινώς γνωστές ως δερματομύκητες. Οι δερματομύκητες, είναι δερματικές παθήσεις, που προκαλούνται από διάφορους μύκητες και ταξινομούνται συνήθως, ανάλογα με τη θέση του δερματικού εξανθήματος. Το πρόγραμμα, βοηθά τον οργανισμό μας να αφαιρέσει τις τοξίνες που προκαλούνται από μύκητες, μειώνοντας το φορτίο στα όργανα και τα συστήματα, επιταχύνοντας την απομάκρυνση επιβλαβών παραγόντων τον οργανισμό μας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, μία φορά την ημέρα. Η εφαρμογή διαρκεί 2 εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, φροντίζουμε να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1 με 1,5 λίτρο καθαρού νερού.

11. Αποτοξίνωση μούχλα και μύκητες

Το πρόγραμμα, βοηθά τον οργανισμό μας να αφαιρέσει τις τοξίνες που προκαλούνται από μύκητες, μειώνοντας το φορτίο στα όργανα και τα συστήματα επιταχύνοντας την απομάκρυνση επιβλαβών παραγόντων από τον οργανισμό μας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, μία φορά την ημέρα. Η εφαρμογή διαρκεί 2 εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, φροντίζουμε να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1 με 1,5 λίτρο καθαρού νερού.

12. Αποτοξίνωση του οργανισμού (Detox)

Κάθε μέρα τρώμε ακατάλληλο ή επικίνδυνο φαγητό, που είναι ημιτελές και γρήγορο, αναπνέουμε δηλητηριασμένο αέρα, πίνουμε αλκοόλ ή φάρμακα, επιβαρυνόμαστε με καπνό τσιγάρου και μολυνόμαστε από παθογόνα μικρόβια. Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός μας αρχίζει να δυσλειτουργεί. Πονοκέφαλοι, εξασθένηση της μνήμης, δυσκοιλιότητα ή απώλεια αίσθησης γεύσης, είναι μερικά από τα συμπτώματα. Τι πρέπει να γίνει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις; Αποτοξίνωση του οργανισμού! Το πρόγραμμα, βοηθά στην επιτάχυνση της απομάκρυνσης επιβλαβών παραγόντων από τον οργανισμό μας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά, μία φορά την ημέρα. Η εφαρμογή διαρκεί 2 εβδομάδες. Όταν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, φροντίζουμε να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1 με 1,5 λίτρο καθαρού νερού.

13. Αφόδευση

Το πρόγραμμα, στοχεύει στην ενεργοποίηση των εκκριντικών λειτουργιών για την απομάκρυνση των τοξινών. Βασική προϋπόθεση του προγράμματος, είναι η αυξημένη πρόσληψη καθαρού νερού – τουλάχιστον 30 ml ανά κιλό βάρους, την ημέρα. Το πρόγραμμα, εξασφαλίζει την απομάκρυνση των τοξινών από τον οργανισμό μας, τόσο από τη χημική δηλητηρίαση, όσο και από τα παράσιτα και τις τοξίνες τους. Ρυθμίζει το νευρικό, ανοσοποιητικό, λεμφικό και ενδοκρινικό σύστημα, τη δραστηριότητα του γαστρεντερικού σωλήνα - συκωτιού, νεφρών, εντέρων - κυκλοφορικό σύστημα και παραγωγή αίματος.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά κάθε 3 ημέρες. Η εφαρμογή διαρκεί 2 εβδομάδες. Βασική προϋπόθεση του προγράμματος, είναι η αυξημένη πρόσληψη καθαρού νερού – τουλάχιστον 30 ml ανά κιλό βάρους, την ημέρα.

14. Αναπνευστική σύστημα και μύτη

Η εύκολη αναπνοή, είναι το κλειδί για την αίσθηση της ευεξίας. Με την κακή αναπνοή, ο οργανισμός μας στερείται οξυγόνο, που οδηγεί σε υποπαραγωγή της ενέργειας, που είναι ζωτικής σημασίας για την κανονική λειτουργία του σώματος και όλες τις ζωτικές διαδικασίες. Το πρόγραμμα, καταπολεμά τη ρινική συμφόρηση που προκαλείται από διάφορους παράγοντες.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά κάθε 2 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

15. Candida

Η Candida, είναι ζυμομύκητας που ζει και δρα στο ανθρώπινο σώμα και του προκαλεί καντιντίαση. Η καντιντίαση, είναι μια συχνή παρενέργεια της παρατεταμένης και ανεξέλεγκτης πρόσληψης αντιβιοτικών. Η παρατεταμένη θεραπεία με αντιβιοτικά, καταστρέφει όλα τα βακτηρίδια και προκαλεί μικροβιακή ανισορροπία, η οποία οδηγεί σε ενεργό αναπαραγωγή και κατανομή μυκήτων. Το πρόγραμμα, βοηθάει τον οργανισμό, να εμποδίσει την αναπαραγωγή του ζυμομύκητα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά κάθε 2 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

16. Candida albicans

Σχεδόν το 80% του πληθυσμού του πλανήτη, είναι φορείς της Candida Albicans, του παρασιτικού μύκητα και μόνο λίγοι το γνωρίζουν. Η ασθένεια αυτή, είναι γνωστή στην ιατρική ως καντιντίαση. Μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία, σε νεογνά ή ενήλικες. Το πρόγραμμα, προστατεύει το σώμα από το μύκητα Candida albicans. Ο μικροοργανισμός αυτός, προκαλεί ένα σύνδρομο χρόνιων διαταραχών, που γενικά επηρεάζουν τα εννέα διαφορετικά συστήματα του σώματος: το πεπτικό, το νευρικό, το καρδιαγγειακό, το λεμφικό, το αναπνευστικό, το αναπαραγωγικό, το ουροποιητικό, το ενδοκρινικό και το μυοσκελετικό. Με την πτώση του ανοσοποιητικού, η Candida albicans αρχίζει να πολλαπλασιάζεται ραγδαία και να βλάπτει τον οργανισμό μας. Το πρόγραμμα, ρυθμίζει την ισορροπία του PH του οργανισμού μας, εμποδίζοντας έτσι την αναπαραγωγή του μύκητα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται 1-3 φορές την ημέρα για 2 έως 4 εβδομάδες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

17. E.Coli μεταλλαγμένη μορφή

Το πρόγραμμα, είναι σε θέση να καταστείλει την αρνητική επίδραση του βακτηρίου E.Coli και να αυξήσει την αντίσταση του οργανισμού μας στις επιπτώσεις του. Το παθογόνο βακτήριο, όταν εισέρχεται στον οργανισμό μας διαμέσου ακατάλληλων ή κακής ποιότητας φαγητών ή νερού, προκαλεί σοβαρή δηλητηρίαση. Το πρόγραμμα, βοηθάει στην προστασία του οργανισμού μας από τους παθογόνους μικροοργανισμούς, χωρίς να προκαλεί καμία βλάβη στην εντερική μικροχλωρίδα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται καθημερινά για 10 έως 20 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

18. Λέμφος και αποτοξίνωση

Ένα από τα κύρια προγράμματα για τον ανθρώπινο οργανισμό και τον καθαρισμό του, είναι το «Λέμφος και Αποτοξίνωση». Το λεμφικό σύστημα, όχι μόνο καταστρέφει επιβλαβείς και τοξικούς παράγοντες, αλλά καθαρίζει από αυτούς, τα όργανα και τους ιστούς. Με τις διάφορες ασθένειες, η ποσότητα επιβλαβών παραγόντων αυξάνεται στο πολλαπλάσιο. Το λεμφικό σύστημα, δεν είναι σε θέση να τα αφαιρέσει όλα και το σώμα μπορεί πάλι να τοξινωθεί. Το πρόγραμμα, στοχεύει στην επιτάχυνση του καθαρισμού των λεμφαδένων, χωρίς να επιβαρύνει το ίδιο το λεμφικό σύστημα. Συνιστάται η εφαρμογή, μια εβδομάδα πριν από τις διακοπές μας, η οποία θα ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα και θα προετοιμάσει το οργανισμό μας για την προσαρμογή σε νέες συνθήκες.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση μία φορά κάθε 3 ημέρες. Όταν χρησιμοποιούμε

το πρόγραμμα, φροντίζουμε να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1 με 1,5 λίτρο καθαρού νερού.

19. Lamblia intestinalis

Η *Lamblia intestinalis*, προσβάλλει μόνο το ανθρώπινο σώμα προκαλώντας Giardiasis. Η Giardiasis, είναι η μόλυνση από έναν μονοκύτταρο οργανισμό, το πρωτόζωο *Giardia lamblia*, το οποίο μπορεί να μεταφέρεται από τα ζώα, τα πτηνά και τους ανθρώπους. Αυτό το παράσιτο, έχει σχήμα αχλαδιού και διαθέτει δύο πυρήνες και τέσσερα ζευγάρια πλοκαμιών. Κατοικεί στο λεπτό έντερο (συνήθως στο δωδεκαδάκτυλο) και προσκολλάται στα κύτταρα της βλεννογόνου, από τα οποία απορροφά την τροφή και τις θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται στο έντερο. Παρεμβαίνει με την απορρόφηση του λίπους, καθώς και την απορρόφηση άλλων θρεπτικών συστατικών, όπως πρωτεΐνες, βιταμίνη Α, Β6, Β12 και ορισμένα μέταλλα, δημιουργώντας έτσι ελλείψεις στον ανθρώπινο οργανισμό. Αυτό, οδηγεί σε υποσιτισμό και εξάντληση του ανοσοποιητικού συστήματος, αφήνοντας απροστάτευτο τον οργανισμό που πάσχει, έτσι ώστε να αποκρούσει δευτερογενείς λοιμώξεις, όπως βακτηριακές ή μυκητιασικές λοιμώξεις. Τα παράσιτα εισέρχονται στον οργανισμό μας, από βρώμικα χέρια, άπλυτα τρόφιμα και το επιβαρυνόμενο με ρύπους νερό. Το πρόγραμμα, προστατεύει τον οργανισμό μας από τις αρνητικές επιπτώσεις αυτών των μικροβίων. Οι δραστηριότητες προσωπικής υγιεινής και η τακτική χρήση του προγράμματος, ως προληπτικό μέτρο, μας προστατεύουν από αυτούς τους μικροοργανισμούς.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση 1-2 φορές την ημέρα για 10 έως 14 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

20. Μυκητίαση ποδιών και νυχιών

Ο μύκητας στα πόδια, είναι μια προζωική πάθηση οποιασδήποτε φύσης, που επηρεάζει το δέρμα ή τα νύχια. Πιο συχνά, ο πρωταρχικός χώρος της παθολογικής διαδικασίας, είναι οι δημόσιοι χώροι, όπως λουτρά, ντους, γυμναστήρια, πισίνες κτλ. Στο 30% των περιπτώσεων, η πάθηση εμφανίζεται στην οικογένεια από ένα μέλος της, που απέκτησε μύκητες. Μεταδίδεται, ως επί το πλείστον, μέσω κοινών υποδημάτων και άλλων ειδών οικιακής χρήσης. Το πρόγραμμα, κάνει τον οργανισμό μας πιο ανθεκτικό στις επιπτώσεις των μυκήτων και μειώνει την ανάπτυξή τους. Επιλέγοντας αυτό το πρόγραμμα για την πρόληψη των μυκητιασικών παθήσεων, θα έχουμε πάντα καθαρά και υγιή πόδια.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση 2 φορές την ημέρα για 15 ημέρες, έως την εξάλειψη των κλινικών συμπτωμάτων. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

21. Μυκόπλασμα

Το Μυκόπλασμα, είναι παρασιτικό βακτήριο, το οποίο προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στον οργανισμό μας. Μπορεί να προκαλέσει υπογονιμότητα σε γυναίκες και άνδρες, φλεγμονώδεις ασθένειες ή να επηρεάσει την πορεία μιας κύησης. Το μυκόπλασμα, συνήθως, διαγιγνώσκεται αργά σε περίπτωση ασυμπτωματικής εξέλιξής του, προκαλώντας με τη σειρά του, χρόνια φλεγμονή της μήτρας, της ουροδόχου κύστης ή του προστάτη στους άνδρες.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται μία φορά κάθε 3 ημέρες. Για χρόνια κατάσταση, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται 1-2 φορές ημερησίως για 10 έως 14 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 10. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

22. Νηματοσκώληκες (Ασκαρίδες)

Η Ασκαρίδα, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα των πιο κοινών τύπων έλμινθων, σε πολυκυτταρικούς οργανισμούς. Οι πιο γνωστοί εκπρόσωποι των νηματωδών (στρογγυλά σκουλήκια) για εμάς, είναι οι ασκαρίδες και οι σκώληκες. Ζώντας στα έντερα του ανθρώπου, τρέφονται με τους ιστούς τους και απελευθερώνουν τοξίνες. Το πρόγραμμα, καθαρίζει τον

οργανισμό μας από αυτές τις τοξίνες. Το πρόγραμμα είναι απολύτως ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται μία φορά κάθε 3 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 10. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

23. Οξεία αναπνευστική ιογενή λοίμωξη (ARVI)

Οι πιο οξείες αναπνευστικές ιογενείς λοιμώξεις, είναι αερομεταφερόμενες. Κάποιος μπορεί να φτερνιστεί στη δουλειά, στις δημόσιες συγκοινωνίες ή στον κινηματογράφο, θέτοντας αμέσως τον περίγυρό του σε κίνδυνο! Εάν βρίσκεστε στην ίδια αίθουσα με ένα άρρωστο άτομο ή αισθάνεστε να κρύνετε πολύ, θα πρέπει να λάβετε προληπτικά μέτρα χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα «ARVI». Θα αποτρέψει την προσβολή ιών και θα προστατεύσει τον οργανισμό σας.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται για χρήση δύο φορές την ημέρα. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

24. Εντεροβίωση

Η Εντεροβίωση, είναι η συνηθέστερη παρασιτική ασθένεια που προκαλείται από έλμινθες. Οι έλμινθες, βρίσκονται συχνά σε παιδιά, έτσι, η εντεροβίωση είναι ο πιο κοινός τύπος έλμινθων. Η μόλυνση μεταδίδεται συχνά, με τα άπλυτα φρούτα, μη καλά θερμικά επεξεργασμένο κρέας και ψάρι, βρώμικα χέρια και χαρακτηρίζεται από εντερική δυσλειτουργία, δηλητηρίαση του οργανισμού μας και έντονη φαγούρα της πρωκτικής περιοχής. Το πρόγραμμα, καθαρίζει τον οργανισμό μας από αυτά τα μικρόβια. Είναι απολύτως ασφαλές για τον ανθρώπινο οργανισμό.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται για χρήση μία φορά κάθε 3 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών, δεν θα πρέπει να είναι λιγότερος από 10. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

25. Λεμφική αποτοξίνωση

Το λεμφικό σύστημα, είναι τμήμα του αγγειακού συστήματος, που συμπληρώνει το καρδιαγγειακό σύστημα. Παίζει σημαντικό ρόλο στο μεταβολισμό και καθαρισμό των κυττάρων και των ιστών του σώματος. Το πρόγραμμα, ενεργοποιεί τη λέμφο και την κινεί αργά και υπό ελαφρά πίεση. Επιτρέπει στο λεμφικό σύστημα να αποβάλει τις τοξίνες και να πραγματοποιήσει τον καθαρισμό της λέμφου. Σε περίπτωση προβλημάτων, που σχετίζονται με το ήπαρ, ιδιαίτερα ηπατίτιδα, προβλήματα που σχετίζονται με το πάγκρεας, παρατεταμένες ασθένειες που σχετίζονται με τη λέμφο, κ.α.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται για χρήση μία φορά κάθε 3 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών, δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 10. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

26. Περιοδοντίτιδα

Τα ούλα, είναι ιστοί που περιβάλλουν το δόντι και το συγκρατούν στη θέση του. Η περιοδοντίτιδα, είναι μια συστηματική βλάβη του περιοδοντικού ιστού. Δεν είναι μια απομονωμένη διαδικασία, αλλά πάντα μια γενικευμένη ασθένεια που επηρεάζει ολόκληρη τη στοματική κοιλότητα. Παρόλο που δεν είναι τόσο συνηθισμένο, ο κύριος κίνδυνος είναι ότι δεν έχει εμφανή συμπτώματα κι έτσι, συνήθως, αρχίζουμε τη θεραπεία πολύ αργά. Επιπλέον, οι παθογόνοι μικροοργανισμοί, μπορεί να αρχίσουν να αναπτύσσονται σε κοιλότητες που σχηματίζονται λόγω της ατροφίας των ιστών, επιβαρύνοντας έτσι περαιτέρω την υγεία μας.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται μία φορά κάθε 3 ημέρες. Ο συνολικός αριθμός των συνεδριών, δεν πρέπει να είναι λιγότερος από 10. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

27. Πρωτόζωα

Το πρόγραμμα, προστατεύει από την αρνητική επίδραση στον οργανισμό μας, ενός μεγάλου αριθμού μονοκύτταρων παρασίτων. Η μόλυνση μεταδίδεται συχνά, με τα άπλυτα φρούτα, βρώμικα χέρια και μη καθαρό νερό. Το πρόγραμμα, επηρεάζει τα πρωτόζωα, καταστρέφοντάς τα. Οι δραστηριότητες προσωπικής υγιεινής και η τακτική εφαρμογή του προγράμματος, ως προληπτικό μέτρο, μας προστατεύει από αυτούς τους μικροοργανισμούς.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση 1-2 φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

28. Έρπης απλός

Ο στοματικός έρπης, είναι η πιο κοινή μορφή του έρπητα. Μπορεί επίσης, να εμφανιστεί στα γεννητικά όργανα, το λαιμό, το κεφάλι ή τα χέρια ως μικρές φθορές ή κυστίδια. Ο έρπης, μπορεί να εισέλθει στο νευρικό σύστημα, προκαλώντας διάφορες διαταραχές. Παραμένει στα νευρικά κύτταρα ασυμπτωματικά και εκδηλώνεται μόνο όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα μειώνεται. Ο ιός φορέας, μπορεί να μολύνει άλλους ανθρώπους μέσα από το φιλί, ή μέσα από ανοικτές πληγές του δέρματος.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση 1-3 φορές την ημέρα για μία εβδομάδα και στη συνέχεια μία φορά την ημέρα για 3 εβδομάδες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

29. Ροταϊός

Ο ροταϊός, είναι ένας ειδικός παθογόνος παράγοντας, που προκαλεί εντερική γρίπη με έντονη δηλητηρίαση, αφυδάτωση του σώματος και διάφορα συμπτώματα του κρυολογήματος. Εάν ήσαστε στο ίδιο δωμάτιο με ένα άρρωστο άτομο ή αισθανθήκατε πολύ κρύο, πρέπει να λάβετε προληπτικά μέτρα, χρησιμοποιώντας αυτό το πρόγραμμα. Θα αποτρέψει την προσβολή από ιούς και θα προστατεύσει το σώμα σας. Το πρόγραμμα, θα βοηθήσει επίσης στην αποφυγή ανάπτυξης ασθενειών, μετά από επαφή με άρρωστο άτομο.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα συνιστάται για χρήση δύο φορές την ημέρα. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

30. Σταφυλοκοκκικές και στρεπτοκοκκικές λοιμώξεις

Οι σταφυλόκοκκοι και οι στρεπτόκοκκοι, βρίσκονται συνεχώς στο δέρμα και στο στοματικό ή ρινικό βλεννογόνο. Συχνά όταν ταξιδεύουμε, δεν έχουμε αρκετό ύπνο, κρυώνουμε ή κουραζόμαστε. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα είναι εξασθενημένο. Στην περίπτωση αυτή, οι κόκκοι, αρχίζουν ήδη να έχουν αρνητικές συνέπειες για τον οργανισμό μας. Κάποιοι αισθάνονται πονόλαιμο ή πυρετό. Το πρόγραμμα, μειώνει την αρνητική επίδραση των κόκκων, επιτρέπει στον οργανισμό μας να αποκαταστήσει τη δύναμη και την ανοσία του.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά μέχρι την πλήρη ανάκτηση. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

31. Τοξόπλασμα

Το τοξόπλασμα, είναι πρωτόζωο. Όταν εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισμό, το τοξόπλασμα αρχίζει να αναπτύσσεται. Εισέρχεται στο σώμα, μετά από επαφή με γάτες, αφού οι γάτες είναι ο βασικός φορέας της τοξοπλάσμωσης. Το πρόγραμμα, προστατεύει από τις αρνητικές επιπτώσεις του τοξοπλάσματος στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι δραστηριότητες προσωπικής υγιεινής και η τακτική εφαρμογή του προγράμματος ως προληπτικό μέτρο, μας προστατεύει από αυτούς τους μικροοργανισμούς.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση 1-2 φορές την ημέρα για 10-14 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

32. Ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού

Το ανοσοποιητικό σύστημα, είναι η ικανότητα του οργανισμού μας να αντιστέκεται στη δράση παθογόνων ιών, βακτηριδίων και άλλων επιβλαβών περιβαλλοντικών παραγόντων. Όσο ισχυρότερο είναι το ανοσοποιητικό μας, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχουμε να νοσήσουμε. Η ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού μας, είναι το κλειδί της ευεξίας. Μπορεί να συνδυαστεί, με την αποβολή κακών συνηθειών, την ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα, διατηρεί ισχυρό το ανοσοποιητικό μας και παρέχει αξιόπιστη προστασία από οποιεσδήποτε εξωτερικές επιπτώσεις.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται μία φορά την ημέρα για 10-14 ημέρες, αμέσως μετά το ξύπνημα.

Προσοχή! Η χρήση του προγράμματος πριν τον ύπνο, μπορεί να προκαλέσει αϋπνία.

33. Ουρεόπλασμα

Το ουρεόπλασμα, είναι το μικρότερο βακτήριο που κατοικεί στον βλεννογόνο των γεννητικών οργάνων και στο ουροποιητικό σύστημα. Το ουρεόπλασμα, μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή οποιουδήποτε τμήματος, της ουροδόχου κύστης, της ουρήθρας, του προστάτη, των όρχεων και των επιθηκών τους, του γυναικείου κόλπου, της μήτρας και των επιθηκών τους. Μπορεί να προκαλέσει και φλεγμονή των αρθρώσεων, ειδικά σε ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τα προστατευτικά μέσα κατά των λοιμώξεων των γεννητικών οργάνων, είναι μερικές φορές ανάκαινα να παρέχουν την απόλυτη ασφάλεια. Για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα «Ανοσοποιητικό σύστημα», που στοχεύει στην πρόληψη ενός ευρέος φάσματος σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται μία φορά την ημέρα για 10 έως 20 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

34. Ελκοβακτηρίδιο

Το Ελκοβακτηρίδιο του πυλωρού, είναι ένα μοναδικό επιβλαβές βακτήριο, το οποίο προκαλεί πολυάριθμες ασθένειες του γαστρεντερικού σωλήνα. Είναι αποδεδειγμένο, ότι αντιστέκεται εύκολα στην ισχυρή καταστρεπτική δράση του τυπικού όξινου περιβάλλοντος του στομάχου. Με εκφύσεις, το βακτήριο κινείται στο βλεννογόνο τοίχωμα του στομάχου και σε ότι συνδέεται με αυτό. Κατά τη διάρκεια του πολλαπλασιασμού των μικροοργανισμών αυτών, επηρεάζονται επιζήμια όλα τα κύτταρα του στομάχου, γεγονός που οδηγεί σε διάφορες φλεγμονώδεις διεργασίες. Μέχρι σήμερα, η καταστροφή των επιβλαβών βακτηρίων, για την πρόληψη της αναπόφευκτης ανάπτυξης πολλών παθολογιών, δεν ήταν δυνατή. Το πρόγραμμα, ομαλοποιεί τη δραστηριότητα των εντέρων και του στομάχου και απομακρύνει τις βλαβερές ουσίες από τον οργανισμό μας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται μία φορά την ημέρα για 10 έως 20 ημέρες. Κάθε 3 ημέρες, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Detox.

34. Χλαμυδίαση

Η Χλαμυδίαση, είναι μια ομάδα λοιμώξεων, οξείας και χρόνιας φύσεως, που προκαλούνται από ενδοκυτταρικά παράσιτα, τα χλαμύδια. Είναι μία από τις πιο συχνές ουρογεννητικές λοιμώξεις, συχνά ασυμπτωματικές. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, από 5% έως 15% των νεαρών σεξουαλικά ενεργών ατόμων, μολύνονται με χλαμύδια. Τα χλαμύδια επίσης, είναι πολλές φορές η αιτία για την υπογεννητικότητα των ζευγαριών. Το πρόγραμμα, προλαμβάνει τη μόλυνση από ενδοκυτταρικά παράσιτα, όπως τα χλαμύδια.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται 1-2 φορές την ημέρα για μια πορεία 10 έως 20 ημερών. Μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, χρησιμοποιούμε τα ανάλογα προγράμματα αποτοξίνωσης, για τον καθαρισμό της λέμφου, του ήπατος και των νεφρών.

11.2. Ρύθμιση και εναρμόνιση του σώματος:

Τα προγράμματα ρύθμισης και εναρμόνισης της συσκευής Life Balance, βασίζονται στα πιλοτικά έργα των R. Voll και A. Sramer, που μελετούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία του σώματος. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, κάθε όργανο έχει τις δικές του ταλαντώσεις. Οι ταλαντώσεις των οργάνων που νοσούν, διαφέρουν από αυτές των υγιή. Η συσκευή Life Balance, έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει τη γενική κατάσταση του οργανισμού. Κάθε ανθρώπινο όργανο, έχει τις δικές του συχνότητες συντονισμού που εκπέμπονται από αυτό. Με την επίδραση διαφόρων πλευρικών παραγόντων, αυτοί οι παράμετροι, αποκλίνουν από τον κανόνα και αναπτύσσεται η έκθεση σε ασθένειες. Αυτή η τάση, είναι συνήθως σε μεγάλες πόλεις, με γρήγορο ρυθμό ζωής, που συνοδεύεται από άγχος. Η συσκευή, διαθέτει 35 βασικά προγράμματα που επιτρέπουν τη διατήρηση της υγείας και της ευημερίας. Ειδικές συχνότητες βιοσυντονισμού χαμηλής έντασης, προσομοιώνουν τις ταλαντώσεις των υγιών οργάνων και επαναφέρουν τον οργανισμό μας στις υγιείς ταλαντώσεις, προωθώντας την αυτοθεραπεία του.

Προσοχή! Η συσκευή, επηρεάζει τον ανθρώπινο οργανισμό, χωρίς να προκαλεί ανισορροπία της ενεργειακής πληροφορικής ισορροπίας, γενικά και τοπικά (μέσω της περιοχής προβολής οργάνων), προσαρμόζοντας όλα τα εσωτερικά όργανα στις υγιείς ταλαντώσεις. Βελτιώνει τη δραστηριότητα του οργανισμού, ενώ καταπολεμά το στρες και τη χρόνια κόπωση.

11.2.1. Βασικά προγράμματα:

1. Αλλεργία

Η αλλεργία, είναι η αυξημένη ευαισθησία του σώματος σε ουσίες, προϊόντα, μαλλί, σκόνη, γύρη και χημικά ή μολυσματικά μέσα. Σχεδόν το ήμισυ του παγκόσμιου πληθυσμού, πάσχει από αλλεργίες. Η κοινή αιτία των αλλεργιών, είναι ο υποσιτισμός και ο ανθυγιεινός τρόπος ζωής. Το πρόγραμμα, βοηθάει στην πρόληψη της εμφάνισης συμπτωμάτων αλλεργίας, μειώνει τις εκδηλώσεις αλλεργιών, ανακουφίζει την ανθρώπινη πάθηση και σταθεροποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά το πρωί, μία φορά την ημέρα για 5 ημέρες. Για να καταπολεμήσουμε τις αλλεργικές επιθέσεις, το πρόγραμμα συνιστάται 1-2 φορές την ημέρα. Μετά την εφαρμογή του προγράμματος, θα αισθανθούμε καλύτερα, καθώς έχει επίδραση και στην ιγμορίτιδα, διευκολύνοντας την αναπνοή.

2. Ενεργοποίηση ηπατικής λειτουργίας

Το ήπαρ, είναι ένα μοναδικό όργανο του ανθρώπινου σώματος. Είναι το μεγαλύτερο όργανο στο ανθρώπινο πεπτικό σύστημα. Σε αντίθεση με άλλα εσωτερικά όργανα που ευθύνονται για λίγες ή ακόμη και μία διαδικασία, το ήπαρ εκτελεί σχεδόν πεντακόσιες λειτουργίες. Λειτουργεί ως τεράστιο φίλτρο, φιλτράρει το αίμα, απομακρύνει τις τοξίνες, ρυθμίζει την παραγωγή της χολής και το επίπεδο του λίπους και των υδατανθράκων στο σώμα. Ο άμεσος ρόλος του, έγκειται στο σχηματισμό του μισού της ανθρώπινης λεμφαδενικής ουρίας.

Σε έλλειψη ενέργειας, αυτό είναι η μπαταρία μας ή μια εφεδρική γεννήτρια, καθώς περιέχει γλυκογόνο, το οποίο υπό ορισμένες συνθήκες μετατρέπεται σε γλυκόζη, υποστηρίζοντας ζωτικές δυνάμεις του σώματος.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση μία φορά την ημέρα. Όταν το χρησιμοποιούμε, θα πρέπει να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1-1,5 λίτρο καθαρού νερού.

3. Ενεργή προστασία

Το ανθρώπινο σώμα, υφίσταται σε συνθήκες διαρκούς μεταβολής του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμόζεται διαρκώς. Πολλές εξωτερικές επιρροές, θεωρούνται επιβαρυντικές για τον οργανισμό μας. Η πρωταρχική σημασία για την υγεία μας, είναι η ισορροπία όλων των διαδικασιών του σώματος, καθώς και η ικανότητά τους να αυτορυθμίζονται.

Η υγιεινή διατροφή, ο καθαρός αέρας, η τακτική σωματική δραστηριότητα και τα θετικά συναισθήματα, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ενεργή προστασία», είναι οι πρώτοι βοηθοί στη φροντίδα της υγείας μας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά το πρωί.

Προσοχή! Η χρήση του προγράμματος πριν τον ύπνο, μπορεί να προκαλέσει αϋπνία.

4. Αντικραδασμικό πρόγραμμα

Το σύνδρομο των κραδασμών, προκαλείται από παρατεταμένη έκθεση σε κραδασμούς. Οι κραδασμοί χωρίζονται σε τοπικά (από εργαλεία χειρός) και γενικά (από μηχανές, εξοπλισμό, κινούμενα οχήματα ή υπόγεια). Η επιβάρυνση από κραδασμούς, βρίσκεται σε πολλά επαγγέλματα.

Η μακροχρόνια έκθεση σε κραδασμούς, έχει πολύ βλαβερή επίδραση στο ανθρώπινο σώμα και στους άνδρες προκαλεί ανικανότητα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όταν είναι απαραίτητο. Η συσκευή, θα πρέπει να τοποθετείται σε τσέπη ή στο ταμπλό του οχήματος.

5. Αντιστρέψ (διαταραχή ύπνου)

Κάθε μέρα, αντιμετωπίζουμε αγχωτικές καταστάσεις: στη δουλειά, στο δρόμο, στο σπίτι, ακόμα και στις διακοπές. Μια υγιεινή και καταρτισμένη κατάσταση πνεύματος, καταστέλλει εύκολα τις συνέπειες του στρες. Με συνεχή άγχος ή με απότομη αλλαγή του σύνηθες ρυθμού της ζωής μας, ο οργανισμός μας μπορεί να χρειαστεί βοήθεια. Το πρόγραμμα «Antistress», είναι ο βοηθός μας σε κάθε δύσκολη κατάσταση, που ακολουθείται από ψυχολογικό ή σωματικό άγχος. Βελτιώνει τη δραστηριότητα του νευρικού συστήματος και προάγει τον γρήγορο και βαθύ ύπνο. Επίσης, έχει μια καταπραϋντική επίδραση σε άλλα βιολογικά συστήματα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λίγο πριν από την ώρα του ύπνου, τοποθετώντας τη συσκευή κάτω από το μαξιλάρι. Εάν εξακολουθούμε να μην μπορούμε να αποκοιμηθούμε μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, επαναλαμβάνουμε τη συνεδρία.

Προσοχή! Αυτό το πρόγραμμα, δεν συνιστάται για χρήση κατά τη διάρκεια της εργασίας ή της οδήγησης.

6. Αρθρίτιδα – Αρθρώσεις

Οι περιορισμένες ικανότητες ή ο πόνος στις αρθρώσεις, δεν μας επιτρέπουν τη σωστή λειτουργία, τις δραστηριότητες ή την ικανότητα δράσης μας. Ένας από τους λόγους για περιορισμένη κινητικότητα, είναι η διαταραχή της παροχής αίματος στις αρθρώσεις και η συσσώρευση τοξικών ουσιών σε αυτές. Το πρόγραμμα, βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και εξαλείφει τις επιβλαβείς ουσίες, που μας αποτρέπουν να απολαμβάνουμε πλήρως το αγαπημένο μας χόμπι, να ήμαστε ενεργοί και υγιείς.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση μία φορά κάθε δύο ημέρες κατά τη διάρκεια της ημέρας.

7. Βρογχόσπασμος

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο, για την αποκατάσταση της δραστηριότητας των βρόγχων και των πνευμόνων, την ομαλοποίηση της πνευμονικής λειτουργίας, την ανακούφιση των σπασμών και τη βελτίωση της παροχής αίματος και την απορρόφησης οξυγόνου. Τοποθετούμε τη συσκευή στην τσέπη του στήθους, κοντά στους πνεύμονες. Σε βαριές περιπτώσεις, επαναλαμβάνουμε το πρόγραμμα δύο φορές.

Εφαρμογή: Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, όταν έχουμε βρογχικούς σπασμούς.

8. Βαθύς καθαρισμός οργανισμού

Κάθε μέρα, πέφτουμε στην παγίδα δυσάρεστων πραγμάτων - φαγητό, αίσθημα βάρους στο στομάχι, δυσφορία, κόπωση, διαταραχή της πέψης, ακόμη και δηλητηρίαση. Για να βοηθήσουμε τον οργανισμό μας να ξεπεράσει το φορτίο, χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα «Βαθύς καθαρισμός», που έχει σχεδιαστεί για να αποβάλει τις τοξίνες από το σώμα μας, διαφόρων προελεύσεων.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, όπου είναι απαραίτητο. Η συσκευή, θα πρέπει να τοποθετείται σε τσέπη του στήθους ή στην περιοχή του διαφράγματος. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει να πίνουμε πόσιμο νερό, σε ποσότητα τουλάχιστον 1-1,5 λίτρο ημερησίως.

9. Βαθύς θεραπευτικός καθαρισμός

Το πρόγραμμα, αποβάλλει τις τοξίνες από το σώμα κατά τη διάρκεια μιας οξείας επιδείνωσης ή χρόνιας διεργασία στο σώμα. Είναι αποτελεσματικό για την αποτοξίνωση μέσω του κυκλοφορικού συστήματος, σε μοριακό βάρος έως 4.000mol, συμπεριλαμβανομένων και τα δηλητήρια φιδιών. Το πρόγραμμα, έχει λειτουργήσει καλά για την ανάκαμψη του οργανισμού, μετά από στην υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τροφική δηλητηρίαση.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, όπου είναι απαραίτητο. Η συσκευή, θα πρέπει να τοποθετείται σε τσέπη του στήθους ή στην περιοχή του διαφράγματος. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει να πίνουμε πόσιμο νερό, σε ποσότητα τουλάχιστον 1-1,5 λίτρο ημερησίως.

10. Κατάθλιψη

Το άγχος και ο φόβος, είναι σημάδια της κατάθλιψης. Πολύ συχνά, αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ψυχοσωματικές ασθένειες, συναισθηματική εξάντληση και δυσαρέσκεια. Οι φοβίες είναι ισχυρός παράγοντας, που εμποδίζει ένα άτομο να ανακαλύψει τις ικανότητες και την επιτυχία του. Το πρόγραμμα, επιτρέπει για να σταματήσει η κατάθλιψη, μειώνει το άγχος, ομαλοποιεί τον ύπνο, βελτιώνει τη διάθεση και την πνευματική εγρήγορση.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται για καθημερινή χρήση 1 φορά την ημέρα, το πρωί ή το βράδυ.

11. Αποτοξίνωση ήπατος

Το ήπαρ, είναι το κύριο όργανο εξουδετέρωσης τοξικών και άλλων επιβλαβών ουσιών, που παράγονται στο σώμα. Στο συκώτι, όταν πέφτει μεγάλο φορτίο, η αποτελεσματικότητά του μειώνεται και πρέπει να καθαριστεί από τις τοξίνες.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, χρησιμοποιείται 1 φορά ανά 3 ημέρες. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει να πίνουμε πόσιμο νερό, σε ποσότητα τουλάχιστον 1-1,5 λίτρο ημερησίως.

12. Ζωτική ενέργεια

Η ζωτική ενέργεια, είναι το πώς ένα άτομο αισθάνεται την πληρότητα και την επιθυμία για ζωή. Το πόσο ο ίδιος θέλει, μπορεί, αναζητεί και δημιουργεί. Αυτή η ενέργεια που διαπερνά και γεμίζει όλα τα κύτταρα και τα άτομα του σώματός μας, ενώνοντάς τα σε μια ενιαία μονάδα. Σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο οργανισμό, προκαλώντας μικροσκοπικά σωματίδια που δονούνται σε μια διαφορετική συχνότητα. Συνδυαστικά ολοκληρωμένη. Τέλος, σε ένα ισχυρό φυσικό δέκτη ενέργειας και εκπομπών. Το πρόγραμμα, αυξάνει την πνευματική δραστηριότητα, ομαλοποιεί τον ύπνο, ανακουφίζει από το άγχος και το συναισθηματικό στρες.

Εφαρμογή: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1 φορά την ημέρα.

13. Δυσκοιλιότητα

Δυσκοιλιότητα, είναι η αργή, κοπιαστική ή συστηματική έλλειψη των κινήσεων του εντέρου. Η κατάσταση κατά την οποία ένα άτομο έχει για περισσότερο από 24 ώρες να ανακουφιστεί. Λίγοι είναι αυτοί που γνωρίζουν πραγματικά το ρόλο του παχέος εντέρου στη διατήρηση μιας ισχυρής και σταθερής υγείας. Οι σοφοί της αρχαιότητας, του Θιβέτ και της Αιγύπτου οι θεραπευτές, γνώριζαν την αλήθεια για το πώς να είναι κάποιος υγιής.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, χρησιμοποιείται σε καθημερινή βάση. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα, θα πρέπει να πίνουμε πόσιμο νερό, σε ποσότητα τουλάχιστον 1-1,5 λίτρο ημερησίως.

14. Ανοσοποιητικό σύστημα

Η ανοσία, είναι η ικανότητα του οργανισμού μας να αντιστέκεται σε επιβλαβείς παράγοντες. Όσο ισχυρότερη είναι η ανοσία μας, τόσο λιγότερο ήμαστε εκτεθειμένοι σε ασθένειες. Η κατάσταση του ανοσοποιητικού μας συστήματος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: Κακές συνήθειες, μη ισορροπημένη διατροφή, μη υγιεινό τρόπο ζωής. Το πρόγραμμα, έχει διεγερτικό αποτέλεσμα στο σώμα, αυξάνει την αντοχή σε εξωτερικούς παράγοντες και βελτιώνει τη σωματική άσκηση.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ιδανικό για την πρόληψη της ασθένειας που σχετίζεται με το κρύο.

Προσοχή! Η χρήση του προγράμματος πριν τον ύπνο, μπορεί να προκαλέσει αϋπνία.

15. Θεραπεία δέρματος (ρύθμιση)

Η αναγέννηση του δέρματος, είναι μια διαδικασία που αποκαθιστά τους ιστούς μετά από μηχανική βλάβη. Η εμφάνιση ουλών και ιχνών, εξαρτάται από το πόσο γρήγορα τρέχει αυτή η διαδικασία. Μια τέτοια ανάκαμψη, αφορά το ανοσοποιητικό σύστημα, τη διατροφή και την κατάσταση της υγείας. Αυτό το πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει το σώμα μας κατά την αποκατάσταση του δέρματος μετά από μηχανικές βλάβες.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

16. Βελτίωση ηπατικής λειτουργίας

Οι φυσικές διαδικασίες αναγέννησης, είναι πραγματική σωτηρία για το ήπαρ. Στη συντριπτική πλειονότητα των ασθενειών του ήπατος, εμφανίζεται η απόγνωση και η εγκατάλειψη, δεδομένου ότι το συκώτι είναι ίσως το μόνο όργανο που είναι σε θέση να ανακάμψει πλήρως, ακόμα και μετά από σοβαρή βλάβη των κυττάρων του. Ακόμη και αν ένα μεγάλο μέρος του ήπατος είναι εκτός λειτουργίας, τα υπόλοιπα υγιή κύτταρα μπορούν, δια βαθμιαίας διαίρεσης, τελικά να λάβουν χώρα των τραυματιών και να εκτελέσουν το έργο τους στο έπακρο. (όπως η ικανότητα μιας σαύρας να ξαναδημιουργήσει ουρά). Με αυτό τον τρόπο, η φύση προστατεύει με αξιοπιστία το ήπαρ, ένα όργανο, όπου χωρίς αυτό είναι αδύνατη η φυσιολογική ζωτική δραστηριότητα ολόκληρου του οργανισμού μας. Στις περισσότερες σοβαρές ασθένειες τελευταίου σταδίου, το συκώτι μπορεί να σωθεί και να ανακτηθεί. Το πρόγραμμα, θα συμβάλει στην τόνωση της επανάκτησης του ήπατος, μετά από ασθένεια.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας.

17. Κακή διαδικασία επούλωσης

Το πρόγραμμα, επιτρέπει τον συγχρονισμό, τη ρύθμιση της λειτουργίας όλων των οργάνων του σώματος και του συστήματος, την αύξηση της αγωγιμότητας των μεσημβρινών και την εξασφάλιση της πλήρους κυκλοφορίας της ενέργειας και του αίματος. Βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, το μεταβολισμό, ενεργοποιεί τα κύτταρα, αυξάνει τη ζωτικότητα του σώματος, βοηθάει να μην πήξει το αίμα και το καθαρίζει μειώνοντας τα υπολείμματά του.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου απαιτείται.

18. Πάγκρεας (συχρότητες ελέγχου)

Το πάγκρεας, είναι ένα μοναδικό όργανο. Αυτός είναι ο μόνος αδένας στο ανθρώπινο σώμα, που έχει μικτή έκκριση. Παράγει ορμόνες που ρυθμίζουν όλους τους τύπους μεταβολισμού και ως εκ τούτου, θεωρείται ότι αποτελεί το όργανο του ενδοκρινικού συστήματος. Ταυτόχρονα, το πάγκρεας απελευθερώνει ένζυμα στην κοιλότητα του δωδεκαδακτύλου και επομένως είναι πεπτικό όργανο.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου απαιτείται. Επιθυμητή χρήση, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα «Ρύθμιση λειτουργίας γαστρεντερικού συστήματος».

19. Ρύθμιση γαστρεντερικού συστήματος

Η καλή και ισορροπημένη διατροφή, είναι μία από τις πιο σημαντικές προϋποθέσεις για τη

διατήρηση της καλής υγείας. Η μετάβαση σε νέα, ασυνήθιστα τρόφιμα, παραβίαση διατροφής και μακροχρόνιες πιέσεις, αναπόφευκτα προκαλούν υψηλότερο φορτίο στο γαστρεντερικό σωλήνα, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πολύ δυσάρεστες συνέπειες. Το πρόγραμμα, έχει ευεργετική επίδραση σε όλα τα όργανα της γαστρεντερικής οδού, συμβάλλοντας στη χώνευση τροφίμων πιο εύκολα και μειώνοντας τον κίνδυνο διαταραχών της διατροφής.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ο καλύτερος συνιστώμενος χρόνος, είναι 7:00 με 9:00. Επαναχρησιμοποίηση, σε μισή ώρα.

20. Ρύθμιση γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος

Η κακή οικολογία και οι κακές συνήθειες, έχουν δυσμενή επίδραση στο γυναικείο σώμα. Επιταχύνουν τη γήρανσή του και προκαλούν δυσλειτουργίες στον γυναικείο οργανισμό. Το πρόγραμμα, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες. Μειώνει την προεμμηνορροϊκή ένταση, τους πόνους και ρυθμίζει το κλιμακτήριο σύνδρομο. Το πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τις διαταραχές του γυναικείου ουρογεννητικού συστήματος και είναι χρήσιμο για τις γυναίκες σε οποιαδήποτε ηλικία.

Εφαρμογή: Για την πρόληψη, το πρόγραμμα χρησιμοποιείται 1 φορά την εβδομάδα ανά πάσα στιγμή. Τα κορίτσια κατά την εφηβεία, συνιστάται να το χρησιμοποιούν 1-2 φορές την εβδομάδα. Οι γυναίκες που πάσχουν από πόνο και δυσφορία κατά τη διάρκεια της εμμηνορροίας, συνιστάται να το χρησιμοποιούν καθημερινά κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Προσοχή! Δεν συνιστάται η χρήση του προγράμματος, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή των προσπαθειών για εγκυμοσύνη.

21. Ρύθμιση και καθαρισμός του λεμφικού συστήματος

Το λεμφικό σύστημα, ελέγχει την καθαρότητα του σώματος 24 ώρες την ημέρα. Διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην απομάκρυνση των υποπροϊόντων και στη διατήρηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Οι λεμφαδένες, καθαρίζονται με φυσικό τρόπο, μέσω του λεμφικού συστήματος, αλλά μερικές φορές δεν αρκεί. Όταν οι λειτουργίες του λεμφικού συστήματος εξασθενούν, έως και το 83% των επιβλαβών ουσιών, συσσωρεύονται στον ενδοκυτταρικό χώρο. Αυτό αυξάνει το φορτίο σε όλα τα όργανα αποβολής. (ήπαρ, έντερα και νεφρά). Το πρόγραμμα, βοηθά στην υγροποίηση των λεμφαδένων, την αφαίρεση των τοξινών και την περίσσεια ποσότητα νερού από το σώμα, βελτιώνει το μεταβολισμό των κυττάρων, σταθεροποιεί την αρτηριακή πίεση και ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή. Όταν το πρόγραμμα λειτουργεί, συνιστάται ελαφρύ μασάζ.

Προσοχή! Για την αποτελεσματικότερη αποτοξίνωση, φροντίζουμε να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1-1,5 λίτρο καθαρού νερού.

22. Ρύθμιση κυκλοφορικού συστήματος

Ο καθιστικός τρόπος ζωής, οι κακές συνήθειες, ο υποσιτισμός και το άγχος, είναι παθήσεις που επηρεάζουν το κυκλοφορικό σύστημα του αίματος και όχι μόνο διαταράσσουν τη δραστηριότητά του, αλλά και το μεταβολισμό γενικότερα. Το πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει τη δυσλειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος, που είναι καθοριστικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας μας και της καλής απόδοσης.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου απαιτείται. Ο καλύτερος συνιστώμενος χρόνος, είναι 11:00 με 13:00. Η συσκευή, θα πρέπει να τοποθετείται σε τσέπη τους στήθους ή στην περιοχή του διαφράγματος.

23. Ρύθμιση αντρικού ουρογεννητικού συστήματος

Η υγεία των ανδρών, δεν είναι μόνο η καλή σεξουαλική δύναμη, αλλά και η σωστή λειτουργία όλων των εσωτερικών οργάνων. Η φροντίδα της υγείας των ανδρών, είναι απαραίτητη από νεαρή ηλικία. Το πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για την εναρμόνιση του αρσενικού ουρογεννητικού συστήματος. Ρυθμίζει τη διαδικασία της ούρησης και τη δραστηριότητα των αρσενικών

σεξουαλικών αδένων, συμπεριλαμβανομένου του αδένα του προστάτη. Όσο μεγαλύτερος είναι ο άνθρωπος, τόσο πιο χρήσιμο του είναι αυτό το πρόγραμμα.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται μία φορά την εβδομάδα και ο καλύτερος συνιστώμενος χρόνος είναι 21:00 με 23:00.

24. Ρύθμιση ενδοκρινικού συστήματος

Το ενδοκρινικό σύστημα, ρυθμίζει τη δραστηριότητα των οργάνων, με τη βοήθεια ορμονών και εξασφαλίζει σταθερότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος (ομοιοστασία). Το ενδοκρινικό σύστημα, εμπλέκεται στην ανάπτυξη του σώματος και στην αναπαραγωγική του λειτουργία. Επίσης, ρυθμίζει την ψυχική κατάσταση και τις συναισθηματικές αντιδράσεις. Το πρόγραμμα, βελτιώνει τη λειτουργία του συστήματος υποθάλαμο-υπόφυση-γεννητικοί αδένες και ρυθμίζει τις διαδικασίες έκκρισης στον οργανισμό μας.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας

25. Πausίπovη λειτουργία

Ο πόνος, είναι η απάντηση των οργάνων και των συστημάτων του σώματος, στην επίθεση του εξωτερικού περιβάλλοντος ή στη δυσλειτουργία των εσωτερικών οργάνων. Ο πόνος, προκαλεί μια σοβαρή ταλαιπωρία και στερεί το αίσθημα της αφθονίας. Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος για την καταπολέμηση του πόνου, είναι να εξαλειφθούν τα αίτια της εμφάνισής του. Το πρόγραμμα, περιλαμβάνει το σύνολο των συχνοτήτων που εξαλείφουν τις αιτίες του πόνου, διαφορετικής φύσης.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Εάν ο πόνος επιμένει μετά από μία ώρα, επαναλαμβάνουμε τη συνεδρία.

26. Λειτουργία νεφρών

Οι λειτουργίες που εκτελούνται από τα νεφρά, είναι μεταβλητές. Η κυριότερη, είναι η ρύθμιση του μεταβολισμού νερού και ηλεκτρολυτών στο σώμα, η οποία διατηρεί σταθερό όγκο και πίεση του αίματος και άλλων υγρών. Επίσης, οι νεφροί ρυθμίζουν την ισορροπία όξινης βάσης στο σώμα. Εξαιρούνται τα υποπροϊόντα του μεταβολισμού του αζώτου - ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, κλπ. Ο υποσιτισμός, ο υπερσιτισμός, η διαταραχή του μεταβολισμού, η έλλειψη βιταμίνης Α, η υποθερμία και οι λοιμώξεις, προκαλούν μόλυνση στα νεφρά και λιθίαση. Το πρόγραμμα, προωθεί την ενεργή αφαίρεση των τοξινών από το σώμα, ρυθμίζει τη λειτουργία των νεφρών και αποτρέπει τη λιθίαση.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου είναι απαραίτητο. Ο καλύτερος συνιστώμενος χρόνος είναι 17:00 με 19:00. Σε περίπτωση τοξικών ή μολυσματικών ασθενειών, επαναλαμβάνουμε μετά από μισή ώρα. Για τη φυσιολογική νεφρική δραστηριότητα, θα πρέπει να πίνουμε καθημερινά όχι λιγότερο από 1-1,5 λίτρο καθαρού νερού.

Προσοχή! Κατά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος, είναι πιθανή η αυξημένη ούρηση.

27. Επτά τσάκρα

Ο άνθρωπος, είναι μία σύνθετη ενεργειακή δομή, που βασίζεται σε επτά ενεργειακά κέντρα (τσάκρα), τα οποία βρίσκονται κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης. Κάθε τσάκρα, συνδέεται με ορισμένα όργανα. Αν τα τσάκρα είναι σε διαταραχή, διακόπτεται η λειτουργία των αντίστοιχων οργάνων. Η ενέργεια συσσωρεύεται στα τσάκρα. Η αρνητική ενέργεια, τσακίζει τα τσάκρα και επηρεάζει το σώμα ως σύνολο. Το πρόγραμμα, εναρμονίζει τη χαμένη ενέργεια και την διανέμει σωστά, αποκαθιστώντας έτσι τη δραστηριότητα των οργάνων και των συστημάτων στο σύνολό τους.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της ημέρας.

28. Ρύθμιση καρδιάς

Η δραστηριότητα της καρδιάς, εξασφαλίζει την παροχή οξυγόνου και τα θρεπτικά συστατικά στα όργανα, πράγμα που σημαίνει καλή απόδοση ολόκληρου του οργανισμού. Οι καρδιακές διαταραχές, προκαλούνται από τον λάθος τρόπο ζωής, το άγχος και την σωματική υπερφόρτωση.

Το πρόγραμμα, ρυθμίζει την πολύπλοκη κυκλοφορία του αίματος και την αρτηριακή πίεση, παρέχει κανονική ροή αίματος στον καρδιακό μυ, προάγει την αυτορρύθμιση της καρδιάς και τη σταθερή της δραστηριότητα.

Εφαρμογή: Το χρησιμοποιούμε δύο φορές, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας, όπου είναι απαραίτητο. Ο καλύτερος συνιστώμενος χρόνος, είναι 11:00 με 13:00.

Προσοχή! Το πρόγραμμα, δεν συνιστάται για 2 μήνες μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου.

29. Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

Όλοι μας έχουμε βιώσει αυτή την κατάσταση στην καθημερινότητα μας, μετά από σκληρή, αγχωτική δουλειά ή έλλειψη ύπνου. Συνήθως, η κούραση περνάει μετά από μια καλή, σωστή ξεκούραση και επαρκή ύπνο. Εάν τα συμπτώματα επιμένουν, αυτό σημαίνει ότι ο οργανισμός μας είναι άρρωστος. Οι μεγάλες περιόδους κόπωσης, μπορεί να είναι ένα σημάδι μιας σοβαρής ασθένειας, γνωστής ως σύνδρομο χρόνιας κόπωσης (CFS), που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες. Για να αποφύγουμε αυτήν την κατάσταση, συνιστάται να χρησιμοποιούμε αυτό το πρόγραμμα.

Εφαρμογή: Το χρησιμοποιούμε 1-2 φορές ως το μεσημέρι.

30. Απώλεια βάρους (θεραπεία παχυσαρκίας)

Η παχυσαρκία, είναι μία κατάσταση του σώματος, όπου το λίπος αρχίζει να συσσωρεύεται υπερβολικά στις ίνες, τους ιστούς και τα όργανα. Το σύμπτωμα, είναι η αύξηση βάρους κατά 20% και περισσότερο, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές. Επίσης, εξελίσσεται σε ψυχοσωματικές διαταραχές, γενική δυσφορία, προβλήματα στις αρθρώσεις και στη σπονδυλική στήλη, προβλήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική ζωή και ανάπτυξη άλλων συνθηκών που συνοδεύουν αυτές τις αλλαγές στο σώμα. Το πρόγραμμα, συνιστάται για χρήση κατά τη θεραπεία της παχυσαρκίας, με οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσο.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά.

31. Ανακούφιση οπτικής κόπωσης

Η συνεχής καταπόνηση των ματιών (ανάγνωση, εργασία στον υπολογιστή) και η αλλαγή στις συνθήκες διαβίωσης ή ρουτίνας, προκαλούν οπτική κόπωση, ερεθισμό και θόλωση. Το πρόγραμμα, μειώνει την καταπόνηση των ματιών, ανακουφίζει από την κόπωση και τον πόνο και προάγει την κανονική όραση.

Εφαρμογή: Χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, καθημερινά στον ύπνο, για 7 ημέρες και το διακόπτουμε την όγδοη μέρα. Επαναλαμβάνουμε τις συνεδρίες, μέχρι να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αποφεύγουμε την καταπόνηση των ματιών, μετά την εφαρμογή του προγράμματος.

Σημείωση: Για καλύτερα αποτελέσματα, το συνδυάζουμε με ασκήσεις του ακτινωτού μυός.

32. Διανοητική κόπωση

Η διανοητική κόπωση και η μείωση των νοητικών αποδόσεων, έχουν τις ιδιαιτερότητές τους. Συνήθως, συμβαίνουν μετά από μακρόχρονη έντονη εργασία και συνδέονται με υπερβολική αύξηση ή βλάβη της δραστηριότητας των εξωτερικών αισθήσεων. Όταν η διανοητική κόπωση, μειώνει τη δύναμη της μνήμης, προκαλεί διαταραχή σκέψης και την απώλεια πρόσφατης μνήμης. Το πρόγραμμα, αυξάνει την αποτελεσματικότητα του εγκεφάλου, βελτιώνει τη μνήμη και σε συνδυασμό με έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ρυθμίζει την ψυχοσυναισθηματική συνιστώσα προς στο θετικό.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθημερινά 1-2 φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

33. Κόπωση πλάτης

Η σπονδυλική στήλη, παίζει μεγάλο ρόλο στον πυρήνα του σώματος. Καταπονείτε κατά τη μεταφορά βαρέων αντικειμένων. Οι τραυματισμοί της σπονδυλικής στήλης, είναι ιδιαίτερα σύνηθες φαινόμενο στους αθλητές και σε εκείνους που κάνουν σωματικά απαιτητική δουλειά. Μια κακή στάση του σώματος, δημιουργεί επίσης μελλοντικά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Το

πρόγραμμα, έχει σχεδιαστεί για να ενισχύσει την σπονδυλική μας στήλη και την βοηθά να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση. Βελτιώνει την ανταλλαγή φωσφόρου και ασβεστίου και εντείνει τις προστατευτικές λειτουργίες του σώματος.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες.

34. Χοληστερίνη

Η υπερχοληστερολαιμία, δεν είναι ασθένεια, αλλά ένας παράγοντας κινδύνου για την αθηροσκλήρωση. Αυτός ο όρος, υποδηλώνει αυξημένο ποσοστό χοληστερίνης στο αίμα. Η χοληστερίνη, είναι μέρος των κυτταρικών μεμβρανών. Ωστόσο, μια υπερβολική ποσότητα χοληστερίνης στο αίμα, προκαλεί σχηματισμό αρτηριοσκληρωτικών πλακών. Το πρόγραμμα, μειώνει τη χοληστερίνη στο αίμα, μειώνει τον κίνδυνο αθηροσκλήρωσης, καθαρίζει και ενισχύει τα αγγεία.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, συνιστάται να λαμβάνεται, όχι λιγότερο από 1 μήνα. Οι πιο έντονες παραβιάσεις του λιπιδικού μεταβολισμού, απαιτούν μεγαλύτερη εφαρμογή του προγράμματος. Για την πρόληψη, το πρόγραμμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές την εβδομάδα.

35. Ευαισθησία δοντιών

Η αυξημένη ευαισθησία των δοντιών, μπορεί να προκαλέσει πολλά προβλήματα. Τα δόντια μας, αρχίζουν να είναι ευαίσθητα σε οποιοδήποτε ερεθισμό (ζεστό, κρύο, γλυκό ή πικάντικο). Στατιστικά στοιχεία των πολυετών τελευταίων, έχουν δείξει ότι η αναζήτηση οδοντιατρικής βοήθειας για ευαίσθητα δόντια έχει αυξηθεί. Το πρόγραμμα, επιτρέπει την πρόληψη της ανάπτυξης και την ανακούφιση της αυξημένης ευαισθησίας των δοντιών.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή ανάλογα με τις ανάγκες.

Η συσκευή ρύθμισης φυσικών βιοσυστημάτων Life Balance δεν είναι ιατρική συσκευή!

Προσοχή! Η συσκευή, δεν ενδείκνυται (προληπτικά) για τις γυναίκες, κατά το πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και τα άτομα με μεταμοσχευμένα όργανα. Επίσης, δεν συνιστάται να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων μηνών μετά το έμφραγμα του μυοκαρδίου. Σε περίπτωση σοβαρών καρδιακών παθήσεων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε απόσταση όχι μικρότερη από μισό μέτρο από το σώμα.

11.3. Ενεργειακό πρόγραμμα γενικής χρήσης

Το πρόγραμμα, είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα το οποίο μπορεί να καταπολεμήσει την κόπωση και να αποτρέψει την εμφάνισή της, να καταπολεμήσει την υπνηλία, την κακή διάθεση και άλλες καθημερινές κακουχίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Το πρόβλημα της χαμηλής ενέργειας και της ασθένειας, είναι ιδιαίτερα επίκαιρο για τους κατοίκους της πόλης. Δεν σχετίζεται μόνο με πιέσεις ή κακές περιβαλλοντικές καταστάσεις, αλλά και με περιβάλλοντα βιοπαθογόνα πεδία (υπολογιστές, smartphones, ηλεκτρικές συσκευές κ.λπ.). Το πρόγραμμα, μέσω της συσκευής Life Balance, εκπέμπει αρμονικά ηλεκτρομαγνητικά κύματα, που προσαρμόζουν τους δείκτες βιοενέργειας, ενεργοποιώντας τις λειτουργίες ρύθμισης του σώματος, όπου είναι βασισμένες στο φαινόμενο συντονισμού και προστατεύει από τους βιο και γεωπαθογόνους παράγοντες. Ένα καλά σχεδιασμένο πρόγραμμα, για την ηλεκτρομαγνητική έκθεση, αποκαθιστά και εντείνει τις φυσιολογικές παραμέτρους, ανακουφίζει από την ένταση και το ψυχικό στρες, επαναφορτίζει το άτομο με ενέργεια, προάγει την καλή του διάθεση και την ευεξία. Κατά την ανάπτυξη του προγράμματος, χρησιμοποιήθηκε η αρχή της «ποικίλης συχνότητας», η οποία εξ ορισμού είναι πιο φυσιολογική και αρμονικά ανεκτή από τον οργανισμό μας. Η ενέργεια, είναι γνωστό ότι ρέει συνεχώς στο ανθρώπινο σώμα. Εντούτοις, κάποιες αρνητικές ενέργειες εμφανίζονται συχνά στον οργανισμό μας, με αποτέλεσμα να σταματούν την ροή της ενέργειας. Το πρόγραμμα, θα μεταφέρει την ενέργειά μας προς τη σωστή κατεύθυνση, για να εξαλείψει κάθε στασιμότητα των αρνητικών πληροφοριών. Χρησιμοποιείται για την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού μας και για την προσαρμογή της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των φυσικών βιοσυστημάτων.

Εφαρμογή: Το πρόγραμμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 1-2 φορές, κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Προσοχή! Δεν χρησιμοποιούμε το πρόγραμμα, περισσότερο από 2 φορές την ημέρα και δεν θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε τη νύχτα.

Σημειώσεις: Το βασικό πλεονέκτημα της συσκευής Life Balance, είναι η δυνατότητα φόρτωσης ενός μεμονωμένου αυτόματου προγράμματος, βάσει των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τη συσκευή Life Expert και τη διαθεσιμότητα αυτοματοποιημένων προγραμμάτων, για τη διατήρηση υψηλού ποσοστού υγείας, ανεξάρτητα από διάφορους εξωτερικούς και εσωτερικούς παράγοντες. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να εφαρμόσει τα προσωπικά του προγράμματα, με χειροκίνητη λειτουργία. Επιτρέπει την επιλογή ενός ατομικού προληπτικού προγράμματος για κάθε συγκεκριμένο άτομο. Για βέλτιστα αποτελέσματα, συνιστάται η συσκευή Life Balance, σε συνδυασμό με τη συσκευή Life Expert.



WEB WELLNESS

Αντιπροσωπία Ελλάδος **BioWeb**

Φειδίου 6 Αθήνα, 5^{ος} όροφος

Τηλ.: 2130450161 – Φαξ: 2130450162

Πληροφορίες: info@bioweb.gr

Πωλήσεις: sales@bioweb.gr

Υποστήριξη: support@bioweb.gr

Site: www.bioweb.gr