

Аппарат
Комплексного оздоровления

DeVita
Combi

Методические рекомендации

Назначение

DeVita Combi универсальный прибор 5 в 1 (DeVita AP, DeVita Ritm, DeVita Cosmo, HV) для проведения сеансов электромагнитного, квантового и электропунктурного оздоровления. Используется с целью защиты от стресс-факторов, поддержания гомеостаза, улучшения работоспособности, снижения болевых ощущений, предупреждения преждевременного старения.

Может использоваться в косметических, оздоровительных кабинетах, комнатах отдыха, в домашних условиях.

Методы оздоровительного воздействия

1. Электромагнитное воздействие

Электромагнитное регуляторное воздействие.

Как прибор электромагнитного воздействия DeVita Combi излучает электромагнитные колебания низкой интенсивности строго определенной формы и частоты.

Такой вид воздействия осуществляется в двух направлениях:

- регуляторном (используются частоты DeVita Ritm);
- деструктивном (используются частоты DeVita AP).

В основу регуляторного электромагнитного воздействия легли многолетние разработки ученых Р. Фолля, Х. Шиммеля, А.Ф. Крамера и других. По их исследованиям, каждый орган имеет свои собственные колебания, которые у ослабленных органов отличаются от здоровых. В данном случае устройство будет генерировать частоты малой интенсивности для различных органов и систем, имитирующие колебания здоровых органов. Воздействие этих частот «перенастраивает» организм на здоровую волну, что, в результате, приводит к повышению резервов адаптации и восстановлению процессов саморегуляции.

Работа метода основана на способности живого организма избирательно откликаться на действие электромагнитного излучения крайне низкой интенсивности. Под влиянием такого воздействия активируются транспортировка веществ через клеточные мембраны и основные биоэнергетические процессы, что позволяет организму справиться с возникшей проблемой.

Для усиления оздоровительного эффекта, можно сочетать электромагнитный метод с квантовым или электропунктурным.

Внимание: некоторые программы имеют ограничения в использовании по времени суток, по возрасту. (см. Приложение 1) .

Электромагнитное деструктивное воздействие.

В основе деструктивного воздействия лежат разработки Р. Райфа и его последователей. Ученые доказали, что каждое живое существо обладает собственным электромагнитным излучением. Волны определенной частоты, воспроизводимые устройством, вступают в резонанс с собственным излучением микроорганизмов, усиливая его естественные колебания. Интенсивные колебания становятся губительными для инфекционных агентов и паразитов.

В данном случае устройство будет генерировать частоты, характерные для определенных видов вирусов, бактерий, гельминтов, простейших и грибов, а также позволит провести глубокую очистку организма от токсинов.

Поскольку применение частот AP привязано к инкубационному периоду патогенных микроорганизмов или воспалительному процессу, то ежедневное его использование в течение длительного времени не желательно. Обязательным условием при использовании данного прибора является употребление чистой питьевой воды. При несоблюдении могут появиться побочные эффекты в виде: головных болей, отечности, кожных высыпаний, тошноты.

Для осуществления электромагнитного воздействия вы можете воспользоваться как программами базовых комплексов, состоящих из ручных и автоматических программ, так и наборами программ DeInfo. Кроме того для регуляторного воздействия в приборе предусмотрена возможность создания своих уникальных комплексов и программ.

Методика использования программ и их описание даны в Приложениях 1, 3, 5 для прибора DeVita Ritm и Приложениях 2, 4, 5 для прибора DeVita AP. При составлении собственных схем оздоровления с использованием программ деструктивного направления нужно помнить, что после работы антипаразитарных программ должны идти программы по выводу токсинов.

2. Квантовое воздействие.

Как прибор квантового воздействия DeVita Combi излучает частоты, характерные для электромагнитного регуляторного воздействия (DeVita Ritm), инфракрасный свет и световые волны 4-х спектральных цветов видимого света.

Принцип действия заключается в рефлекторном воздействии на нервные окончания, располагающиеся в коже, активации синтеза биологически активных веществ, снижении количества патогенных микроорганизмов на поверхности кожи и слизистых и повышении барьерной функции кожи.

При работе с прибором можно использовать только квантовую насадку или сочетать ее воздействие с электромагнитным направлением. Такое комбинированное излучение является высокоэффективным при воздействии на биологические процессы в организме, позволяет восстанавливать равновесие нервной и эндокринной систем, что благоприятно отражается на работе всего организма и его способности противостоять различным заболеваниям.

Оказывает противовоспалительное, регенерирующее, тонизирующее, омолаживающее действие, улучшает кровообращение и питание тканей, способствует повышению тургора кожи, снижает проявления депрессии, активизирует умственные процессы.

Оздоровительное воздействие цветом/светом проводится на кожные покровы в области рефлекторных зон. Для этих целей используют зоны Захарьина – Геда, зоны на лице, стопах и ладонях, описанные древнекитайскими целителями (см. Приложение 6, 7). Каждая зона на теле человека прямо или косвенно связана с тем или иным органом или системой органов, их функциями. Воздействие на зоны и подлежащие ткани изменяет тонус и наполнение сосудов микроциркуляторного русла, метаболизм клеток дермы и активизирует уровень обменных процессов всех слоев кожи и подкожной жировой клетчатки. Раздражение рецепторного аппарата кожи, слизистых оболочек и подлежащих тканей через нервную систему приводит к воздействию на функциональные системы организма.

Для осуществления электромагнитного-квантового воздействия вы можете воспользоваться специальными программами DeVita Cosmo (Приложение 6), рекомендованными программами для DeVita Cosmo (Приложение 7), наборами программ DelInfo или создать свои программы.

Методика использования специальных программ DeVita Cosmo дана в Приложении 6.

Внимание: некоторые программы имеют ограничения в использовании по времени суток, по возрасту.

3. Электропунктурное воздействие.

Как прибор электропунктурного воздействия DeVita Combi выдает слабые разряды электрического тока (импульсные токи).

Воздействие осуществляется на биологически активные точки (БАТ) или рефлекторные зоны, расположенные на разных участках тела. В рефлекторных зонах находятся проекции внутренних органов. При раздражении точек проекции, в теле запускается рефлекторный механизм, который помогает подключить деятельность нервных окончаний; сосудистой сетки и запустить биохимические процессы. Все это приводит к снижению болевых ощущений и процессу оздоровления.

Для усиления оздоровительного эффекта возможно сочетание электромагнитного регуляторного воздействия и электропунктурного (HV). Последнее может осуществляться в двух направлениях: HV STEP и HV RAMPING. Для направления HV STEP предложены наборы частот и зоны воздействия для решения соответствующих проблем (см. Приложение 8). Так же вы можете самостоятельно подобрать индивидуальный набор частот. В этом варианте частоты будут переключаться друг за другом в указанном вами порядке. Для направления HV RAMPING задается нужный диапазон частот, который будет осуществляться автоматически по принципу «качелей».

Область применения DeVita Combi

Прибор может быть использован при:

- нарушении функционала любой системы организма;
- травматических повреждениях;
- воспалительных реакциях;
- простудных и других инфекционных заболеваниях;
- наличии стресса, раздражительности;
- снижении работоспособности;
- снижении тургора кожи, ухудшении цвета лица

Ограничения в использовании.

Для электромагнитного и квантового воздействия:

- наличие имплантированного органа
- первый триместр беременности

Для электропунктурного воздействия:

- наличие злокачественных новообразований;
- наличие имплантированного органа;
- беременность;
- инфаркт миокарда до 2-х месяцев давности;
- индивидуальная непереносимость электрического тока;
- повреждения и заболевания кожи в местах электростимуляции.

Порядок проведения сеансов

DeVita Combi обеспечивает пользователю возможность самостоятельного проведения процедуры после изучения руководства по эксплуатации.

Прибор прост в обращении, а степень его воздействия регулируется длительностью сеансов.

1. Во время сеанса электромагнитного воздействия необходимо:

- подготовить аппарат к работе;
- расположить антенны Ритм или АП в непосредственной близости от тела (до 150 см)
- выбрать необходимую программу;
- запустить программу;
- для прерывания сеанса на короткое время (до 59 мин) воспользуйтесь кнопкой «**ПАУЗА**».

Курс использования зависит от решения соответствующей проблемы и может длиться от 7 до 30 дней для деструктивного, и от 30 дней до полугода для регуляторного воздействия при ежедневном применении.

Подробнее см. Приложения 1-4 для соответствующих приборов.

В случае появления нежелательных реакций (головокружения, усталости, ухудшения аппетита, болей, сонливости), очередной сеанс пропускают и увеличивают период работы с приборами. Обязательно соблюдение питьевого режима!

2. Во время сеанса квантового воздействия необходимо:

- подготовить аппарат к работе;
- выбрать режим нужного воздействия (квантовый или электромагнитный-квантовый);
- принять удобное положение;

- расположить антенну Ритм (в случае совместного воздействия) в непосредственной близости от тела (до 150 см), квантовая приставка – в руках;
- определить зону воздействия на теле;
- освободить зону воздействия от одежды (кожа должна быть чистой);
- выбрать необходимую программу;
- запустить программу.

Для проведения сеансов прибором QUANT поверхность кожи разбита на зоны, что позволяет легко ориентироваться и подвергать воздействию нужные участки. Зоны воздействия представлены на рисунках (Приложение 6, 7). Во время проведения сеанса квантовой приставкой совершают круговые или линейные движения над рекомендуемой зоной, на расстоянии 2-3 см от поверхности кожи со скоростью 1-2 см/сек.

При работе с квантовой приставкой в области лица, желательно закрыть глаза, т. к. яркий свет может вызвать неприятные ощущения. В области расположения щитовидной железы (передняя часть шеи) приставкой работать не рекомендуется!

Воздействуя на кожные зоны по предлагаемым схемам следует учитывать последовательность действия. В течение сеанса необходимо осуществлять воздействие на все зоны, указанные в Приложениях 6 или 7 для текущего сеанса.

В Приложении 7 указаны наборы частот для решения тех или иных проблем, и циклы их использования с учетом зон. Цикл включает в себя 4 сеанса, следующих один за другим каждый день. Наиболее выраженный эффект наступает в результате курсового использования. Курс – это несколько повторяющихся один за другим циклов.

При работе по зонам Приложения 7 его продолжительность составляет 3-4 цикла (9-12 дней), далее нужно сделать перерыв (10-14 дней) и вновь повторить курс.

При работе по зонам Приложения 6 курс составляет 1 месяц ежедневного использования, далее перерыв (7-14 дней). Для поддержания эффекта сеансы можно проводить 1-2 раза в неделю.

При работе с квантовой приставкой время работы программ сокращается в 2 раза, по сравнению с аналогичными программами режима электромагнитного воздействия. Это связано с тем, что эффективность комплексного влияния выше, и времени для получения хорошего эффекта требуется меньше.

Следует обратить внимание, что в процессе применения возможно проявление неприятных ощущений в виде недомогания, тошноты, слабости и т. д. В этом случае необходимо увеличить интервал между сеансами. Например, проводить их через 1-2 дня.

Комната, где проводятся сеансы квантового воздействия, должна быть слегка затемнена (шторы, жалюзи) или иметь приглушенное освещение. Сеанс проводится через час после приема пищи или физической нагрузки. После завершения сеанса необходимо несколько минут спокойно посидеть или полежать. Это время необходимо для полного усвоения действия прибора.

3. Во время сеанса электропунктурного воздействия необходимо:

- подготовить аппарат к работе;
- выбрать режим нужного воздействия (электропунктурный или электромагнитный-электропунктурный);
- определить зону воздействия на теле;
- освободить зону воздействия от одежды (кожа должна быть чистой);
- снять украшения, часы, индивидуальные средства связи (сотовый телефон и т. п.);
- принять удобное положение;
- выбрать необходимую программу;
- расположить электроды в зоне воздействия;
- запустить программу.

Для определения зон воздействия воспользуйтесь таблицей Приложения 8. Минимальный курс электропунктурного воздействия 3-5 сеансов. Курс может быть продлен до достижения положительного результата.

В случае появления нежелательных реакций (головонкружения, усталости, раздражения на коже и т. д.), очередную процедуру пропускают и увеличивают межпроцедурный период.

Использование комплекса методов в процессе оздоровления обеспечивает стойкий положительный эффект и сокращает сроки восстановления.

Техника безопасности проведения сеансов

Работа на аппарате должна осуществляться в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации и данными Методических рекомендаций.

Приложения

Приложение 1 – «Перечень ручных программ DeVita Ritm».

№	Название программы	Описание программы
1	Активная защита	<p>Организм человека существует в условиях постоянно меняющейся среды, к которым вынужден приспосабливаться. На него оказывают негативное воздействие перепады температур и атмосферного давления, электромагнитное излучение от бытовых приборов и оргтехники, частые стрессы. Также на организм влияют физические и умственные нагрузки, постоянно меняющийся режим работы. Программа нормализует работу нервной и эндокринной систем, повышает работоспособность, внимательность, придает тонус, снимает усталость и раздражительность. Защищает от патогенных излучений.</p> <p>Применение: Программа используется ежедневно в утреннее или дневное время. Входит в состав автопрограмм «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется к использованию в вечернее и ночное время.</p>
2	Кровообращение	<p>Малоподвижный образ жизни, вредные привычки, неправильное питание, стресс негативно сказываются на состоянии кровеносной системы. Программа восстанавливает местное и общее кровообращение, регуляцию поглощения кислорода, улучшает кровоснабжение всех органов.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток при необходимости.</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2-х месяцев после инфаркта миокарда.</p>
3	Пищеварение	<p>Такие факторы, как нарушение режима питания, переход на непривычные продукты оказывают повышенную нагрузку на желудочно-кишечный тракт.</p>

3	Пищеварение	<p>Это вызывает несварение, метеоризм, боли и дискомфорт. Программа благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, помогает организму легче усваивать пищу, снижает риск пищевых расстройств, уменьшает ощущение тяжести и дискомфорта, снимает изжогу, спазмы кишечника.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 19:00 до 21:00. При необходимости используйте повторно через 0,5 часа.</p>
4	Детоксикация	<p>В процессе жизнедеятельности в организме накапливаются токсины. Они накапливаются как в межклеточном веществе, так и в клетках органов. Токсины нарушают обменные процессы, создают благоприятную среду для размножения болезнетворных микроорганизмов. Программа активизирует деятельность выделительных систем и помогает справиться с выводом токсинов из организма, а также регулирует работу печени и желчного пузыря.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток. Обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
5	Антистресс	<p>Практически каждый день мы испытываем стресс: на работе, в дороге, дома. Обычно психика нейтрализует последствия стрессов, однако при постоянном наложении негатива или при резкой смене ритма жизни организму требуется помощь. Программа поможет в сложной ситуации, при психологических или физических нагрузках. Нормализует работу нервной системы, способствует быстрому засыпанию и крепкому сну. При сильном нервном возбуждении используйте в сочетании с программой «Здоровый сон».</p> <p>Применение: Программа используется перед сном. Прибор располагается под подушкой. Если по окончании программы сон не наступает, необходимо повторить сеанс.</p>
6	7 чакр	<p>Человек – сложная энергетическая структура, основу которой составляют семь чакр, расположенных вдоль позвоночника.</p>

6	7 чакр	<p>Каждая чакра связана с определенными органами, при повреждении чакр нарушается работа соответствующих им органов. В чакрах происходит накопление энергии. Негативная энергетика засоряет чакры и губительно воздействует на организм в целом. Программа восстанавливает утраченную энергию, правильно распределяет ее и тем самым восстанавливает работу органов и систем.</p> <p>Применение: Программа используется в дневное время.</p>
7	Гормоны в норме	<p>Эндокринная система регулирует деятельность органов с помощью гормонов и обеспечивает постоянство внутренней среды (гомеостаз). Эндокринная система участвует в развитии организма, его росте, репродуктивной функции. Также она регулирует психическое состояние и эмоциональные реакции. Программа нормализует функцию системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы и регулирует выделительные процессы в организме.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, ежедневно не менее месяца. Входит в автопрограммы «Здоровый день» и «Полное очищение».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется к использованию детьми до 13 лет.</p>
8	Чистые почки	<p>Выполняемые почками функции многообразны. Главная из них – регуляция водного и электролитного обмена в организме, поддерживающая постоянный объем и давление крови и других жидкостей. Также почки регулируют кислотно-щелочное равновесие в организме. Они выводят продукты азотистого обмена – мочевину, креатинин, мочевую кислоту и др. Нарушение питания (особенно – избыточное потребление мяса), обмена веществ, недостаток витамина А, переохлаждение, инфекционное заражение вызывают загрязнение почек, образование песка и камней. Программа способствует активному выводу токсинов из организма, регулирует работу почек, а также предупреждает образование почечных камней.</p>

8	Чистые почки	<p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, оптимально – с 17:00 до 19:00. В случае токсических или инфекционных поражений организма – повторить через 0,5 часа. Для нормального функционирования почек обязательно употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p> <p>Внимание: Во время работы этой программы может наблюдаться повышенное выделение мочи.</p>
9	Чистая лимфа	<p>Лимфатическая система круглосуточно стоит на страже чистоты организма. Она играет важную роль в выносе продуктов обмена, а также в поддержании иммунитета. Естественным образом лимфа очищается, проходя через лимфатические узлы, но иногда этого бывает недостаточно. При нарушении функций лимфосистемы до 83% вредных веществ скапливается в межклеточном пространстве. При этом повышается нагрузка на все органы выведения: печень, кишечник, почки. Программа способствует разжижению лимфы, выводу из организма шлаков и лишней воды, улучшает обмен веществ в клетках, нормализует давление, повышает иммунитет.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время. Во время работы программы рекомендуется проводить легкий массаж в виде поглаживания (без усилий).</p> <p>Внимание: Для наиболее эффективного вывода токсинов употребляйте чистую питьевую воду – 1-1,5 литра в сутки.</p>
10	Здоровое зрение	<p>Постоянная нагрузка на глаза (чтение, работа за компьютером), а также перемена условий и ритма жизни вызывают усталость и раздражение глаз, снижение зрения. Программа снижает нагрузки на глаза, снимает утомление и боль, способствует нормализации зрения.</p> <p>Применение: Используйте перед сном ежедневно в течение 7 дней. Далее один день – отдых. Сеансы повторять до получения желаемого результата. После окончания работы программы глаза не напрягать. Для наилучшего результата сочетайте с упражнениями для цилиарной мышцы.</p>

11	Женская сексуальность	<p>Сексуальное желание является индикатором разных состояний женщины. Если женщину перестает интересовать сексуальная жизнь, можно предположить о возникшем заболевании. В большинстве случаев, снижение полового влечения развивается при сочетании нескольких факторов - соматических, психических и микросоциальных. Программа поможет при отсутствии или снижении у женщины полового влечения, ослабит чувство эмоционального напряжения, психический дискомфорт, усилит сексуальное влечение.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в день.</p>
12	Мужская сексуальность	<p>Проявление мужского влечения зависит от возраста, физических нагрузок, нервно-психического состояния, внешних раздражителей и т. п. Стрессы, проблемы на работе, различные комплексы приводят к психологической импотенции у мужчин. В результате они становятся настороженными к появлению и «качеству» эрекции, сравнивают, анализируют. И чем больше мужчина готовится к этому «событию», тем меньше у него шансов на успех. Программа направлена на психологическую коррекцию, регуляцию работы 6 чакры, снимает чувство тревоги и укрепляет уверенность в благоприятном завершении интимной близости.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в день.</p>
13	Стоп травмы	<p>Ушибы, вывихи, переломы подстерегают как сторонников различных видов спорта, так и обычных людей. В сочетании с врачебной помощью, программа ускоряет процесс заживления, снижает болевые ощущения, снимает отеки, устраняет кровоизлияния, восстанавливает эластичность мышц.</p> <p>Применение: при травмах ежедневно 2-3 раза в день до получения желаемого результата. По необходимости сочетайте с программами «Суставы без воспалений» и/или «Суставы без боли».</p>
14	Предтреник	<p>Зачастую посетителям тренажерных залов не хватает энергии и мотивации особенно после рабочего дня.</p>

14	Предтреник	<p>Программа «Предтреник» заряжает энергией, повышает интенсивность тренировки, помогает победить переутомление, повышает обменные процессы в мышцах и делает тренировку эффективнее.</p> <p>Применение: перед каждой тренировкой.</p>
15	Тренировка	<p>Успешные и активные тренировки часто приводят к утомлению и боли в мышцах, которые не дают возможности добиться большего результата. Программа повышает мышечную силу, снимает утомление мышц, укрепляет мускулатуру, улучшает снабжение мышц кровью и кислородом, повышает выносливость, позволяет достичь максимальных результатов при минимальных затратах организма.</p> <p>Применение: Программа используется во время тренировки.</p> <p>Внимание! Не является допингом.</p>
16	Здоровое сердце	<p>От работы сердца зависит снабжение органов кислородом и питательными веществами, а значит, эффективная работа всего организма. Сбои в деятельности сердца вызываются неправильным образом жизни, стрессами, физическими перегрузками. Программа регулирует комплексное кровообращение и кровяное давление, обеспечивает нормальное кровоснабжение сердечной мышцы, способствует саморегуляции сердца и его стабильной работе.</p> <p>Применение: Используйте в любое время суток один, по необходимости, два раза (оптимально – с 11:00 до 13:00).</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать программу в течение 2 месяцев после инфаркта миокарда.</p>
17	Сердечный ритм в норме	<p>Когда сердце бьется, как надо, мы не замечаем его работы. Но если оно начинает сбиваться со своего ритма, это приносит огромный дискомфорт. Аритмии могут возникать и у здоровых людей по разным причинам – как реакция на тесную одежду, укусы насекомых, некоторые лекарственные препараты, стресс, обильную еду, проблемы со стулом. Программа восстанавливает сердечный ритм, улучшает кровоснабжение сердца, нормализует работу нервной системы.</p>

17	Сердечный ритм в норме	Применение: Программу используют при нарушении сердечного ритма 1 раз в день.
18	Антипростуда	<p>Первые признаки простуды – это заложенность носа и першение в горле. Часто мы не обращаем на эти симптомы внимания и переносим их «на ногах». Это чревато осложнениями, наиболее распространенными из которых являются инфекции верхних дыхательных путей – гайморит, синусит, бронхит, отит. Программа активизирует иммунитет, повышает сопротивляемость, снижает вероятность осложнений, уменьшает отечность, способствует лучшему отхождению слизи из пазух носа, помогает восстановиться в короткие сроки.</p> <p>Применение: Программа может использоваться в любое время суток, в период межсезонья или эпидемии простудных заболеваний применяйте ежедневно. Облегчает состояние при аллергии.</p>
19	Дыши легко	<p>Бронхоспазм (кашель) - это защитная реакция организма на раздражитель, инфекции дыхательных путей, также может быть следствием воздействия некоторых препаратов на организм. Бронхоспастический синдром характерен для людей со склонностью к аллергии и лиц, страдающих бронхиальной астмой. Программа восстанавливает функции бронхолегочной системы, нормализует работу легких, регулирует кровоснабжение и поглощение кислорода, снимает спазмы.</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости в любое время суток. При спазмах и сильном кашле – до 2-3 раз подряд.</p>
20	Женское здоровье	<p>Плохая экология, вредные привычки, солнце неблагоприятно воздействуют на женский организм, ускоряют процесс старения и вызывают проблемы в организме женщины. Программа охватывает широкий спектр женских проблем и полезна в любом возрасте. Снижает предменструальное напряжение, болезненные ощущения, корректирует климатерические нарушения.</p> <p>Применение: Девочкам в период полового созревания рекомендуется применять ее 1-2 раза в неделю.</p>

20	Женское здоровье	<p>Женщинам, испытывающим боли и дискомфорт в период менструации – ежедневно в данный период. Для эффективности воздействия при коррекции проблем в сексуальной сфере и/или при нарушении работы органов женской репродуктивной системы – ежедневно в сочетании с программой «Женская сексуальность».</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использование программы во время беременности или при желании женщины забеременеть.</p>
21	Мужское здоровье	<p>Мужское здоровье – это не только здоровая потенция, но и правильная работа остальных внутренних органов. Заботиться о мужском здоровье необходимо с молодости. Программа предназначена для гармонизации мужской мочеполовой системы. Она регулирует процессы мочеиспускания, работу мужских половых желез, в том числе предстательной. Чем старше мужчина, тем более полезна данная программа.</p> <p>Применение: Программа используется 1 раз в неделю, оптимально с 21:00 до 23:00. При проблемах с потенцией и/или простатой ежедневно в сочетании с программой «Мужская сексуальность», «Без простатита».</p>
22	Здоровый сон	<p>Здоровый крепкий сон является важной составляющей жизни любого человека. Во время сна организм восстанавливает энергию, потраченную в течение дня. Однако любые психо-эмоциональные потрясения могут послужить толчком для развития нарушений сна. Что, в свою очередь, провоцирует развитие как физиологических, так и психических нарушений. Раздражительность, усталость, невозможность сконцентрироваться – самые первые признаки расстройства сна. Программа способствует снижению возбудимости нервной системы, быстрому засыпанию, нормализует фазы сна.</p> <p>Применение: ежедневно на ночь, возможно повторное использование программы до 2-3 раз.</p>

23	Хорошее настроение	<p>Депрессия, тревога, страх — эти понятия взаимосвязаны. Тревожность и страх являются признаком депрессии. Очень часто такое состояние приводит к психосоматическим заболеваниям, эмоциональному истощению, неудовлетворенности собой. Страхи — сильные факторы, мешающие человеку в раскрытии его способностей и достижении успеха. Программа «Хорошее настроение» позволяет купировать депрессивное состояние, снизить тревожность, нормализует сон, улучшает настроение и психическую активность.</p> <p>Применение: ежедневно 1 раз в дневное время.</p>
24	Суставы без боли	<p>Боль в суставах или позвоночнике может иметь несколько причин. Чаще всего это защемление или воспаление нервов, которое происходит из-за малоподвижного образа жизни, ушибов, падений, при избыточном весе, грыже дисков позвоночного столба, переохлаждении, активных физических нагрузках, при разрушении хрящевой ткани или воспалении суставной сумки. Программа способствует снижению болевых ощущений, улучшению микроциркуляции крови, нормализации тонуса мышц, связочного аппарата, хрящевой ткани, активизирует обменные процессы в поврежденных тканях.</p> <p>Применение: при обострении режим использовать как дополнение к основной терапии и в сочетании с программой «Суставы без воспалений». Ежедневно в любое время суток 2 недели, один день перерыв, далее курс повторить до получения желаемых результатов.</p>
25	Суставы без воспалений	<p>Каждый третий житель нашей планеты испытывает боли или хруст в суставах и позвоночнике. Причинами данной проблемы могут быть инфекции, травмы, аллергические реакции, избыточный вес, профессиональные занятия спортом, неправильное питание и т. д. Программа улучшает кровоснабжение поврежденной области, снимает воспаление, отечность и болевые ощущения. Хорошо зарекомендовала себя как поддерживающее и восстанавливающее средство в период «активных дачных работ», также при растяжениях и сильном утомлении мышц.</p>

26	Кишечник без проблем	<p>Кто из нас не испытывал такие симптомы как вздутие живота, тошнота, проблемы с кишечником, снижение аппетита, боли в области живота? Все это показатели нарушений в работе кишечника. Проявляются эти симптомы не на начальной стадии, а когда заболевание перешло в хроническую форму. Чтобы снизить болевые ощущения, убрать тошноту и вздутие, нормализовать стул воспользуйтесь программой «Кишечник без проблем».</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости и в зависимости от состояния 1-2 раза в день.</p>
27	Обмен веществ в норме	<p>Обмен веществ – это совокупность химических реакций, обеспечивающих нормальную жизнедеятельность организма. Основными факторами нарушения обмена веществ являются: неправильное питание, использование некоторых медикаментов, стрессы, малоподвижный образ жизни. Из-за нарушения обмена веществ могут возникнуть такие заболевания, как диабет, подагра, ожирение, аллергия, нарушение работы сердечно-сосудистой системы, задержка роста и развития у детей. Программа направлена на сбалансированную работу щитовидной и поджелудочной желез, правильное усвоение калия, кальция, магния, натрия, выравнивание кислотно-щелочного равновесия.</p> <p>Применение: по необходимости 1-2 раза в день.</p>
28	Красивая кожа	<p>Проблемы с кожей возникают из-за нарушения работы внутренних органов – в этом случае кожа берет на себя функцию очистки. На лице появляются акне, сосудистые дефекты, пигментация и т.д. С этим сталкиваются подростки, испытывающие гормональную перестройку, и лица, страдающие нарушениями эндокринной и пищеварительной систем. Программа нормализует работу кожных желез, усиливает барьерную функцию кожи, улучшает процессы метаболизма в клетках.</p> <p>Применение: 1-2 раза в день до получения желаемого результата.</p>

29	Красивые волосы и ногти	<p>Выпадение волос, перхоть, ломкие ногти – показатели расстройств работы организма или негативного влияния окружающей среды. Программа способствует улучшению микроциркуляции крови, активизации клеточного метаболизма и регенерации клеток. Это приводит к укреплению волосяных лукович и ногтей, стимулированию роста волос, повышению защитных функций кожи.</p> <p>Применение: ежедневно, до получения желаемого результата.</p>
30	Без аллергенов	<p>Аллергены — вещества, к которым организм испытывает повышенную чувствительность из-за нарушенного механизма иммунной реакции. Они окружают нас повсюду: на улице, дома, на работе. Распространенные аллергены – это пыльца растений, пыль, шерсть животных, лекарственные препараты, бытовая химия и др. На эти вещества организм может реагировать такими проявлениями, как слезотечение, отек слизистых, высыпания на коже и т. п. Программа облегчает симптомы аллергии, нормализует функции иммунной системы.</p> <p>Применение: по необходимости ежедневно. Людям, имеющим аллергию на цветение растений рекомендуется начать применение за 1 месяц до начала цветения.</p>
31	Иммунная защита	<p>Иммунная система является очень сложным, саморегулирующимся, самообучающимся и многоуровневым комплексом. Благодаря его слаженной работе происходит обеспечение биологической защиты. Программа снижает нагрузку печени, активизирует работу тимуса, селезенки и лимфатической системы, способствует омоложению и долголетию.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
32	Здоровые почки	<p>Программа используется для выведения из организма лишней жидкости, а также солей, которые обладают свойством удерживать ее в тканях.</p>

32	Здоровые почки	<p>Программа имеет ярко выраженный мочегонный эффект, также способствует восстановлению физиологической функции почек и снижению отечности.</p> <p>Применение: ежедневно по необходимости в течение месяца.</p>
33	Вегетативная регуляция	<p>Вегетативная нервная система управляет многими функциями жизнеобеспечения организма. Проблемы в ее работе могут выражаться в нарушении сердечного ритма, изменении кровяного давления, излишней потливости, утомляемости, слабости, ломкости волос и ногтей и др. Программа направлена на восстановление функций ВНС, активацию работы головного мозга, нормализацию обмена веществ, теплообмена, аппетита, регенерацию клеток.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье».</p>
34	Клеточное дыхание	<p>Гипоксия — кислородное голодание, причиной которого может быть недостаток поступающего внутрь организма кислорода или прекращение его усвоения тканями тела. Программа способствует улучшению кровоснабжения головы, сердца и легких, активному усвоению кислорода кровью, снятию спазмов сосудов, уменьшению закисления, выводу токсинов.</p> <p>Применение: ежедневно или через день, в любое время суток. Входит в состав автопрограммы «Здоровье»</p>
35	Здоровые суставы	<p>Болезненные ощущения в суставах могут возникать не только у возрастных людей, но и молодых. Связаны боли с воспалительными реакциями, сопровождающимися припухлостью, покраснением кожи, ограничением движения. Причинами данной проблемы могут быть: инфекции, нарушения обмена веществ, травмы, избыточный вес, большие механические и функциональные нагрузки. Программа способствует улучшению состояния поврежденных тканей суставов, уменьшению болевых ощущений.</p>

35	Здоровые суставы	<p>Применение: ежедневно в течение месяца. Рекомендуется использовать совместно с программами «Суставы без боли», «Суставы без воспаления». Наиболее эффективна программа при выполнении легких упражнений на проблемный сустав.</p>
36	Без простатита	<p>Предстательная железа – орган, выполняющий ряд необходимых функций: репродуктивную, секреторную, барьерную, осуществляет контроль оттока мочи, оказывает влияние на психоэмоциональное состояние. Железа очень уязвима для различных видов патологических процессов. Факторы, нарушающие работу простаты, могут быть как внешними (плохая экология, ионизирующее излучение, стрессы, пассивный образ жизни, воздействие инфекционных агентов), так и внутренними (генетическая предрасположенность, сопутствующие хронические и острые заболевания, вредные привычки). Программа направлена на уменьшение воспалительных процессов и нормализацию работы железы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-3 месяцев. Рекомендуется совмещать с программой «Мужское здоровье».</p>
37	Нервное равновесие	<p>Нервное перевозбуждение является следствием накопленного за определенный период времени стресса. Проявляться это может в виде: бессонницы, подавленности, мышечных или головных болей, раздражительности, нестабильности настроения и др. Программа снимает нервное возбуждение, гармонизирует работу нервной системы.</p> <p>Применение: при больших психологических нагрузках ежедневно в конце рабочего дня и/или перед сном.</p>
38	После тренировки	<p>В процессе тренировок в организме активизируется обмен веществ, что приводит к накоплению метаболитов. Возрастает нагрузка на вегетативную систему, могут наблюдаться микротравмы мышц, их болезненность и др. Такой дискомфорт выдерживают не все, и в результате, прекращают дальнейшие тренировки.</p>

38	После тренировки	<p>Программа снимает утомление мышц, способствует быстрому выводу метаболитов и поддержанию работы нервной системы.</p> <p>Применение: после любого вида тренировок.</p>
39	Антиварикоз	<p>На проблему с венами мы обращаем внимание, когда на ногах (чаще всего) образуются синие выступающие «змейки», доставляющие, изначально, эстетический дискомфорт. А в дальнейшем приводящие к другим функциональным нарушениям. Чаще всего причиной данной проблемы является малоподвижность человека, отсутствие тренировок или обычных пеших прогулок, многочасовое сидение за рулем или у монитора компьютера, длительное ношение обуви на высоком каблуке. Программа способствует снятию болевых ощущений и отечности, укреплению венозной стенки и повышению ее тонуса, уменьшению воспалительных реакций, улучшению кровообращения в капиллярах.</p> <p>Применение: по необходимости (при тяжести, усталости ног), или ежедневно (при наличии варикозного расширения). Программу желательно использовать в ночное время или перед сном. Во втором случае под ноги положить свернутое одеяло или подушку так, чтобы ноги оказались в приподнятом состоянии. После сеанса не вставать в течении 30 мин.</p>
40	Голова без боли	<p>Головная боль способна доставить очень много проблем. Причины головной боли разные: перепады артериального давления, интоксикация, вегетативные дисфункции, остеохондроз и др. Программа направлена на устранение болевых ощущений, снятие спазмов сосудов, улучшение кровоснабжения и питания клеток мозга.</p> <p>Применение: по необходимости в любое время суток. Если по окончании программы боль не прошла, повторите сеанс через 20-30 мин.</p>

41	Сахар в норме	<p>Повышенный сахар в крови может наблюдаться у человека под влиянием ряда факторов: тяжелый физический или напряженный умственный труд; злоупотребление пищей, богатой углеводами; сильный стресс, панические атаки; прием лекарственных препаратов, функциональные нарушения кровообращения. Регулярно наблюдайте за показателями сахара в крови. Для предупреждения развития более серьезного заболевания используйте программу «Сахар в норме», которая поможет нормализовать работу поджелудочной железы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца, далее по необходимости. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Поджелудочная в норме».</p>
42	Оперативная память +	<p>Мозг человека содержит большой объем знаний. С возрастом, а также при больших умственных нагрузках может наблюдаться снижение процесса запоминания и память не всегда способна к выдаче необходимой информации. Программа активизирует мозговую деятельность и процесс запоминания, а в сочетании со здоровым образом жизни настраивает психоэмоциональную составляющую человека на позитив.</p> <p>Применение: Программу рекомендуется применять ежедневно в утреннее и дневное время, желательно в процессе изучения необходимого материала.</p>
43	Нервная система, общая	<p>После укусов клещей, очень часто могут наблюдаться признаки нарушения работы нервной системы, выражающиеся головной болью, усталостью, бессонницей, депрессией, нарушением движения лицевых мышц, сбоем в функционировании зрительного нерва и др. Программа поддерживает нервную систему в гармоничном состоянии, приводит к слаженной работе все ее отделы, налаживает функциональное и психологическое состояние человека, регулирует ментальные процессы и настроение.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев. См. комплекс «SOS Клещи»</p>

44	Здоровые уши	<p>Воспаление и боль в ушах могут возникнуть в результате травм, поражении различными инфекционными агентами: вирусами, бактериями, грибами. Проблема может возникнуть в любом возрасте, чаще наблюдается у детей и пожилых. Программа направлена на восстановление слизистой разных отделов органа слуха, снижение неприятных ощущений при заболеваниях уха, улучшение слуха.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Уши без воспаления».</p>
45	Горло без проблем	<p>Больное горло – проблема, встречающаяся как у взрослых, так и у детей в разные периоды года. Причинами могут быть: снижение иммунитета, инфекционные заболевания верхних дыхательных путей, кариозные зубы, заболевания десен. Программа способствует поддержанию местного иммунитета, восстановлению слизистой носоглотки, уменьшению болевых ощущений, отечности, охриплости.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Желательно чередование с программой DeVita AP «Горло без боли».</p>
46	Крепкие зубы	<p>Воспаления десен является очень большой проблемой для человека, доставляющей не только дискомфорт, но и способной привести к выпадению зубов. Причинами часто являются: снижение иммунитета, нарушение кровообращения, вредные привычки. Программа помогает нормализовать микроциркуляцию крови, укрепить десны, восстановить поврежденную слизистую, тем самым улучшить состояние полости рта и зубов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1 месяца, см. комплекс «Здоровые зубы».</p>
47	Поджелудочная в норме	<p>Поджелудочная железа выполняет в организме две основные функции: внешне- и внутрисекреторную. Дисбаланс в работе железы может привести к серьезным проблемам и в плане функционирования пищеварительной системы и нарушении обменных процессов.</p>

47	Поджелудочная в норме	<p>Программа способствует нормализации функций железы при различных нарушениях.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программами «Обмен веществ в норме» и «Сахар в норме».</p>
48	Здоровая щитовидка	<p>Щитовидная железа – часть эндокринной системы человека, играющая очень большую роль в организме. При нарушении ее функционирования может появиться дисбаланс в работе сердечно-сосудистой, дыхательной, мочевыделительной, репродуктивной системах, а также нарушение обмена веществ и жидкости. Программа оказывает поддержку щитовидной железе при различных нагрузках, нормализуя ее функционирование и обменные процессы в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев. Можно сочетать с программой «Обмен веществ в норме».</p>

Приложение 2 – «Перечень ручных программ DeVita AP».

№	Название программы	Описание программы
1	Нет стафилококкам	<p>По статистике 20% населения являются постоянными носителями стафилококка. Стафилококк является довольно частым возбудителем инфекционных заболеваний, поражающих кожные покровы, мягкие ткани, верхние дыхательные пути, также опорно-двигательный аппарат. Основной причиной заражения часто является больница и врачи, которые становятся хроническими переносчиками бактерии и люди, которые принимали антибиотики. Стафилококки обуславливают вторичные заболевания при гриппе, ранах, инфекциях, послеоперационные нагноения, а также может вызвать пищевые отравления. Программа убирает причину инфекции, способную оказать губительное воздействие на организм человека. Он эффективен и в качестве комплексного воздействия при заболеваниях, вызванных этими бактериями.</p> <p>Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от снижения проявления инфекции.</p>
2	Нет стрептококкам	<p>Стрептококки – широко распространенная группа микроорганизмов, в числе которых встречаются и патогенные. Они как правило обитают на кожном покрове человека, в дыхательных путях, кишечнике. Могут вызывать острые воспаления ЛОР-органов, мочевыделительной системы, органов брюшной полости, кожи и мягких тканей. Стрептококковая инфекция протекает тяжелее, чем стафилококковая, может привести к поражению суставов, сердца, почек, гаймориту и др. Программа эффективна при ангине, отите, гайморите как в комплексном воздействии, так и отдельно.</p> <p>Применение: ежедневно до 2 недель, в зависимости от стихания проявления инфекции.</p>
3	Нет хламидиям	<p>Хламидии вызывают инфекционные заболевания, передающиеся половым путем. Хламидиоз очень часто протекает бессимптомно, либо с минимальными проявлениями.</p>

3	Нет хламидиям	<p>Поражаются в основном органы мочеполовой сферы. Женщины более восприимчивы к этой инфекции, дети могут инфицироваться при прохождении через родовые пути матери. Хламидиоз может спровоцировать серьезные осложнения, поэтому очень важно вовремя проводить меры по предупреждению заболевания, соблюдая правила гигиены и используя DeVita технологии.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-3 месяцев.</p>
4	Нет хеликобактеру	<p><i>Helicobacter Piloni</i> – микроорганизм, обитающий в желудке и двенадцатиперстной кишке человека и провоцирующий развитие множества опасных заболеваний (гастриты, язвы, гепатиты и многие другие). По данным ВОЗ хеликобактериозом заражено 60 % населения Земли. Инфицирование происходит очень легко и часто считается семейным заболеванием, т. к. при заражении одного члена семьи вероятность заражения остальных составляет 95 %. Зачастую передача паразита происходит в результате общего использования средств личной гигиены, посуды, при поцелуе. Такие симптомы, как изжога, вздутие, боль, тяжесть в желудке могут быть вызваны этим микроорганизмом.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
5	Стоп бактерии	<p>К бактериальным инфекциям относится огромная группа заболеваний, причиной которых являются микроорганизмы – бактерии. Самым важным в развитии заболеваний, вызванных бактериальной инфекцией является выделение бактериями токсинов (ядов), которые обладают воспалительным действием, вызывают интоксикацию организма и повреждают внутренние органы. Программа «Стоп бактерии» применяется для снижения выраженности симптомов интоксикации и облегчения состояния человека при бактериальной инфекции органов ЖКТ и дыхательной системы, вызванной такими формами как пневмококк, листерия, клебсиелла.</p> <p>Применение: ежедневно до исчезновения признаков инфекции.</p>

6	Без гепатита А	<p>В развивающихся странах и в тех местах, где пренебрегают правилами гигиены очень высока вероятность заболеваемости вирусным гепатитом А. Т. к. передается вирус через грязные руки, пищу, воду, даже соленую. Если вы планируете поездки в страны Азии, Африки необходимо принять соответствующие меры безопасности: соблюдайте гигиену, пейте только бутилированную воду, используйте программу «Без гепатита А» при первых подозрениях на наличие инфекции у вас или окружающих.</p> <p>Применение: ежедневно до 2-3 раза в сутки, минимум 1 месяц.</p>
7	Без токсинов	<p>Программа способствует выводу токсинов, улучшает дренажные функции, как следствие повышается иммунитет и жизненная энергия. Используют как детокс-программу после паразитарных, а также самостоятельно в течение месяца. В отличие от других детоксикационных программ не затрачивает энергетические ресурсы организма.</p> <p>Применение: один раз в день после противопаразитарных программ. Входит в состав большинства автоматических программ.</p>
8	Стоп герпес зостер	<p>Заболевание, вызываемое данным вирусом называют опоясывающий лишай. Если человек переболел ветряной оспой (одна из форм вируса зостер), то вирус остается в организме в латентной форме и скрывается в нервных клетках. При переохлаждении, простудных или хронических заболеваниях вирус выходит на поверхность кожи с образованием на ней характерных высыпаний и сильными болевыми ощущениями по ходу любого чувствительного нерва. Программа направлена на уничтожение вируса и снятие основных признаков его проявления.</p> <p>Применение: ежедневно до 3-4 раз в день до исчезновения нежелательных проявлений. Минимум 1 месяц. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p> <p>Внимание: при ветряной оспе программа не используется.</p>

9	Стоп герпес симплекс	<p>Простой герпес известен человечеству с древних времен. Каждый третий человек может являться вирусоносителем. Локализуется на слизистых оболочках губ, рта, половых органов. Снижение иммунитета при переохлаждении или перегревании, во время инфекционных заболеваний или периоде менструации у женщин способствует появлению неприятных высыпаний на слизистых. Передается вирус преимущественно при контакте жидкостей тела зараженного человека (кровь, слюна, сперма, секрет слизистых). Программа эффективно снижает герпетическое отягощение и препятствует появлению признаков инфекции на слизистых.</p> <p>Применение: при первых признаках высыпания каждые 3 часа, а затем 1-2 раза в день в течение 1 месяца. В комплексе с программой «Стоп герпес».</p>
10	Стоп герпес	<p>Носителями вируса является более 90% всех людей на планете. Заразиться можно различными способами: через слюну, половые контакты, предметы гигиены, а так же воздушно-капельным путем. В начале болезнь может протекать бессимптомно, далее появляются характерные признаки: головная боль, недомогание, повышение температуры, герпетические высыпания. Программа поможет сократить сроки восстановления и уменьшить воспалительные и болевые проявления.</p> <p>Применение: 1-2 раза в день в течение месяца совместно с программой «Стоп герпес зостер» или «Стоп герпес симплекс».</p>
11	Здоровая лимфа	<p>Лимфа – жидкая ткань организма. Играет очень большую роль в поддержании водного баланса, гомеостаза микросреды клеток и способна вымывать патологические микроорганизмы и токсины из тканей. При недостаточности лимфообращения лимфа не справляется со своими основными задачами, что приводит к возникновению патологического процесса. Программа способствует нормализации лимфооттока, укреплению стенок лимфатических сосудов, улучшению состояния лимфоузлов, что ведет к уменьшению отечности и лучшему отхождению метаболитов из тканей.</p>

11	Здоровая лимфа	<p>При использовании программы повышаются защитные силы организма.</p> <p>Применение: по необходимости используют 1 раз в день или согласно схемам комплексов (входит в автопрограмму «Очищение»)</p>
12	Антипростуда	<p>Простуда — одно из самых распространенных инфекционных заболеваний в мире. Возбудителями являются респираторные вирусы (аденовирусы, респираторно-синцитиальный вирус), поражающие верхние дыхательные пути (нос, глотку, трахею, гортань). Заболевания, вызванные этой группой вирусов, заразны, т. к. передаются воздушно-капельным путем и не лечатся антибиотиками. Осложнения после перенесенной простуды — риниты, синуситы, отиты и прочее. Очень часто на ослабленный организм может произойти наложение бактериальной инфекции. Поэтому целесообразно использовать данную программу в комплексе с противобактериальными «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам». Программа направлена на уменьшение воспаления слизистых оболочек носа, горла, бронхов и активизацию местного иммунитета.</p> <p>Применение: при первых признаках простуды первые 3 суток до 2-3 раз в день. Далее 1 раз в день на протяжении 7-14 дней.</p>
13	Стоп плесень и грибки	<p>Микроскопические грибы распространены почти повсеместно. Современная отапливаемая квартира или частный дом представляют собой отличную обитель для плесени и грибов. Любимая среда обитания плесени – ванные комнаты, библиотеки, плохо проветриваемые жилые помещения. Грибы могут попасть в организм с пищей, водой, воздухом, со старыми пыльными вещами. Плесневые грибы вызывают аллергию, причем не только ингаляционную, но и перекрестную реакцию на коже. Плесень может проникать через кожный барьер везде, где мы паримся, где мы ходим босиком, везде, где для плесени есть условия (влажность, температура, органические остатки в виде грязи или кожного жира). Грибки и плесень вызывают заболевания дыхательных органов, ЖКТ, кожи с изменением ткани этих органов.</p>

13	Стоп плесень и грибки	<p>Для предупреждения грибковых инфекций и снижения проявления аллергических реакций рекомендуется использование программы «Стоп плесень и грибки». Программа эффективна против аспергиллы.</p> <p>Применение: 1-3 раза в день 4 недели. При проблемах с кожей и ногтями используют комплексно с программой «Без грибка».</p>
14	Стоп кандида	<p>Программа защищает Вас от заражения таким распространённым грибом, как кандида. Она входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, влагалища, рта. Но при снижении иммунитета кандида начинает активно размножаться и вредить организму. Заболевания вызывают и патогенные кандиды, которые попадают в организм с продуктами питания, через предметы обихода, после употребления сильнодействующих антибиотиков, при половом акте с зараженным партнером. Проявляются симптомы в виде аллергических высыпаний на коже, молочницы, боли и жжения в половых органах, дисбактериозе. Предупредите размножение кандиды, используя программу «Стоп кандида».</p> <p>Применение: программу следует применять 1-3 раза в день 2-4 недели. Комплексно с программой «Нет простейшим».</p>
15	Без грибка	<p>Грибковые заболевания человека относятся к группе инфекционных заболеваний, вызываемых болезнетворными грибами. Главная опасность грибковых заболеваний заключается в том, что зачастую пораженные грибком участки являются открытой дорогой для возбудителей множества различных инфекций. Чаще всего микозы поражают кожу, ее производные (волосы, ногти), слизистые оболочки внутренних органов. Лечение требует комплексного подхода и соблюдения правил гигиены. Программа активно борется с такими грибами как трихофитон, микроспорум, мукор.</p> <p>Применение: В целях предотвращения заражения грибковыми инфекциями рекомендуется использование программы каждый раз после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком.</p>

15	Без грибка	При наличии в организме грибковой инфекции программу используют 1-2 раза в день в течение месяца.
16	Нет простейшим	<p>Программа защищает Вас от негативного действия большого количества простейших. Ими болеет каждый пятый человек, и заражается он через грязные руки или пораженные продукты и воду. У зараженного возникают сильные боли в животе, вздутие его, постоянное чувство утомления, депрессия. Могут пострадать печень и поджелудочная железа. Конечно, все эти признаки мешают Вашей жизни, да к тому же, Вы можете заразить и своих близких. Программа воздействует на амебу, лямблий, уничтожая их. Соблюдая правила личной гигиены, а так же «золотое правило» - не пить воду из под крана и регулярно используя программу «Нет простейшим» в качестве профилактики, Вы будете защищены от этих микроорганизмов.</p> <p>Применение: рекомендуется использование программы 1-2 раза в день 10-14 дней. При повторном инфицировании необходимо выявить источники заражения.</p>
17	Интимное здоровье	<p>Возбудителей заболевания органов мочеполовой сферы очень много и зачастую причиной болезни является не один микроорганизм, а несколько. Инфекции могут протекать в острой форме или в хронической. Хроническая инфекция со временем может вызвать сужение уретры, воспаление суставов, привести к бесплодию и увеличить риск внематочной беременности. Периодически во время простуды или эмоциональных перегрузок могут возникать обострения. Инфекции, в основном, передаются при половом акте, а некоторые и при рождении от больной матери. Такие паразиты как уреоплазма может годами жить в организме, не вызывая какой-либо симптоматики и никак себя не проявляя. Главный фактор защиты организма — нормальная микрофлора, и современные DeVita технологии, которые пагубно воздействуют на паразитарную флору, поддерживая естественные защитные силы организма. Программа эффективно борется с такими паразитами как уреоплазма, токсоплазма, микоплазма.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>

18	Без шистосом и трематод	<p>Трематоды — плоские черви, способные вызвать у человека различные серьезные заболевания. Могут паразитировать в крови (шистосомы), печени, кишечнике, легких. Заражение происходит при жевании травинок, особенно вблизи водоемов или во время купания в них, при употреблении плохо промытой зелени или салата, а также не до конца приготовленного мяса крупного рогатого скота, рыбы. Программа направлена на выведение большинства видов трематод, в том числе и шистосом, независимо от стадии их развития и локализации в организме.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 14 дней.</p>
19	Без нематод и аскарид	<p>С мытыми фруктами, плохо приготовленным мясом, грязными руками к нам в рот могут попасть яйца глистов, которые не видны невооруженным глазом. Глисты, живя в организме хозяина, питаются его тканями, «отбирают пищу» у человека (поэтому хочется много кушать), выделяют токсичные вещества. Человек худеет, у него выпадают волосы, шелушится кожа. Наиболее часто встречающиеся гельминты — аскариды. Они могут вызывать повреждение стенки тонкого кишечника, непроходимость кишечника, воспаление брюшины, бронхит, очаговые пневмонии, кровохарканье, заболевания печени и поджелудочной железы. Паразитирование аскарид вызывает аллергическую реакцию, которая может проявляться в виде бронхиальной астмы и кожной сыпи. Под действием программы глисты перестают питаться, что приводит к их гибели и естественному выводу паразитов из ЖКТ. Программа не оказывает токсичного действия на организм человека. Людям, имеющим домашних животных, маленьких детей и профессии, связанные с работой с животными, рекомендуется регулярно проводить профилактические мероприятия 1 раз в квартал.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>

20	Стоп паразиты общая	<p>В организм человека паразиты внедряются через кожные покровы, а также могут заноситься в организм с пищей, водой, пылью. У многих людей, ведущих здоровый образ жизни, наблюдаются нарушения состояния здоровья из-за наличия паразитов. оздоровление организма (правильное питание, физические упражнения, закаливающие процедуры) без избавления организма от паразитов не дает выраженного положительного эффекта. Именно паразиты являются пусковым механизмом для многих хронических заболеваний: холецистит, желчекаменная болезнь, панкреатит, колит, сахарный диабет, бронхиальная астма, дерматит. Такие проблемы как: хроническая усталость, раздражительность и тревожность, гиперактивность у детей, анемия, ломкие ногти и волосы, проблемная кожа, головные боли, расстройства аппетита, снижение иммунитета – могут быть сигналами текущего паразитоза. Все паразитарные заболевания страшны тем, что они отлично маскируются под другие болезни. Профилактика паразитарных заболеваний – это, прежде всего соблюдение гигиенических норм общественного поведения, использование программ «Стоп паразиты общая». Эти меры направлены на сохранение Вашего здоровья и здоровья окружающих людей.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно. Всего не менее 10 сеансов. Через 14 дней курс повторить.</p>
21	Стоп паразиты ЖКТ	<p>Наличие паразитов в ЖКТ и печени становится причиной развития таких заболеваний как холангит, дискинезия желчных путей, холецистит, гепатиты. Их присутствие в кишечнике вызывает воспаление стенок кишечника и снижение усвоения питательных веществ. Токсические вещества, которые выделяют паразиты, вызывают боли в суставах и мышцах, поражают центральную нервную систему. Способствуют возникновению депрессивных состояний, нервозности, беспокойства, нарушения сна. Программа направлена на очищение организма от паразитов ЖКТ, печени и поджелудочной железы.</p> <p>Применение: программа используется ежедневно в течение 7-10 дней. Через 14 дней курс повторить.</p>

22	Антигрипп	<p>Грипп – тяжелая вирусная инфекция, поражающая людей любого возраста. Ежегодно гриппом заболевают до 500 млн. человек. При тяжелом течении гриппа возникают необратимые поражения сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, центральной нервной системы. Вирус передается очень легко, воздушно-капельным путем (при чихании, кашле, разговоре). Самое частое осложнение гриппа – пневмония. Программа направлена на уничтожение разных штаммов вирусов гриппа, снятие воспалительных проявлений.</p> <p>Применение: для предупреждения гриппа во время эпидемии программа применяется 1 раз в 2 дня. При необходимости — ежедневно до 2-3 раз в день, чередуя ее с программой «Стоп грипп базовая». После этого необходимо воспользоваться программой «Дренаж общая». Возможно совместное использование с программами «Нет стафилококкам», «Нет стрептококкам», «Стоп кандиды» во избежание бактериальной и грибковой отягощенности, а также программами «Антивирус», «Антипростуда».</p>
23	Стоп грипп базовая	<p>Грипп – заболевание, которое поражает верхние и нижние дыхательные пути, сопровождается выраженной интоксикацией и может приводить к серьезным осложнениям. Грипп всегда начинается остро и быстро (от момента заражения до первых признаков проходит 48 часов). Основным симптомом интоксикации является повышенная температура тела (40 °С и выше). Такая температура может сохраняться больше 5 дней, что вызывает: одышку или нарушение дыхания, нарушение сознания, судороги. У людей с ослабленным здоровьем, пожилых, маленьких детей такая температура приводит к инфекционно-токсическому шоку (состояние, когда отказывают жизненно важные органы). Используя программу «Стоп грипп базовая» вы сможете облегчить состояние больного, а при комплексном использовании нескольких программ против вирусов гриппа, достаточно быстро восстановить свое здоровье не допуская осложнений.</p>

23	Стоп грипп базовая	<p>Применение: при первых признаках проявления гриппа с повышенной температурой тела программу использовать 1-3 раза подряд или чередуя ее с программой «Антигрипп». Обязательно обильное питье и соблюдение правил личной гигиены.</p>
24	ЖКТ в порядке	<p>Кишечная инфекция – заболевание возникающее при попадании в организм определенных возбудителей патогенных вирусов или бактерий. Подобной инфекции подвержены люди любого возраста, чаще всего дети и те, кто принимает антибиотики. Сопровождается кишечная инфекция: тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе, повышением температуры. При вирусных инфекциях могут наблюдаться и другие симптомы: насморк и покраснение горла, а также боли, возникающие при глотании, отсутствие аппетита, упадок сил. Программа направлена на уничтожение вируса кишечного гриппа – ротавируса и патогенных штаммов кишечной палочки, поможет нормализовать состояние и остановить губительное для организма обезвоживание.</p> <p>Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>
25	Помощь в отравлении	<p>При попадании в организм с пищей, водой, через слизистые дыхательных путей энтеробактерий или энтеровирусов развивается инфекция, которую в народе называют отравление. Данная инфекция способна иметь скрытый характер или явные признаки своего присутствия: головная боль, боль в мышцах, в брюшной области, повышение температуры, рвота, расстройство стула. В последствии может привести к серьезным поражениям органов. Программа помогает организму справиться с инфекцией, которую вызывают энтеровирусы и некоторые виды сальмонелл, ускоряет процесс восстановления, снижает вероятность осложнений.</p> <p>Применение: Использовать в первые сутки 4-5 раз подряд для достижения устойчивого результата. Далее в течение 3-5 дней ежедневно 1-2 раза, чередовать с программой «Дренаж общая» и «Антивирус». Обязательно как можно больше пить воды.</p>

26	Антивирус	<p>Вирусные инфекции – большая группа заболеваний, причиной которых служит вирус. Вирусы представляют собой переходную форму между живой и неживой природой. Так как у вирусов есть генетический материал, но собственной клетки нет, они являются только внутриклеточными паразитами. Именно в этом и состоит сложность их уничтожения. Передаваться вирусы могут воздушно-капельным путем, через различные предметы, поцелуи и половым путем. Большая роль в полном истреблении вирусов в организме принадлежит иммунитету. Программа «Антивирус» направлена на борьбу с различными вирусами и в частности цитомегаловирусом и вирусом Эпштейна-Барр. Также используется с целью ослабления любых штаммов вирусов и усиления иммунитета организма.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца.</p>
27	Дренаж общая	<p>Одна из основных программ по очистке организма от токсинов. Выводом токсичных веществ из тканей и органов занимается лимфатическая система. При различных заболеваниях количество вредных веществ увеличивается во много раз. Лимфатическая система не успевает их выводить и может произойти снова интоксикация организма. Кроме того вследствие заболевания или травмы возможно нарушение естественного оттока содержимого из полости раны или органа. Излишнее скопление жидкости, содержащей болезнетворные организмы может вызвать серьезное воспаление и ухудшение состояния организма человека. Используя программу «Дренаж общая» вы защитите свой организм от лишней токсической нагрузки, которую он испытывает при различного рода заболеваниях или повреждениях. Программа направлена на нейтрализацию и выведение токсинов из организма, при этом не нагружая лимфатическую систему.</p> <p>Применение: однократно после использования любой из программ прибора DeVita AP. Входит в автопрограмму «Очищение».</p>

28	Дренаж антитоксический	<p>Межклеточный матрикс является главным местом скопления токсинов, которое приводит к нарушению обмена веществ, развитию многих тяжёлых хронических заболеваний, преждевременному старению организма. Дренаж тканей, является средством детоксикации тканевого сектора, способствует выведению солей тяжелых металлов и радионуклидов, улучшению метаболических процессов и общего состояния организма.</p> <p>Применение: при сильной интоксикации ежедневно и совместно с программой «Дренаж общая»</p>
29	Мексиканка детокс	<p>Система глубокого полного очищения организма, которая была предложена Р. Райфом. Программа способствует выведению продуктов обмена веществ и токсинов, улучшению дренажной функции лимфатической системы, повышению детоксикационных возможностей печени, активизации выделительной функции почек, повышению уровня иммунной защиты.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца при отсутствии серьезных заболеваний печени, почек, лимфатической системы. При наличии таковых для мягкого очищения организма рекомендуется использовать автоматическую программу «Полное очищение» DeVita Ritm.</p>
30	Нет аллергии	<p>Аллергия – это повышенная чувствительность организма к каким-либо веществам – продуктам, шерсти, пыли, пыльце, химическим, инфекционным агентам. В настоящее время, различными ее разновидностями страдают более 85% всего населения нашей планеты. Причиной аллергии является чаще всего неправильное питание и нездоровый образ жизни. Аллергию можно узнать по неожиданно возникшему насморку, чиханию или слезотечению, покраснению и зуду кожи. Программа снимает основные проявления аллергии, облегчает состояние человека, способствует стабилизации иммунной системы.</p> <p>Применение: ежедневно при наличии показаний и для облегчения состояния.</p>

31	Управление весом	<p>Программа направлена на борьбу с аденовирусом 36, являющимся частой причиной появления избыточного веса. Кроме того при ее использовании происходит регуляция ВНС, запускаются процессы снижения веса. Также программа помогает поддерживать энергетические ресурсы организма.</p> <p>Применение: целесообразно использовать по схеме комплекса «Стройная фигура».</p>
32	Без сальмонеллы	<p>Сальмонелла — представитель семейства энтеробактерий. Устойчивы к внешней среде: могут сохраняться в домашней пыли, в открытых водоемах, в замороженном мясе и колбасных изделиях, яйцах птицы, молочных изделиях от 3 до 6 месяцев. Погибают при температуре более 70 градусов. Заражение сопровождается: высокой температурой, болями в животе, рвотой, жидким стулом. Однако, носительство может быть без признаков.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
33	Без иерсинии	<p>Один из представителей энтеробактерий, вызывающий воспаление в тонком кишечнике, но также может поражать другие органы: печень, почки, сердце, суставы. Встречается в воде, почве, на продуктах питания. Хорошо выносит низкие температуры, поэтому может сохраняться и размножаться в холодильнике. В организме человека, не вызывая признаки воспаления, может находится до момента ослабления иммунитета. Далее начинается обострение.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
34	Без протей	<p>Бактерии рода Протей входят в состав условно-патогенной флоры кишечника. При активном росте становятся причиной поражения органов ЖКТ, мочевыводящих путей, врожденных пороков, раневых инфекций. Патогенность бактерий наблюдается в случае бесконтрольного приема антибиотиков. Либо при поступлении бактерий извне через пищу, воду, немытые руки.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

35	Без клебсиеллы	<p>Условно-патогенная бактерия. При увеличении численности поражает органы ЖКТ, дыхательные пути, мочевыделительную систему. Вызывает сильную интоксикацию с нарушением функционала перечисленных органов. Пути заражения через пищу, воду, при общении с зараженным человеком.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
36	Без кампилобактер	<p>Бактерии кампилобактеры являются возбудителями кишечной инфекции. Внедряются в слизистую и лимфатические пути кишечника и других органов. Заражение происходит через с/х животных и птиц, путем употребления загрязненных мясных продуктов, молока, воды. Реже через поврежденную кожу, при укусах инфицированных животных. Также трансплацентарно или во время родов. В группе риска находятся сельские жители, работники животноводческих и птицеводческих хозяйств, а также туристы, посещающие развивающиеся страны.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
37	Без клостридий	<p><i>Clostridium difficile</i> входит в состав нормальной микрофлоры кишечника, но при возникновении дисбактериоза может вызывать поражения стенок толстого кишечника. <i>Clostridium botulinum</i> обитатель почвы и морской воды, распространены повсеместно и образуют самый сильный из известных бактериальных токсинов – ботулотоксин.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
38	Без шигеллы	<p>Бактерии, являющиеся возбудителями дизентерии. Заражение может происходить фекально-оральным или контактно-бытовым путем, через воду, пищу. Переносчиками могут быть мухи и тараканы.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
39	Без ротавируса	<p>Вирус кишечного гриппа размножается в клетках слизистой оболочки ЖКТ, что приводит к сильному поносу и обезвоживанию организма. Основной путь передачи – пищевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

40	Антивирус ЖКТ	<p>Энтеровирус и вирус Коксаки относятся к кишечной группе, способны поражать ЦНС, мышцы, сердце, кожные покровы, дыхательную и мочеполовую системы. Передаются от человека к человеку воздушно-капельным и бытовым путями. Волна инфекции приходится на теплое время года.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
41	Без трематод общая 1	<p>Трематоды, или сосальщики – паразитические плоские черви, поражающие печень, поджелудочную железу, кишечник, легкие, кровеносные сосуды, головной мозг. Пути заражения: купание в открытых водоемах стран Азии, Африки, Ю.Америки, употребление в пищу плохо приготовленной или сырой рыбы, моллюсков, ракообразных, мяса.</p> <p>Применение: программы используются совместно ежедневно в течение 2-х недель.</p>
42	Без трематод общая 2	
43	Стоп амеба	<p>Entamoeba histolytica – представитель простейших. Способна вызвать амёбную дизентерию, сопровождающуюся поражением толстой кишки, печени, легких и других органов. Попадает в организм с пищей и водой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
44	Без энтерококка	<p>Энтерококк – представитель нормальной микрофлоры человека. При использовании антибиотиков, нарушении барьерной функции кожи и слизистых, тяжелых заболеваниях и у возрастных людей энтерококк может вызвать проблемы в тонком кишечнике, мочевыводящих путях, влагалище, сердце, печени, коже.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
45	Нет нематод и аскарид, новая	<p>Новая программа для борьбы с круглыми паразитическими червями. Охватывает большинство видов нематод, поражающих организм человека и животных.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

46	Стоп аденовирус общая	<p>Аденовирусы — группа вирусов, вызывающая острые заболевания, с поражением органов дыхания, глаз, лимфатических узлов. Заражение происходит воздушно-капельным путем, чаще в холодное время года.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
47	Стоп коронавирус	<p>Вирус распространен в Европе, Азии, Северной Америке. Передается воздушно-капельным путем с поражением дыхательных путей, вплоть до разрушения легочных альвеол.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
48	Стоп пеницилл	<p>Род плесневых грибов, поражающих органы мочевыводящей и дыхательной систем, лимфатические узлы, кожу. Вызывают сильную интоксикацию, являются аллергенами.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
49	Без риккетсии	<p>Внутриклеточный паразит. Способен поражать любые органы человека, вызывать значительные нарушения ЦНС и расстройства кровообращения.</p> <p>Пути передачи: через укус клеща, пищу, контакты. Распространена в развивающихся странах.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
50	Без папиллом общая	<p>ВПЧ поражает кожные покровы и слизистые оболочки с образованием наростов. Некоторые способны вызвать злокачественные образования, в зоне риска женщины. Пути передачи данной инфекции: контактно-бытовой, половой, в родах от матери к ребенку.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
51	Без папиллом	<p>При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыделительной системы, возникают образования в почечных лоханках и мочевом пузыре. При длительном воздействии неблагоприятных факторов данные образования могут не только снизить функционал органов, но и способны к перерождению.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

52	Без трихомонады	<p>Трихомонада относится к простейшим, являющимся возбудителями многих половых заболеваний. Инфицирование происходит при любом виде полового контакта, а также посредством бытового контакта: ободок унитаза, бассейн, использование общих полотенец, мочалок, средств гигиены, примерка чужой одежды (нижнего белья). Попадая в кровяное русло могут маскироваться под клетки крови. Большая угроза, чаще всего, не в самом простейшем, а в переносимых им инфекционных агентах: хламидиях, кандиде, гонококках, цитомегаловирусе и вирусах герпеса.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
53	Без лептоспиры	<p>Бактерия, вызывающая поражение капилляров, печени, почек, мышц. Распространена во всех регионах. Заражение происходит от домашних и диких животных, через поврежденные слизистые и кожу, из природных водных источников.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
54	Без криптококка	<p>Дрожжевые грибы рода <i>Cryptococcus</i>, поражают ЦНС, легкие, кожу, слизистые. Возбудитель присутствует в почве, загрязненной птичьим пометом. Путь передачи воздушно-пылевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
55	Без токсоплазмы	<p>Распространенность заражения токсоплазмой в мире очень высока до 90 %. Нахождение в организме часто не доставляет ее обладателю проблем. Заражение происходит либо внутриутробно, либо приобретается. Токсоплазма поражает нервную систему, глаза, сердце, мышцы, легкие, кишечник, кожу.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
56	Без уреоплазмы	<p>Уреоплазма – патогенная форма, вызывающая заболевания органов мочеполовой сферы, суставов, патологии беременности и плода. Передача инфекционного агента происходит половым путем, внутриутробно и во время родов.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>

57	Без эхинококка	<p>Серьезную проблему представляют личинки цепня, которые образуют в организме кисты. Данные образования сдавливают окружающие ткани, что приводит к атрофии и отмиранию последних. Личинки поражают печень, легкие, почки, кости, мозг. Заражение происходит при контакте с инвазированными животными, при сборе ягод и трав, питье воды из зараженных источников. Так же в группе риска работники скотобоев, пастухи, кожевники.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
58	Без синегнойки	<p><i>Pseudomonas aeruginosa</i> — бактерия, характеризующаяся природной устойчивостью к большинству антимикробных препаратов. Поражает органы ЖКТ, дыхательной системы, ЦНС, других органов и систем. Источником являются люди и животные, больные и носители. Пути передачи: контактно-бытовой, воздушно-капельный, пищевой.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
59	Стоп клещи 1	<p>Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) — самая распространенная проблема, возникающая при укусе человека инфицированными иксодовыми клещами. Поражаются ЦНС, сердце, суставы.</p> <p>Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 2», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи».</p>
60	Стоп клещи 2	<p>Вирус клещевого энцефалита передается при укусах иксодовых клещей, реже через употребление сырого молока коров и коз, зараженных вирусом. Распространение: Сибирь, Дальний Восток, Урал. Основной орган поражения ЦНС.</p> <p>Применение: программу используют совместно со «Стоп клещи 1», после укусов ежедневно в течение 2-х недель. При проблемах, возникших вследствие укусов в предыдущее время см. комплекс «SOS Клещи»</p>

61	Без мутаций 1	Различные патогенные факторы способствуют накоплению в организме токсинов, способных вызвать перерождение клеток. Программы «Без мутаций 1 и 2» снижают риск возникновения онкологической патологии, способствуют коррекции предопухолевых изменений, уменьшают воспалительные процессы и усиливают иммунную защиту.
62	Без мутаций 2	Применение: программы используются совместно, см. комплекс «Защити себя».
63	Здоровые десны	Воспаление десен (гингивит) вызывают вирусы, бактерии, грибки. В группе риска могут быть люди, носящие зубные протезы и брекеты. Программа помогает снизить патогенную нагрузку, уменьшить воспалительный процесс, улучшить трофику тканей. Применение: ежедневно в течение 1-2 месяцев.
64	Обновление слизистой	Появление язвочек (афт) на слизистой полости рта свидетельствует о наличии воспалительного процесса, который может быть вызван вирусными или бактериальными агентами, травмой или нехваткой микроэлементов. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет. Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Желательно использовать совместно с программой «Рот в порядке».
65	Рот в порядке	Воспаление слизистой полости рта (стоматит) возникает при ряде факторов: наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Локализуется на языке, внутренней поверхности губ, щек, небе. Программа снимает воспалительный процесс, способствует восстановлению слизистой полости рта, укрепляет местный иммунитет. Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Можно сочетать с программой «Обновление слизистой» Использовать при любых стоматологических процедурах, сопровождающихся повреждением слизистой.

66	Без свища	<p>Нагноение десны очень часто сопровождается образованием свища. Это может быть чревато серьезными последствиями от потери зуба до воспаления глубоких тканей. Программа помогает предотвратить процесс нагноения, уменьшает воспалительный процесс.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Использовать после стоматологических процедур по лечению или удалению зубов.</p>
67	Стоп травма (зубы)	<p>Программа снижает болевые ощущения, ускоряет процесс заживления, снимает отечность.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-2 недель. Использовать сразу после стоматологических процедур по лечению, удалению, имплантации зубов.</p>
68	ЦНС без проблем	<p>Программа помогает улучшить работу нервной системы после воздействия различных факторов (инфекционных, травматических и др.). Способствует восстановлению нервных связей между ЦНС и периферической, снимает отечность и болевые ощущения.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно совместно с программой «Нервы в порядке» (см. комплекс «SOS Клещи»).</p>
69	Нервы в порядке	<p>При нарушении целостности нервного волокна могут происходить функциональные нарушения работы нервной системы. Программа препятствует разрушению миелиновой оболочки нервных волокон, тем самым сохраняет проводимость нервного волокна.</p> <p>Применение: в течение 1-6 месяцев ежедневно. Желательно с программой «ЦНС без проблем» (см. комплекс «SOS Клещи»).</p>
70	Чистые пазухи	<p>Воспаление слизистой оболочки одной или нескольких придаточных пазух носа — синусит. Может возникнуть как осложнение при инфекционных заболеваниях носа и дыхательных путей, а также после травм лицевой области.</p>

70	Чистые пазухи	<p>Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, лучшему отхождению слизи, снижению болевых ощущений при острых процессах.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
71	Чистые пазухи общая	<p>Наибольшую проблему для многих людей представляет хронический синусит, который протекает без явных проявлений, но достаточно долго. Причинами могут являться инфекции верхних дыхательных путей, наличие полипов, искривление носовой перегородки, кариозные зубы. Программа способствует уменьшению воспалительного процесса в области пазух, уменьшению отечности, предотвращает обострения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение месяца при наличии проблемы. И в целях предотвращения обострения в сезон простуд.</p>
72	Уши без воспаления	<p>Причинами воспаления ушей могут являться: патологический процесс в области носоглотки, искривление носовой перегородки, травмы уха. Программа способствует уменьшению отечности, снижению воспаления и болевых ощущений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Здоровые уши».</p>
73	Горло без боли	<p>Воспаление миндалин глоточного кольца часто наблюдается после перенесенных ангин или других инфекционных заболеваний глотки. Может протекать в острой или хронической форме. Передача внешне — воздушно-капельным путем, или внутренне — из внутренних очагов хронической инфекции. Программа помогает уменьшить воспаление миндалин, отечность, болевые ощущения и токсическую нагрузку.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. Чередовать с программой DeVita Ritm «Горло без проблем».</p>

74	Стоп простуда общая	<p>Воспаление слизистых оболочек носоглотки (назофарингит) имеет инфекционную природу, вирусную или бактериальную. Наибольшая частота наблюдается в межсезонье. Программа уменьшает воспаление, отечность, предупреждает развитие обострений.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
75	Антивоспаление общая	<p>Воспаление — реакция организма, возникающая в ответ на повреждение или действие патогенного агента. Программа помогает организму ликвидировать очаг воспаления, где бы он не локализовался, снизить влияние патогенных факторов, а также в восстановить гомеостаз.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>
76	Стоп мигрень	<p>Мигрень – одна из наиболее частых разновидностей головной боли. Характеризуется острой пульсирующей болью, локализующейся в определенной части головы. Программа снимает спазмы сосудов, уменьшает болевые ощущения, способствует нормализации кровообращения в области головы.</p> <p>Применение: по необходимости.</p>
77	Антисептик	<p>Повреждения кожного покрова: царапины, порезы, ожоги и др. являются открытыми воротами для инфекционных агентов. В результате чего ранки могут долго не заживать, воспаляться, болеть. Программа способствует обеззараживанию ранки, уменьшению воспаления и быстрому ее затягиванию.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-4 недель. Целесообразно совмещать с любыми другими программами с целью снижения воспалительного процесса.</p>

78	Желчь без застоя	<p>Неправильное и нерегулярное питание (длительное голодание, употребление алкоголя, пряностей, чрезмерно острых жирных и пережаренных блюд, сэнзов, отказ от употребления растительного масла), стрессы, малое количество выпиваемой жидкости, инфекционные поражения печени — причины возникновения проблем в работе желчного пузыря. Программа облегчает отток желчи, способствует восстановлению работы желчного пузыря, уменьшает болевые ощущения.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 1-6 месяцев, желательно в вечернее время. Иначе, через день.</p>
79	Без кашля	<p>Кашель — защитная рефлекторная реакция организма, возникающая при раздражении слизистой дыхательных путей. Может являться признаком воспаления органов дыхательной системы, которое вызывается патогенными вирусами, бактериями, грибами и др. агентами, а также попаданием аллергенов. Программа облегчает состояние при наличии острого или хронического кашля, уменьшает воспаление слизистой дыхательных путей.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель.</p>
80	Стоп пневмобактерии	<p>По данным медиков, первое место среди причин воспаления нижних дыхательных путей занимают микробные инфекции. Большинство бактерий, поражающих органы дыхания, являются сопутствующей флорой, но при неблагоприятных условиях они становятся патогенными. Программа борется с такими микроорганизмами как: <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> и др.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель.</p>
81	Стоп коронавируса new	<p>Новая улучшенная и расширенная программа, позволяющая бороться со всеми видами коронавируса, в том числе, с новыми мутировавшими формами.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-х недель. С целью предупреждения заболевания 2-3 раза в неделю.</p>

82	Без пневмонии	<p>Воспаление легочной ткани может быть вызвано патогенной флорой различных форм: вирусной, бактериальной, грибковой и др. Возникает оно не только как самостоятельная форма, но и как следствие имеющейся простуды, сниженного иммунитета, недостатка витаминов. Программа снимает отечность и воспаление нижних отделов дыхательной системы, улучшает функционал и энергетику данных органов, повышает местный иммунитет.</p> <p>Применение: ежедневно в течение 2-4 недель. Желательно сочетать с программой «Без кашля».</p>
----	---------------	---

Приложение 3 – «Пояснения к использованию программ DeVita Ritm».

DeVita Ritm (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Активная защита	При физических и психологических нагрузках, снижении работоспособности, внимательности, тонуса, при хронической усталости и раздражительности, при ежедневной работе с бытовой и компьютерной техникой. Для снятия биоэнергетической нагрузки при работе с людьми.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый	В течение часа	1 месяц
Кровообращение регуляция	Нарушение микроциркуляции крови (кровоснабжение органов), недостаток кислорода в крови, головные боли, нарушение артериального давления, тонуса сосудистой стенки.	Снимающий спазмы Поддерживающий тонус Сосудорасширяющий Нормализующий АД	В течение часа	1 месяц
Пищеварение	Переедание, тяжесть в желудке, изжога, вздутие.	Снимающий спазмы Противовоспалительный Кислотонормализующий	В течение часа	1 месяц

Детоксикация	Высокие физические нагрузки, неправильное питание, отравление, боли в правом подреберье, употребление алкоголя.	Антитоксический Защищающий печень Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы	В течение часа	1 месяц
Антистресс	Стрессы, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
7 чакр	Хроническая усталость, головные боли, снижение иммунитета, высокие физические и психологические нагрузки.	Тонизирующий Гормонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1 месяц
Гормоны в норме	При нарушениях полового созревания у подростков с 12-и лет, после проведенных оперативных вмешательств, при гормональных сбоях, при дисфункции репродуктивной системы у мужчин и женщин.	Нормализующий гормональный фон	В течение месяца	6 месяцев
Чистые почки	Воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре, отечность.	Улучшающий вывод мочи Противоотечный Противовоспалительный	В течение дня	1-2 месяца

Чистая лимфа	Нарушение работы лимфатической системы, отечность, интоксикация, нарушение клеточного метаболизма, нарушение артериального давления, снижение иммунитета, кожные заболевания.	Лимфодренажный Противоотечный Антиоксидантный Иммуностимулирующий	В течение дня	1 месяц
Здоровое зрение	Снижение тонуса мышц глаз, нарушения зрения, зрительное утомление. Предупреждение нарушения зрения при длительной работе с компьютерной техникой или текстами на бумажных носителях.	Корректирующий Тонизирующий Укрепляющий	В течение дня	1-3 месяца
Женская сексуальность	Снижение либидо, повышенная эмоциональная возбудимость, склонность к нервным перевозбуждениям.	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1 - 2 месяца
Мужская сексуальность	Повышенные стрессовые нагрузки, возбудимость нервной системы, снижение потенции, боязнь «неудачи».	Антидепрессивный Активизирующий	2-3 дня	1 - 2 месяца
Стоп травмы	Любые травмы костей, хрящевой и мягких тканей, связочного аппарата: переломы, ушибы, вывихи, порезы. После оперативных вмешательств.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Регенерирующий	В течение часа	1 месяц

Предтреник	Используется до физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий	В течение часа	1 месяц
Тренировка	Используется во время физических нагрузок.	Тонизирующий Энергодающий Регулирующий	В течение часа	1 месяц
Здоровое сердце	Расстройство функциональной деятельности сердца, нарушение ритма сердца, нарушение артериального давления, высокие стрессовые нагрузки.	Снимающий спазмы Нормализующий АД Тонизирующий Обезболивающий	В течение часа	1-2 месяца
Сердечный ритм в норме	Нарушения ритма сердца: тахикардия, аритмия, в том числе дыхательная и мерцательная.	Снимающий спазмы Нормализующий ритм	В течение часа	1-2 месяца
Антипростуда	Заболевания верхних дыхательных путей. Аллергия, сопровождающаяся отеком носоглотки, слезоточивостью.	Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилзирующий	В течение часа	В течение месяца
Дыши легко	Заболевания нижних отделов дыхательной системы. Аллергия. Спазмы бронхолегочной системы различного происхождения.	Противовоспалительный Снимающий спазмы Сосудорасширяющий	В течение часа	1 месяц

Женское здоровье	Дисфункция и воспалительные процессы репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омолаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Мужское здоровье	Предупреждение дисфункций репродуктивной системы.	Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омолаживающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Здоровый сон	Бессонница, нарушение фаз сна, повышенная нервная возбудимость.	Антидепрессивный Успокаивающий Нормализующий сон	В течение дня	1 месяц
Хорошее настроение	Депрессия, раздражительность, психоэмоциональные нагрузки, утомляемость.	Антидепрессивный Регулирующий настроение	В течение дня	1 месяц
Суставы без боли	Воспаления и болевые ощущения опорно-двигательного аппарата (суставы, мышцы, позвоночник), высокие физические нагрузки, в том числе занятия спортом.	Обезболивающий Регулирующий	В течение дня	1 месяц

Суставы без воспаления	Воспаления опорно-двигательного аппарата, отеки, травмы, при высоких физических нагрузках, в том числе занятиях спортом.	Противовоспалительный Противоотечный Регулирующий	В течение дня	1 месяц
Кишечник без проблем	Боль, тошнота, вздутие, дисбактериоз, сниженный тонус кишечника, желчного пузыря, нарушение слизистой желудка и 12-и перстной кишки, работы печени.	Снимающий спазмы Обезболивающий Улучшающий отток желчи Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный	В течение дня	6-12 месяцев
Обмен веществ в норме	Дисфункции щитовидной и поджелудочной желез, расстройства ЖКТ, отечность, нарушение усвоения К, Са, Mg, Na, кислотно-щелочного равновесия.	Регулирующий Гармонизирующий	5-7 дней	6-12 месяцев
Красивая кожа	Снижение барьерной функции кожи и клеточного метаболизма. Акне, сухость или излишняя жирность кожи, облегчение состояния при псориазе и витилиго.	Регулирующий иммунную и барьерную функции кожи Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц
Красивые волосы и ногти	Выпадение и ломкость волос, расслоение ногтей. Сухая и жирная себорея.	Регулирующий функцию кожных желез Нормализующий питание клеток	5-7 дней	1 месяц

Без аллергенов	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), отечность верхних дыхательных путей.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	В течение дня	1-2 месяца
Иммунная защита	При снижении иммунной защиты, повышенных физических и умственных нагрузках.	Иммуностабилизирующий Противовоспалительный	В течение месяца	Месяц
Здоровые почки	При нарушении обменных процессов, связанных с выводом некоторых кислот и солей, нарушении функциональной активности почек (образование камней в почках, отложение солей в суставах, повышенное артериальное давление).	Улучшающий вывод мочи Противоотечный	В течение дня	1-2 месяца
Клеточное дыхание	При головных болях, проблемах с сосудами головы, вялости, сонливости, недостатке кислорода в крови, малоподвижном образе жизни. Для жителей крупных городов.	Снимающий спазмы Сосудорасширяющий Нормализующий Насыщающий кислородом	В течение дня	1-2 месяца
Вегетативное равновесие	При выполнении тяжелой работы, психологическом стрессе, нарушении баланса ВНС.	Регулирующий	В течение дня	1-2 месяца

Антивари- коз	Снижение тонуса венозной стенки, застой в венах нижних конечностей	Противовос- палительный, Обезболива- ющий	В течение часа	1-2 месяца
Голова без боли	При спазмах сосудов головного мозга, напряженной умственной работе, нестабильности артериального давления, нарушении микроциркуляции крови в области головы.	Обезболива- ющий Снимающий спазмы	В течение часа	1-2 месяца
Сахар в норме	При дисфункции под- желудочной железы, связанной с увеличе- нием концентрации сахара в крови.	Регулирую- щий Нормализую- щий	В течение дня	6-12 меся- цев
Здоровые суставы	Воспалительные изме- нения оболочки суста- вов и околосуставных тканей, переохлаж- дение. Физическая перегрузка суставов профессионального, бытового или спор- тивного характера. Травмы суставов.	Противовос- палительный, Обезболива- ющий	В течение часа	3-6 меся- цев
Без про- статита	При дисфункции пред- стательной железы, снижении функцио- нальной активности яичек, нарушении мочеиспускания. При нерегулярных половых связях.	Противовос- палительный Регулирую- щий функцию	2-3 дня	6-12 меся- цев

После тренировки	В посттренировочный период. Для снятия общего дискомфорта, головных болей, вялости, сонливости, раздражительности, уменьшения концентрации молочной кислоты, нормализации дыхательных процессов.	Регулирующий Восстанавливающий энергию, Снимающий спазмы, Антиоксидантный	В течение часа	1 месяц
Оперативная память+	При снижении скорости запоминания, концентрации внимания, длительности хранения информации.	Стимулирующий	5-7 дней	1 месяц
Нервное равновесие	Стрессы, раздражительность, эмоциональная нестабильность, высокие физические и психологические нагрузки (учеба, работа, спорт)	Антистрессовый Успокаивающий	В течение часа	1 месяц
Нервная система общая	При выявленных функциональных проблемах нервной системы, нарушении целостности ткани и связи между отделами ЦНС, приводящих к нарушению психологической устойчивости.	Противовоспалительный, Регенерирующий, Регулирующий, Антистрессовый	В течение месяца	3-4 месяца
Здоровые уши	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепада давления. Также при снижении слуха.	Регулирующий, Снимающий спазмы, Противовоспалительный, Обезболивающий	В течение дня	1 месяц

Горло без проблем	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный, Обезболивающих, Противоотечный	1-2 дня	В течение месяца
Крепкие зубы	При кровоточивости, рыхлости десен, нарушении целостности слизистых (бытовые микротравмы, стоматологические процедуры)	Противовоспалительный, Регенерирующий, Нормализующий микроциркуляцию	5-7 дней	В течение месяца
Поджелудочная в норме	При нарушении внешне секреторной (пищеварительной) или внутри секреторной (эндокринной) функций железы.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев
Здоровая щитовидка	При нарушении обменных процессов, связанных с функциональным дисбалансом железы.	Нормализующий, Регулирующий, Противовоспалительный	1 месяц	6 - 12 месяцев

DeVita Ritm (автоматические программы)

Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Здоровый день автомат	Улучшает кровоснабжение органов и тканей, активизирует работу выделительных систем, способствует улучшению обмена веществ, правильному распределению энергетического баланса, снимет нервное напряжение, усиливает защитные функции организма.	Иммуностабилизирующий Энергодающий Антистрессовый Антитоксический Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц
Здоровье автомат	Корректирует состояние иммунной системы при простудных вирусных заболеваниях, улучшает клеточный метаболизм, что способствует более быстрому очищению от токсинов. А также помогает восстановить нарушенную в процессе болезни работу систем и органов.	Противовоспалительный Иммуностабилизирующий Снимающий спазмы Противоотечный	5-7 дней	1 месяц
Полное очищение автомат	Активизирует работу выделительных систем, выводит токсины, повышает адаптационные резервы и защитные силы организма. Учтена суточная биологическая активность органов.	Энергодающий Антитоксический Противоотечный Нормализующий гормональный фон	5-7 дней	1 месяц

<p>Высокий тонус автомат</p>	<p>Способствует снятию токсической нагрузки с печени, почек и лимфатической системы, активизирует их работу, улучшает кровообращение. Запускает естественные процессы омоложения.</p>	<p>Противовоспалительный, Улучшающий вывод мочи, Противоотечный, Иммуностабилзирующий</p>	<p>В течение месяца</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Здоровый метаболизм автомат</p>	<p>Гармонизирует работу организма, регулирует деятельность вегетативной нервной системы, стабилизирует аппетит, активизирует работу органов пищеварения и выделения. Способствует нормализации обменных процессов и психоэмоционального состояния, снижению массы тела и улучшению качества жизни.</p>	<p>Противовоспалительный Нормализующий моторику Противоотечный, Регулирующий аппетит</p>	<p>В течение месяца</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Без отравлений автомат</p>	<p>Уменьшает вредное воздействие на организм токсинов (пищевых, медикаментозных, алкогольных). Помогает нейтрализовать и скорее вывести их из кишечника и печени, снижая нагрузку на эти органы</p>	<p>Антитоксический Защищающий печен Улучшающий отток желчи Снимающий спазмы</p>	<p>В течение дня</p>	<p>5-7 дней</p>

<p>Давление в норме автомат</p>	<p>Снимает спазм сосудов, нормализует давление. Восстанавливает работу сердца и почек, нормализуя клеточный метаболизм, снижая гипоксию и освобождая от токсинов. Улучшает кровоснабжение органов, способствует снижению отечности.</p>	<p>Нормализующий АД Снимающий спазмы Улучшающий вывод мочи</p>	<p>В течение дня</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Здоровый сон автомат</p>	<p>Снимает психологическую нагрузку, расслабляет центральную нервную систему, улучшает качество и продолжительность сна.</p>	<p>Антистрессовый Успокаивающий</p>	<p>В течение 1-2 часов</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Здоровые суставы автомат</p>	<p>Снимает воспаление и боль в суставах и позвоночнике. Улучшает их кровоснабжение и питание. Способствует восстановлению поврежденных тканей суставов, в том числе, суставных хрящей и синовиальной оболочки, а также окружающих тканей: связок, сухожилий и мышц. Эффективна при любых проблемах с суставами: артриты, артрозы, тугоподвижность.</p>	<p>Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный Регулирующий Поддерживающий функцию</p>	<p>В течение дня</p>	<p>3-6 месяцев</p>

<p>Суставы без боли автомат</p>	<p>Расслабляет напряженные мышцы, улучшает состояние связочного аппарата, активизирует кровообращение, уменьшает боль и воспаление в суставах и позвоночнике. Эффективна при активной нагрузке на опорно-двигательный аппарат, травмах.</p>	<p>Противовоспалительный Противоотечный, Обезболивающий</p>	<p>В течение 2-3 часов</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Здоровье кожи и волос автомат</p>	<p>Улучшает кровоснабжение кожи, корректирует работу сальных и потовых желез, что усиливает кожный иммунитет и уменьшает проявление бактериальных и грибковых поражений. А также улучшает кровообращение в капиллярах волосяных фолликул и ложа ногтевых пластин, способствуя усиленному питанию волос и ногтей.</p>	<p>Регулирующий иммунную и барьерную функции кожи, функцию желез Нормализующий питание клеток</p>	<p>5-7 дней</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Без простуды автомат</p>	<p>Применяется во время простудных заболеваний и аллергических реакциях (поллиноз). Снимает воспаление и уменьшает респираторное проявление простуды и аллергии: отечность, заложенность носа, кашель.</p>	<p>Противовоспалительный Противоотечный Иммуностабилзирующий Снимающий спазмы</p>	<p>1-2 часа</p>	<p>1 месяц</p>

<p>Мужское здоровье автомат</p>	<p>Способствует нормализации работы предстательной железы, общему оздоровлению мочеполовой системы у мужчин, повышает активность и сексуальную выносливость. Также помогает предотвратить появление проблем, связанных с нарушением функции органов МПС.</p>	<p>Противовоспалительный Сосудорасширяющий Гормононормализующий Омолаживающий</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Стоп подагра автомат</p>	<p>Нормализует обмен веществ в организме, регулирует баланс К, Са, Na, Р. Снимает воспаления в суставах, уменьшает отечность, способствует выводу солей и токсинов. Улучшает функциональное состояние почек.</p>	<p>Противовоспалительный, Обезболивающий, Противоотечный, Улучшающий вывод мочи, Регулирующий солевой обмен</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>3-6 месяцев</p>

Приложение 4 – «Пояснения к использованию программ DeVita AP».

DeVita AP (ручные программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Нет стафилококкам	Гнойные инфекции ран, заражение, гнойно-воспалительные заболевания разных органов (верхних дыхательных путей, горла, кожных покровов, опорно-двигательного аппарата, наружных половых органов, мочевыделительной системы, оболочек головного мозга, пищевая токсикоинфекция). Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней
Нет стрептококкам	Заболевания уха, горла, носа, воспалительные процессы опорно-двигательного аппарата, сердца, почек, кожных покровов. Предотвращение заражения плода во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	2-3 часа	10-14 дней

Нет хламидиям	Инфекции мочеполовой системы, суставов, глаз, верхних и нижних дыхательных путей, а также сердечно-сосудистой системы. Предупреждение профессиональных заболеваний у лиц, работающих с птицами. А также предотвращение заражения через водоемы при купании и передачи инфекции плоду во время беременности.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	10-14 дней
Нет хеликобактеру	Воспаления желудка, двенадцатиперстной кишки, повреждение слизистых этих органов.	Антибактериальный Противовоспалительный	5-7 дней	3-5 недель
Стоп бактерии	Проблемы, вызываемые клебсиеллой: воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Проблемы, вызываемые листерией: воспаление органов ЖКТ, мозговых оболочек, суставов, органов дыхания. В целях предупреждения профессиональных заболеваний людей занимающихся животноводством, птицеводством, первичной обработкой мяса и шкур.	Антибактериальный Противовоспалительный	В течение дня	14-21 день

Стоп бактерии	Проблемы, вызываемые пневмококком: воспаление дыхательных путей, ушей, суставов, мозговых оболочек, заражение крови.	Антибактериальный Противовоспалительный	В течение дня	14-21 день
Без гепатита А	Предупреждение заболевания вирусом при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 недели	6 месяцев
Без токсинов	Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных).	Антитоксический Энергосберегающий	1-2 часа	1 месяц
Стоп герпес зостер	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес симплекс	Генитальный герпес и герпес губ	Противовирусный Противовоспалительный	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес	Как дополнение к любой из противогерпетических программ для сокращения сроков выздоровления и уменьшения воспалительных и болевых проявлений.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный	В течение дня	1 месяц

Здоровая лимфа	Нарушения в работе лимфатической системы проявляющиеся следующими признаками: опухшие пальцы и склонность к отекам, хроническая усталость, запор, обесцвеченная кожа на ногах, боль в груди и отеки, сухая раздраженная кожа, невозможность сконцентрироваться, холодные руки и ноги, целлюлит.	Противовоспалительный Противоотечный Антиоксидантный	В течение дня	1 месяц
Антипростуда	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противовирусный Противовоспалительный Противоотечный	2-3 часа	5-7 дней
Стоп плесень и грибки	Поражения кожи, подкожно-жировой клетчатки, слизистых оболочек, зрительного и слухового аппаратов, костей, суставов, а также внутренних органов (бронхолегочной системы, печени, селезёнки, сердца, сосудов, ЖКТ, почек, ЦНС), аллергические реакции в виде кашля, заложенности носа, кожных высыпаниях.	Противомикотический Противовоспалительный	1-2 дня	2 месяца

Стоп плесень и грибки	Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, при длительном нахождении во влажных помещениях.	Противомикотический Противовоспалительный	1-2 дня	2 месяца
Стоп кандиды	Заболевания слизистых оболочек внутренних органов, кожи, сопровождающиеся высыпаниями, дисбактериозом, ощущением жжения в половых органах.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без грибка	Поражение кожи, волос, ногтей, слизистых оболочек внутренних органов грибками рода: трихофитон, микроспорум, мукор. Эффективна в целях предупреждения заражения грибковыми инфекциями после посещения сауны, бассейна, пляжа, общения с зараженным человеком.	Противомикотический Противовоспалительный Противозудный	2-3 дня	3-6 месяцев
Нет простейшим	Воспалительные процессы органов ЖКТ, вызванные рядом простейших: лямблии, амёбы и др. Предотвращение заражения через водоемы при купании.	Противопаразитарный Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц

<p>Интимное здоровье</p>	<p>Заболевания слизистой дыхательных путей, мочеполовой сферы, вызванные такими возбудителями как: уреаплазма, микоплазма, токсоплазма. Предупреждение передачи инфекций плоду, половому партнеру.</p>	<p>Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Без шистосом и трематод</p>	<p>Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным, а также шистосомами.</p>	<p>Антипаразитарный</p>	<p>1-5 дней</p>	<p>1-2 месяца</p>
<p>Нет нематод и аскарид</p>	<p>Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.</p>	<p>Антипаразитарный</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>1-2 месяца</p>

Стоп паразиты общая	Подавление жизненной активности различных видов паразитов. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Стоп паразиты ЖКТ	Паразиты печени и поджелудочной железы, 12-и перстной кишки. Используется в сочетании с другими программами по уничтожению гельминтов.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Антигрипп	Программа направлена на уничтожение различных штаммов вирусов гриппа (А, В, С).	Противовирусный	2-3 часа	5-10 дней
Стоп грипп базовая	Мутировавшие формы гриппа, высокая температура, боль.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный	1-2 часа	5-10 дней
ЖКТ в порядке	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией, кишечной палочкой.	Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику	2-3 часа	5-7 дней

<p>Помощь при отравлениях</p>	<p>Поможет нормализовать состояние при энтеровирусной инфекции и заражении сальмонеллой.</p>	<p>Антибактериальный Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки Нормализующий моторику Антитоксический</p>	<p>2-3 часа</p>	<p>10 дней</p>
<p>Антивирус</p>	<p>Снижение общей вирусной нагрузки, цитомегаловирусной инфекции, протекающей в форме упорной простуды с головными и суставными болями, воспалением слюнных желез. Инфекции верхних дыхательных путей, лимфоидной ткани, печени, селезенки, вызываемые вирусом Эпштейна-Барр. Эффективна при переохлаждении.</p>	<p>Противовирусный Противовоспалительный</p>	<p>2-3 часа</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Дренаж общая</p>	<p>Обязательная программа при любых токсических нагрузках (вирусных, бактериальных, протозойных, микотических, паразитарных).</p>	<p>Антисептический Антитоксический Лимфодренажный</p>	<p>В течение дня</p>	<p>1 месяц</p>

Дренаж антитоксический	При химических нагрузках тканевого сектора солями тяжелых металлов, радионуклидами, пищевыми токсинами.	Антитоксический Лимфодренажный	1-2 дня	14-21 день
Мексиканка детокс	После оперативных вмешательств, при хронической и лекарственной интоксикаций.	Лимфодренажный Противоотечный Антитоксический Стабилизирующий Регулирующий	6-7 дней	1 месяц
Нет аллергии	Различные виды аллергии (респираторная — запахи, пыль, домашние животные, поллиноз, кожная, пищевая), стабилизация иммунной системы.	Антитоксический Противоаллергический Противоотечный Противовоспалительный Иммуностабилизирующий	1-2 дня	4-6 месяцев
Управление весом	При наличии лишнего веса, нарушении аппетита, уничтожает одну из причин ожирения – аденовирус Ad-36	Противовирусный Антитоксический	2-4 недели	4-6 месяцев
Стоп клещи 1	При свежих укусах клещей. Программы используются в паре. Если укусы были ранее, необходимо пройти курс по комплексу «SOS! Клещи!».	Антибактериальный Противовирусный	1-2 дня	14-28 дней
Стоп клещи 2				

Стоп простуда общая	Заболевания носа, горла, бронхов. Совместно с программами: «Стоп стафилококки», «Стоп стрептококки», «Стоп бактерии».	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1 месяц
Антивоспаление общая	При любых воспалительных процессах в организме.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	1-2 месяца
Антисептик	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Антисептический Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-21 день
Антивирус ЖКТ	Предупреждение заболевания вирусом коксаки при посещении стран Азии и Африки, снижение риска осложнений. О наличии вируса могут говорить следующие признаки: обезвоживание, боль в горле, наличие пузырьковой сыпи на коже.	Противовирусный Защищающий клетки Нормализующий моторику	1-2 дня	14-21 день

Чистые пазухи	При острых воспалениях слизистой носа и пазух (синусит, гайморит и др.) Совместно с противовирусными и антибактериальными программами.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день
Чистые пазухи общая	При хронических проблемах со слизистой носа и пазух. Как одно из средств предупреждения острого процесса в верхних дыхательных путях при простудных заболеваниях.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий Стабилизирующий	1-2 дня	14 дней
ЦНС без проблем	При негативном расстройстве нервной системы, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.).	Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки Восстанавливающий	2-3 дня	6-12 месяцев
Уши без воспаления	При болях и неприятных ощущениях в области уха, возникающих вследствие попадания инфекционных агентов, воды, перепаде давления.	Противоотечный Противовоспалительный Обезболивающий	1-2 дня	14-21 день

Желчь без застоя	При нарушении своевременного и равномерного отделения желчи в кишечник, что может быть следствием нерегулярного питания, потребления вредных продуктов, избыточным потреблением жиров, медикаментов, наличием паразитозов.	Противовоспалительный Обезболивающий Желчегонный	2-3 часа	1-4 месяца
Без мутаций 1	Для предупреждения развития клеточных мутаций, снижения негативного воздействия окружающей среды и токсической нагрузки. Особое внимание следует уделить тем, кто проживает в неблагоприятных экологических районах, испытывает большое эмоциональное напряжение и влияние негативных производственных факторов. Программы целесообразно использовать в комплексе «Защити себя».	Противовирусный Противовоспалительный Защищающий клетки	3-4 дня	6-12 месяцев
Без мутаций 2				
Здоровые десны	При наличии зубных протезов, брекетов, коронок, а также инфекциях полости рта, вызывающих воспаление десен.	Противовоспалительный Обезболивающий Антитоксический Улучшающий трофику	2-3 часа	1 месяц

Рот в порядке	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Обновление слизистой».	Противовирусный Противовоспалительный Обезболивающий Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Стоп травма (зубы)	После любых стоматологических вмешательств (лечение, удаление, протезирование, чистка и др). Для более эффективного воздействия рекомендуется использовать в комплексе с другими программами (см. комплек «Здоровые зубы»).	Обезболивающий Противоотечный Ускоряющий регенерацию	2-3 часа	7-14 дней
Обновление слизистой	При воспалении слизистой полости рта (язвочки, повреждение слизистой), возникающем при наличии инфекционных агентов, повреждениях полости рта, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании. Лучший эффект в сочетании с программой «Рот в порядке».	Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию Иммуностабилизирующий	1-2 дня	1 месяц

Без свища	После стоматологических вмешательств (удаление, лечение), при наличии отечности десны, болезненности.	Противовоспалительный Противоотечный Антитоксический	1-2 дня	7-14 дней
Стоп аденовирус общая	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, глаз, кишечника.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день
Нервы в порядке	При нарушении целостности нервного волокна, вызванном укусами клещей или другими факторами (инфекцией, стрессом, травмой и др.).	Противовоспалительный Защищающий клетки	2-3 дня	6-12 месяцев
Стоп амеба	Поможет нормализовать состояние при дизентерии, гастроэнтерите, кишечных язвах, вызванное присутствием простейшего. Рекомендуется использовать для предотвращения заражения при посещении тропических и субтропических стран Азии, Африки, Ю. Америки.	Противопротозойный Противовоспалительный Нормализующий моторику	2-3 дня	2-3 дня
Стоп коронавирус	При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких.	Противовирусный Противовоспалительный	1-2 дня	14-21 день

Без клембиселлы	Воспаление органов дыхания, мочевыводящих путей, мозговых оболочек, глаз, кишечные инфекции, заражение крови. Рекомендуется в качестве дополнения при вирусной нагрузке, нарушении питания, также лицам со сниженным иммунитетом, лицам страдающим алкоголизмом, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, печени.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Стоп мигрень	При головных болях различного происхождения.	Обезболивающий Спазмолитический Нормализующий кровообращение	В течение дня	1 месяц
Стоп пеницилл	Для снижения токсикоинфекции при использовании пораженных грибом продуктов, при хронических заболеваниях дыхательных путей, почек, аллергической реакции на пеницилл.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Горло без боли	При болях и отечности в области горла, носоглотки, ощущении заложенности, охриплости или потере голоса, возникающих вследствие воспалительного процесса.	Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	14-21 день

<p>Без кампилобактер</p>	<p>В качестве дополнительного метода для предотвращения заражения и развития диареи лицам, работающим в животноводческих и птицеводческих хозяйствах, а также туристам, посещающим развивающиеся страны, людям употребляющим загрязненные мясные продукты, молоко, воду.</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>14-28 дней</p>
<p>Без клостридий</p>	<p>При повреждении целостности кожного покрова с загрязнением (порезы, укусы, другие травмы). При использовании в пищу просроченных или сомнительных продуктов, консервов и т. д. Чередовать с программой «Без токсинов» циклично в течение дня. Обязательно обращение к врачу!</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>14-28 дней</p>
<p>Без криптококка</p>	<p>В качестве одного из методов предупреждения заболевания лицам, работающим в птицеводческих хозяйствах, занимающихся разведением птиц в квартире или собственном хозяйстве.</p>	<p>Противомикотический Противовоспалительный</p>	<p>2-3 дня</p>	<p>1 месяц</p>

Без криптококка	Особое внимание людям со сниженным иммунитетом и хроническими заболеваниями легких, находящимся в местах скопления птиц.	Противомикотический Противовоспалительный	2-3 дня	1 месяц
Без энтерококка	При частом и болезненном мочеиспускании, боли при дефекации, снижении потенции, повышенной утомляемости, депрессии, гастрите, дисбактериозе, пищевом отравлении.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без эхинококка	Для предупреждения глистной инвазии и поражения внутренних органов лицам, разводящих животных, скот, занимающихся сбором ягод, фруктов, овощей, охотой. Особенно проживающих в Южной Америке и Европе, Северной Африке, Новой Зеландии, Австралии, в России в районах: Поволжья, Западной Сибири, Краснодарского края, на Дальнем Востоке.	Антипаразитарный	2-3 дня	1-2 месяца
Без лептоспиры	При желтухе, водяной лихорадке, как профессиональных заболевании скотоводов и работников сельского хозяйства.	Антибактериальный Противовоспалительный	1-2 дня	14-28 дней

Нет нематод и аскаридозная	Заражение круглыми червями, такими как аскариды, острицы и др. Вызывающие снижение веса, шелушение кожи, высыпания, выпадение волос, непроходимость кишечника, воспаления дыхательных путей, печени и поджелудочной железы. Усиленная, расширенная программа борется с паразитами на разных стадиях жизненного цикла.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Без папиллом	При поражении ВПЧ слизистой поверхности мочевыделительной системы (почечных лоханок и мочевого пузыря).	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц
Без папиллом общая	При поражении кожи и слизистых оболочек, вызванном вирусом папилломы человека. Желательно использовать с комплексом «Чистая кожа».	Противовирусный Защищающий клетки	2-3 дня	1 месяц
Без протея	При гастрите, диарее, боли в животе, рвоте, обострении дерматита, аллергии, проблемах в работе мочеполовой системы, долго незаживающих ранах.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней

Без синегнойки	При локальных гнойно-воспалительных процессах в мягких тканях, органах слуха, легких, суставов и др. Также лицам, находящимся длительное время в условиях стационара.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без рикетсии	При укусах клещей особенно в странах Азии и Австралии, сыпном тифе, клещевых лихорадках и др.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней
Без ротавируса	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при дисбактериозе, вызванном ротавирусной инфекцией.	Противовирусный Защищающий клетки	1-2 дня	14-21 день
Без сальмонеллы	Поможет нормализовать состояние при токсикоинфекции, появившейся в результате употребления в пищу продуктов с патогенными микроорганизмами.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	1-2 дня	14-28 дней
Без шигеллы	Поможет нормализовать состояние и остановить обезвоживание при диарее, вызванной присутствием данной бактерии.	Антибактериальный Противовоспалительный Защищающий клетки	1-2 дня	14-28 дней

Без токсоплазмы	При паразитарной инвазии, вызванной внутриклеточным простейшим и сопровождающейся развитием воспалительного процесса в лимфоузлах, печени, мозге, легких, сердце, мышцах и др.	Противопро- тозойный Противовос- палительный	2-3 дня	1 месяц
Без трематод общая 1	Поражение печени, поджелудочной железы, легких, кровеносной и мочеполовой систем, токсико-аллергические реакции, вызванные рядом сосальщиков: кошачьим, печеночным, легочным, ланцетовидным и др. Программы используются совместно друг с другом.	Антипарази- тарный Защищающий клетки Антитоксиче- ский	2-3 дня	1-2 месяца
Без трематод общая 2				
Без трихомонады	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, болевых ощущениях во время полового акта, зуде и жжении, выделениях и неприятном запахе.	Противопро- тозойный Противовос- палительный	2-3 дня	1 месяц
Без уреоплазмы	При воспалительных процессах мочеполовой сферы, нарушениях репродуктивной функции, болях внизу живота, учащенном и болезненном мочеиспускании.	Противопро- тозойный Противовос- палительный	2-3 дня	1 месяц

<p>Без иерсинии</p>	<p>При токсико-аллергической реакции, возникающей при несоблюдении гигиенических мер и сопровождающейся кожными высыпаниями, нарушением работы ЖКТ, воспалением суставов.</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>14-28 дней</p>
<p>Стоп коронавируса new</p>	<p>При воспалении слизистых оболочек носа, горла, легких, слабости, снижении обоняния и слуха. Улучшенная и расширенная программа. Желательно использовать согласно методике комплекса «Стоп коронавирус».</p>	<p>Противовирусный Защищающий клетки Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>1 месяц</p>
<p>Стоп пневмо-бактерии</p>	<p>При воспалении органов дыхательной системы, вызванном <i>Streptococcus pneumoniae</i>, <i>Chlamydomphila pneumoniae</i>, <i>Mycoplasma pneumoniae</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i> и др., сопровождающемся лихорадкой, слабостью, головной болью, кашлем, одышкой, болью в груди, мышцах и суставах.</p>	<p>Антибактериальный Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>1 месяц</p>

Без кашля	При наличии как сухого, так и влажного кашля при различных инфекциях. Для получения лучшего эффекта желателен использовать с программами DeVita Ritm «Антипростуда», «Дыши легко».	Противовоспалительный Противоотечный Снимающий спазмы	В течение дня	1 месяц
Без пневмонии	При наличии инфекции дыхательных путей, кашля, общей слабости, утомляемости, сонливости, одышке, боли в грудной клетке. Желательно использование с другими против-воспалительными программами как общими, так и направленными на нормализацию функции дыхательной системы.	Противовоспалительный Противоотечный	2-3 дня	1 месяц

DeVita AP (автоматические программы)				
Название программы	При каких проблемах применяется программа	Эффект	Первые результаты	Стойкий эффект
Базовая 1 автомат	При вирусной и протозойной нагрузках. Оптимальная предотвращение заболеваний при смене климатических поясов, посещении Азиатских стран.	Противовирусный Противовоспалительный Противопротозойный	1-3 дня	2- 4 недели

Базовая 2 автомат	При токсической нагрузке, вызванной стрепто- и стафилококками. Эффективно как при простудных заболеваниях, так и для предупреждения кокковых инфекций.	Антибактериальный Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	10-14 дней
Базовая 3 автомат	При бактериальном отежении органов ЖКТ и мочеполовой системы.	Противовирусный Противовоспалительный Антибактериальный Антитоксический	1-3 дня	2-4 недели
Базовая 4 автомат	При наличии в организме микотоксинов, образованных плесневыми и дрожжевыми грибами. Снижает риск накопления канцерогенных факторов.	Противомикотический Противовоспалительный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца
Очищение автомат	При нарушении работы лимфатической системы, отечности, снижении иммунитета.	Антисептический Антитоксический Лимфодренажный Противоотечный	В течение дня	1 месяц
Стоп паразиты автомат	При паразитарном отежении печени, поджелудочной железы, кишечника, а также токсической нагрузке, вызванной жизнедеятельностью данных форм.	Антипаразитарный Антитоксический	2-3 дня	1-2 месяца

Стоп грипп автомат	Воспалительные процессы, вызванные различными штаммами вируса гриппа.	Противовирусный Жаропонижающий Обезболивающий Противовоспалительный Антитоксический	2-3 часа	5-10 дней
Стоп герпес S автомат	При образовании пузырьков на слизистых оболочках губ, гениталий, глаз, рта, коже, образующихся за счет активации вируса Herpes Simplex.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Стоп герпес Z автомат	Опоясывающий лишай – кожные высыпания, сопровождающиеся сильными болевыми ощущениями по ходу чувствительного нерва.	Противовирусный Противовоспалительный Противозудный Обезболивающий Антитоксический	В течение дня	1 месяц
Без простуды автомат	Воспаления носа, горла, бронхов.	Противовирусный Противовоспалительный Антитоксический	В течение дня	5-7 дней
Поддержка иммунитета автомат	Эффективна для предотвращения простудных инфекций при переохлаждении и в период массовых заболеваний.	Противовирусный Антитоксический	2-3 часа	5-7 дней

Без гельмин- тов автомат	Эффективна для предупреждения гельминтозов у детей и взрослых.	Антипатази- тарный Антитоксиче- ский	2-3 дня	1-2 месяца
Снижаем вес автомат	При лишнем весе, являющемся следствием вирусного отягощения. Отечности.	Противови- русный Антитоксиче- ский	1-2 дня	4-6 ме- сяцев
Уменьшаем объем автомат	При нарушении ра- боты лимфатиче- ской системы, задержке жидкости, снижении иммунитета в след- ствие повышенной интоксикации.	Антитоксиче- ский, Лимфодрен- ажный, Противоот- ечный	1-2 дня	4-6 ме- сяцев
Защита 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетиче- ской и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептокок- ковых токсинов.	Противови- русный Антибактери- альный Антитоксиче- ский	3-4 дня	4-6 меся- цев
Защита 2 автомат	При неправиль- ном образе жизни, больших стрессовых и физических на- грузках, проживании в неблагоприятных эко- логических районах. Программу рекомен- дуется использовать с составе комплекса «Защити себя».	Противови- русный Противопро- тозойный Противовос- палительный Защищающий клетки	В течение недели	6-12 ме- сяцев

Защита 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
Защита 4 автомат	При грибковой нагрузке и в целях предотвращения мутаций и негативного перерождения клеток. Программу рекомендуется использовать в составе комплекса «Защити себя».	Противомикотический Противовоспалительный Антиоксидантный Защищающий клетки	В течение недели	6-12 месяцев
SOS 1 автомат	Для снятия общей вирусной, герпетической и бактериальной токсической нагрузки. Снижает активность вирусов и негативное действие стрептококковых токсинов.	Противовирусный Антибактериальный Антиоксидантный	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 2 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!».	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	6-12 месяцев

SOS 3 автомат	Программа эффективна против стафилококковой и хламидийной инфекций, также снижает негативное воздействие при протозойном поражении мочеполовой сферы.	Противовирусный Антибактериальный Противопротозойный Противовоспалительный	3-4 дня	4-6 месяцев
SOS 4 автомат	При укусах клещей, выявлении клещевого боррелиоза или болезни Лайма. Рекомендуется использовать в составе комплекса «SOS! Клещи!».	Антибактериальный Противомикотический Противовоспалительный Антиоксидантный	3-4 дня	6-12 месяцев
Восстановление 1 автомат	При воспалении и повреждениях слизистой полости, при стоматологических вмешательствах, несбалансированном питании.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	1 месяц
Восстановление 2 автомат	После оперативных вмешательств, при любых повреждениях целостности кожного покрова и слизистых оболочек, при воспалительных процессах.	Обезболивающий Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	В течение суток	2-4 недели
Здоровые десны автомат	При инфекциях и повреждениях полости рта. Рекомендуется использовать согласно методике комплекса «Здоровые зубы».	Противоотечный Противовоспалительный Ускоряющий регенерацию	1-2 дня	4-6 месяцев

<p>Восстановление нервов автомат</p>	<p>При негативном расстройстве нервной системы, нарушении целостности нервного волокна, вызванных укусами клещей или другими факторами.</p>	<p>Противовоспалительный Противоотечный Обезболивающий Защищающий клетки</p>	<p>В течение недели</p>	<p>6-12 месяцев</p>
<p>Здоровое дыхание</p>	<p>При заболеваниях дыхательных путей: носа, горла, бронхов, легких.</p>	<p>Противовирусный Антибактериальный Антитоксический Противовоспалительный</p>	<p>1-2 дня</p>	<p>1 месяц</p>

Приложение 5 – «Рекомендуемые программы DeVita для использования при различных функциональных проблемах».

Система органов	Нарушения работы органов системы	Программы DeVita Ritm	Программы DeVita AP
ССС	Сердечная/ коронарная недостаточность (ИБС, стенокардия, постинфарктное состояние, токсические повреждения сердечной мышцы, функциональная перегрузка сердца и др)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце	Антивирус, Базовая 2 автомат Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Интимное здоровье, Антивирус ЖКТ, Восстановление 2 автомат
	Нарушения ритма сердца (аритмия, тахикардия)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровое сердце, Сердечный ритм в норме , Здоровый сон автомат	Антивирус, Базовая 2 автомат Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Антивирус ЖКТ Интимное здоровье
	Гипертония, гипотония, варикоз, атеросклероз и другие заболевания сосудистой системы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Давление в норме автомат, Антиварикоз, Голова без боли, Обмен веществ в норме, Здоровый сон автомат	Антивирус, Базовая 2 автомат Базовая 3 автомат, Нет хламидиям, Без шистосом и трематод, Очищение автомат, Антивирус ЖКТ, Без иерсинии, Стоп мигрень

ЖКТ	Гастрит, эзофагит, изжога, язва	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Здоровый сон автомат	Нет хеликобактеру, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Очищение автомат, Восстановление 2 автомат.
	Дуоденит, колит, энтерит, язва, синдром раздраженного кишечника, дисбактериоз, атония.	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Очищение автомат, Без сальмонеллы, Без протей, Без клебсиеллы, Стоп амеба, Без клостридий
	Гепатит, ДЖВП, холецистит, панкреатит, диабет, ЖКБ.	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Обмен веществ в норме, Сахар в норме, Поджелудочная в норме	Базовая 1 автомат, Базовая 3 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Стоп бактерии, Очищение автомат, Желчь без застоя, Без трематод общая 1,2, Без сальмонеллы, Без лептоспиры, Восстановление 2 автомат

ЖКТ	Острые заболевания (отравление, аллергия)	Здоровый день автомат, Обмен веществ в норме, Без аллергенов, Без отравлений автомат	ЖКТ в порядке, Помощь при отравлении, Дренаж антитоксический, Нет аллергии, Очищение автомат, Стоп пеницилл, Мексиканка детокс, Без клостридий, Без шигеллы, Без протей, Без ротавируса
Нервная	Неврозы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Хорошее настроение, Здоровый сон автомат, Оперативная память+	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп мигрень, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка
	ВСД	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Хорошее настроение, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце, Здоровые почки, Голова без боли	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка, Нет хламидиям, Антивирус ЖКТ, Стоп мигрень

Нервная	Инсульт	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Стоп травмы, Здоровый сон автомат, Здоровое сердце, Голова без боли.	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка, Нет хламидиям, Антивирус ЖКТ, Стоп мигрень
	Радикулит, неврит, опоясывающий лишай	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Стоп травмы, Здоровый сон автомат, Суставы без боли автомат, Нервная система, общая	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Стоп паразиты автомат, Стоп бактерии, Без грибка, Стоп герпес Z автомат, Антивирус ЖКТ, Восстановление 2 автомат
Эндокринная	Гипоталамо-гипофизарные нарушения	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье	Базовая 1 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантический, Антивирус ЖКТ, Без криптококка

Эндокринная	Заболевания поджелудочной железы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Обмен веществ в норме, Сахар в норме, Поджелудочная в норме	Базовая 1 автомат, Стоп паразиты автомат, Очищение автомат, Без трематод общая 1,2, Без сальмонеллы, Восстановление 2 автомат
	Заболевания щитовидной железы	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье Обмен веществ в норме, Здоровая щитовидка	Базовая 1 автомат Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантический, Восстановление 2 автомат.
	Заболевания надпочечников	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Очищение автомат, Дренаж антиоксидантический, Восстановление 2 автомат.

Эндокринная	Заболевания половых желез	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Ж/М здоровье, Ж/М сексуальность	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат
Репродуктивная	Нарушения в женской половой сфере (нарушения цикла, болезненная менструация, климакс, новообразования)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Женское здоровье, Женская сексуальность, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат.

Репродуктивная	Нарушения в мужской половой сфере (простатит, аденома, проблемы с потенцией)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Мужское здоровье автомат, Мужская сексуальность, Полное очищение автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без папиллом общая, Без трихомонады, Без энтерококка, Восстановление 2 автомат.
Мочевыделительная	Уретрит, Цистит, МКБ, подагра, пиелонефрит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровые суставы автомат, Стоп подагра автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Стоп герпес S автомат, Без протeya, Антивирус ЖКТ, Без энтерококка, Стоп пеницилл, Без папиллом, Без трихомонады, Восстановление 2 автомат.

Дыхательная	Проблемы верхних дыхательных путей (ОРЗ, ринит, трахеит, ларингит, фарингит, гайморит)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Без аллергенов, Антипростуда	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет аллергии, Стоп бактерии, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Восстановление 2 автомат, Антивирус ЖКТ, Здоровое дыхание автомат
	Проблемы нижних дыхательных путей (бронхит, бронхиальная астма, пневмония)	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Без аллергенов, Без простуды автомат	Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет аллергии, Стоп бактерии, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид, Здоровое дыхание автомат Без пневмонии, Без кашля, Восстановление 2 автомат, Без синегнойки

Кожа/ слизистые	Контактный дерматит, себорейный дерматит	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Здоровье кожи и волос автомат	Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Без грибка, Нет аллергии, Дренаж антиоксидационный, Очищение автомат, Восстановление 2 автомат
	Нейродермит, экзема	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровый сон автомат, Без аллергенов, Женское/мужское здоровье, Чистая кожа	Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Нет аллергии, Дренаж антиоксидационный, Очищение автомат, Без протeya, Без синегнойки, Восстановление 2 автомат
	Аллергия	Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Без аллергенов, Антипростуда	Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Нет аллергии, Дренаж антиоксидационный, Очищение автомат

<p>Опорно-двигательная</p>	<p>Остеохондроз, артрит, артроз, подагра, протрузии, травмы, бурсит, миозит</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Суставы без боли автомат, Здоровые суставы автомат, Стоп подагра автомат, Стоп травмы</p>	<p>Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Базовая 4 автомат, Очищение автомат, Нет хламидиям, Дренаж антитоксический, Стоп клещи 1,2, Без синегнойки, Без энтерококка</p>
<p>Иммунная</p>	<p>Аллергия, проблемы тимуса, селезенки, лимфатических узлов</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Без аллергенов, Чистая лимфа, Горло без проблем</p>	<p>Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Дренаж антитоксический, Очищение автомат, Менсиканка детокс, Нет аллергии, Стоп простуда общая, Горло без боли, Восстановление 2 автомат, Стоп пеницилл</p>

Органы чувств	<p>Проблемы органов зрения (атрофия зрительного нерва, блефарит, кератит, конъюнктивит, катаракта, глаукома, близорукость, дальнозоркость, астигматизм)</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровое зрение, Без аллергенов, Нервная система, общая</p>	<p>Поддержка иммунитета автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 3 автомат, Очищение автомат, Стоп герпес S автомат, Восстановление 2 автомат,, Стоп паразиты автомат, Нет нематод и аскарид новая, Нет хламидиям, Без грибка, Нет аллергии, Дренаж антитоксический</p>
	<p>Проблемы органов слуха (отит, снижение слуха)</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Здоровые уши, Нервная система, общая, Стоп травмы, Антипростуда</p>	<p>Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Интимное здоровье, Нет аллергии, Антивирус ЖКТ, Уши без воспаления, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Восстановление 2 автомат</p>

<p>Органы чувств</p>	<p>Проблемы органов обоняния (ОРЗ, синусит, ринит, травмы)</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Нервная система, общая, Антипростуда, Без аллергенов, Стоп травмы</p>	<p>Без простуды автомат, Базовая 2 автомат, Интимное здоровье, Нет аллергии, Стоп бактерии, Антивирус ЖКТ, Чистые пазухи общая, Чистые пазухи, Стоп простуда общая, Стоп коронавирус new, Восстановление 2 автомат</p>
<p>Стоматологические проблемы</p>	<p>Повреждения и воспаления слизистой, кровоточивость десен, болезненность после стоматологических вмешательств</p>	<p>Здоровый день автомат, Здоровье автомат, Полное очищение автомат, Крепкие зубы, Стоп травмы</p>	<p>Базовая 1 автомат, Базовая 2 автомат, Базовая 4 автомат, Без грибка, Здоровые десны автомат, Восстановление 1-2 автомат, Стоп травма (зубы), Без свища, Дренаж антитоксический</p>

Приложение 6 – «Список специальных программ DeVita Cosmo и зоны воздействия».

№	Название программы	Описание программы
1	Кожа без морщин	<p>Программа помогает: устранить мимические морщины, акне, укрепить тонус кожи, подтянуть овал лица. Это основная программа по поддержанию здоровья и молодости кожи. Далее можно переходить к последующим программам, корректирующим работу органов и преображающим лицо.</p> <p>Применение (рис. 1): Расположение устройства значения не имеет. Квантовой приставкой необходимо водить по линиям, указанным на рисунке 1 в направлении стрелок (массажные линии). Здесь применяется линейное перемещение приставки. Глаза при проведении процедуры закрываются. Ориентируйтесь по ощущениям.</p> <p>Внимание: прибор и квантовую приставку в зоне щитовидной железы не располагать.</p>
2	Тонус лица	<p>Регулярное применение программы восстанавливает естественные процессы регенерации клеток, в некоторых случаях усиливая их, препятствует дальнейшему увяданию кожи, а также устраняет мелкие морщинки и разглаживает более глубокие. Программа дает энергию всему организму, снимает общее утомление, облегчает депрессивные состояния. Это вторая по значимости программа. Ее необходимо применять в профилактических целях.</p> <p>Применение (рис. 2): Расположение устройства значения не имеет. Квантовую приставку перемещать по одной и другой ушной раковине, начиная с верхней части уха и плавно перемещая вниз. Делаете 4 цикла и переходите на другое ухо. Снова 4 цикла и возвращаетесь на первое, и так до конца сеанса. Обязательно ориентируйтесь по ощущению тепла.</p> <p>Внимание! Программа применяется в утреннее или дневное время.</p>

3	Женское здоровье	<p>Программа предназначена для регуляции женской эндокринной и репродуктивной систем. Будет полезна женщинам в любом возрасте.</p> <p>Применение (рис. 3): Устройство разместить в области солнечного сплетения. Приставку располагать в указанные зоны (рис. 3) и осуществлять круговые движения с одной и с другой стороны по очереди. Сеансы проводить 1 раз в неделю.</p> <p>Внимание! Не рекомендуется использовать эту программу при беременности и лицам моложе 14 лет.</p>
4	Мужское здоровье	<p>Основное действие программы заключено в регуляции мужской эндокринной системы: гипоталамус – гипофиз – надпочечники – половые железы. Регулируется также функция простаты. Программа является основной для профилактики импотенции.</p> <p>Применение (рис. 4): Само устройство нужно располагать в области солнечного сплетения. Приставку располагать в указанные на рисунке 4 зоны и осуществлять круговые движения с одной и другой стороны по очереди.</p> <p>Сеансы проводить 1 раз в неделю.</p>
5	Работа печени	<p>Программа направлена на регуляцию работы печени, поддержание ее функций.</p> <p>Применение (рис. 5): Устройство располагается с правой стороны в области подреберья. Квантовой приставкой воздействуем на указанные на рисунке 5 зоны по очереди круговыми движениями. Глаза следует закрыть и ориентироваться по тепловым ощущениям.</p>
6	Живи спокойно	<p>Направлена на поддержание хорошего настроения, снижению стрессовой нагрузки, нормализацию сна.</p> <p>Применение (рис. 6): Необходимо расположиться в тихой комнате, сесть удобно и начать воздействовать на указанную зону (рис. 6) круговыми движениями. Глаза закрыть. Воздействие на эту зону стимулирует всю нервную систему. Снимает нервность и дает чувство спокойствия и умиротворения. Расположение устройства значения не имеет.</p>

7	Регуляция желудка	<p>Нормализует работу желудка, снимает неприятные ощущения.</p> <p>Применение (рис. 7): Устройство располагать в области желудка. Воздействовать квантовой приставкой на зоны, указанные на рисунке 7 круговыми движениями. Глаза закрыть.</p>
8	Пищеварение	<p>Предупреждает расстройства пищеварения, поддерживает работу кишечника.</p> <p>Применение (рис. 8): Устройство положить на живот. Воздействовать квантовой приставкой на указанные зоны (рис. 8) круговыми движениями. Провести 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую и т.д. Снова вернуться на первую, и цикл повторять до окончания программы. Глаза закрыть.</p>
9	Как по часам	<p>Природой предусмотрено своевременное выведение шлаков и других вредных веществ из организма. Запор – это проблема, связанная с затруднительным и недостаточным опорожнением кишечника. Задержка стула на 48 часов уже считается признаком запора. Хронический запор делает кожу бледной или желтоватой – она теряет эластичность, становится дряблой. Программа нормализует работу толстого кишечника, не допуская образования неприятных явлений.</p> <p>Применение (рис. 9): Прибор положить на живот. Воздействовать квантовой приставкой на указанные зоны (рис. 9) круговыми движениями. Провести 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую, затем снова вернуться на первую. Цикл необходимо повторять до окончания работы программы.</p>
10	Стимуляция почек	<p>Почки являются вторым по значимости после печени органом, участвующим в выведении токсических веществ. Они регулируют водный и электролитный обмен, кислотно-щелочное равновесие, концентрацию натрия в организме, объем и осмотическое давление крови и жидкостей тела, выводят из организма избыток воды, мочевины, креатинин, мочевую кислоту, соли.</p>

10	Стимуляция почек	<p>Нарушение работы почек моментально отражается на лице в виде отеков. Программа помогает наладить работу почек.</p> <p>Применение (рис. 10): Устройство расположить в области почек со стороны спины. Воздействовать квантовой приставкой на указанные зоны (рис. 10) круговыми движениями. Провести 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую и т.д. Снова вернуться на первую и повторять цикл до окончания программы. Глаза закрыть.</p>
11	Щитовидная железа	<p>Щитовидная железа – это важный орган эндокринной системы, регулирующий обмен веществ, теплообмен, работу нервной и других систем. Заболевания щитовидной железы – одни из самых распространенных в мире и стоят в одном ряду с болезнями сердечно-сосудистой системы. Программа предназначена для предупреждения таких заболеваний и нормализации работы всего организма, а также устранения сухости кожи, ломкости ногтей и волос.</p> <p>Применение (рис. 11): Расположение устройства значения не имеет, кроме области самой железы. Воздействовать на указанные зоны (рис. 11) квантовой приставкой круговыми движениями, плавно перемещаясь с одной зоны на другую. Повторять перемещения до окончания программы.</p> <p>Внимание: прибор и квантовую приставку на зону щитовидной железы не располагать, воздействие проводится строго по зонам проекции: нижняя часть шеи вдоль пищевода, в надключичную область и область яремной ямки.</p>
12	Сердце и сосуды	<p>Регулирует работу сердца и сосудов, улучшает кровоснабжение тканей.</p> <p>Применение (рис. 12): Устройство расположить в области сердца. Воздействовать квантовой приставкой на указанную на рисунке 12 зону круговыми движениями. Глаза закрыть.</p>

13	Работа селезенки	<p>Состояние селезенки может отразиться на состоянии кожи лица, функционировании других органов и «настроении» всего организма. Программа помогает предупредить проблемы селезенки.</p> <p>Применение (рис. 13): Устройство расположить в области селезенки – левая сторона тела, чуть выше последнего ребра. Воздействовать квантовой приставкой на указанную на рисунке 13 зону круговыми движениями. Глаза закрыть.</p>
14	Ключ жизни	<p>Нормализует деятельность поджелудочной железы.</p> <p>Применение (рис. 14): Устройство расположить в области поджелудочной железы. Воздействовать на указанные зоны (рис. 14) круговыми движениями. Провести квантовой приставкой 4 круговых движения по одной зоне, потом перейти на другую. Снова вернуться на первую и повторять цикл до окончания программы. Глаза закрыть.</p>
15	Ясные глаза	<p>Программа снимает спазмы мелких кровеносных сосудов глаз. Восстанавливает нормальную работу мышцы, управляющей хрусталиком.</p> <p>Применение (рис. 15):</p> <ul style="list-style-type: none"> - подойдите к окну; - найдите на стекле небольшую точку. Если ее нет, то нанесите на стекло маленькую точку (например, маркером); - расположите квантовую приставку сбоку от головы в районе виска. Приставка не должна загромождать направление взгляда. Воздействовать на указанные на рисунке 15 зоны круговыми движениями, ориентируясь по ощущению тепла; - во время работы устройства сосредоточьтесь внимание на этой точке так, чтобы она была в резкости (для этого выберите комфортное расстояние, при котором глаз не напрягается); - посмотрите на точку в течение 8-10 секунд. После этого переведите взгляд вдаль на 8-10 секунд; - далее повторяйте эту процедуру до возникновения чувства усталости глаз. После этого прекратите упражнение, приставку не убирайте от зон.

15	Ясные глаза	<p>- дайте устройству отработать программу до конца; - постепенно увеличивайте время тренировки до времени работы программы устройства. После тренировки глаз дайте мышцам отдохнуть в течение 20-30 минут. Это необходимо для того, чтобы глаза адаптировались к новым условиям и мышцы обрели эластичность.</p> <p>Внимание: после сеанса не желательно напрягать глаза в течение 2-х часов.</p>
16	Чистая кожа	<p>Программа уменьшает проявления воспаления (покраснения, акне и т.д.)</p> <p>Применение (рис. 16): Сам прибор располагать в 25-30 см от лица. Приставку располагать в указанные зоны (рис. 16) и осуществлять круговые движения с одной и другой стороны по очереди: сначала лоб, далее щеки, затем живот (справа и слева от пупка). Цикл проводить до окончания действия программы. Для профилактики программу использовать через день.</p> <p>По необходимости можно использовать ежедневно сеансами: 3-4 дня подряд в любое время суток, далее перерыв 3-4 дня и повторить сеанс. Всего 10 сеансов. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программу «Пищеварение», а также «Мужское здоровье» или «Женское здоровье».</p>
17	Коса-краса	<p>В межсезонье организм людей переживает стресс: волосы после зимнего сезона выглядят не идеально. Ежедневное выпадение волос (в норме до 100) является физиологически обусловленной нормой. Выпадение волос сверх нормы свидетельствует о нарушениях в работе организма, обусловленных стрессами, воздействием холода, сухого климата в помещении, дефицитом микроэлементов, иногда результатом применения определенных медицинских препаратов. Программа помогает в профилактике выпадения волос и улучшает их состояние.</p> <p>Методика (схема 17): Расположить устройство перед лицом или в области затылка. Квантовую насадку располагать в указанных зонах (рис. 17).</p>

17	Коса-краса	<p>Совершить по 4 круговых движения по одной и другой зоне, далее перейти на область пупка (справа и слева). Циклы повторять до полного окончания программы. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программу «Пищеварение».</p>
18	Мастер маникюра	<p>Укрепляет и улучшает внешний вид ногтей и кожи рук.</p> <p>Применение (рис. 18): Устройство расположить в 20 см от обрабатываемой кисти. Квантовой насадкой совершать линейные медленные движения от пальцев к основанию кисти (лучезапястному суставу). Сначала с наружной, затем с внутренней стороны кисти. Повторить процедуру на другой руке. Перейти на область живота (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания работы программы.</p>
19	Лицо без изъянов	<p>Клетки кожи постоянно обновляются. Выглядеть ей красиво и ухоженно зачастую мешают старые омертвевшие клетки, которые задерживаются на поверхности. Регулярное профилактическое использование программы поможет избежать подобных явлений.</p> <p>Применение (рис. 19): Прибор располагать на расстоянии 25-30 см от лица. Приставку располагать в указанных зонах (рис. 19) и осуществлять круговые движения с одной и другой стороны по очереди: сначала лоб, далее щеки, затем живот (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания действия программы. Для профилактики программу использовать через день. При необходимости можно использовать ежедневно сеансами: 3-4 дня подряд в любое время суток, далее перерыв 3-4 дня и повторить сеанс. Всего 10 сеансов. После применения данной программы для улучшения эффекта рекомендуется использовать программы «Пищеварение», «Работа печени».</p>

20	Легкость ног	<p>Программа нормализует кровообращение в ногах, снимает усталость и отечность.</p> <p>Применение (рис.20): Прибор расположить на расстоянии 20 см от обрабатываемой стопы. Квантовой насадкой совершать линейные движения от кончиков пальцев до основания стопы (голеностопного сустава). Сначала с тыльной стороны, затем со стороны подошвы. Повторить процедуру на другой ноге. Перейти на область живота (справа и слева от пупка). Цикл повторять до окончания работы программы.</p>
----	--------------	--



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3



Рисунок 4



Рисунок 5



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8



Рисунок 9



Рисунок 10



Рисунок 11



Рисунок 12



Рисунок 13



Рисунок 14



Рисунок 15



Рисунок 16



Рисунок 17



Рисунок 18



Рисунок 19



Рисунок 20

Приложение 7 – «Список рекомендованных наборов частот для DeVita Cosmo с циклом применения и зоны воздействия».

1. Общие расстройства

Боль общая

Набор частот: 3,8+4,0+4,9+5,5+8,0+9,4+9,5+9,6

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3 день — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4 день — 4, 5, 10, 12, 19

Детокс

Набор частот: 0,7+0,9+2,5+2,65+3,3+9,8+56,0+69,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 4, 5, 7, 19

2 день — 5, 6, 9, 12, 16

3 день — 7, 19

4 день — 4, 5, 16, 19

Избыточный вес

Набор частот: 2,0+4,0+4,9+32,0+35,50

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 7, 19

2 день — 2, 4, 5, 19

3 день — 5, 6, 7, 9

4 день — 7, 11, 19

Недомогание, утомляемость

Набор частот: 5,8+9,6+91,5+92,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 12, 19

2 день — 2, 6, 9, 10

3 день — 2, 10, 19

4 день — 2, 7, 10, 12, 19

Профессиональная подверженность факторам риска

Набор частот: 2,2+10,0+12,5+15,0+19,5+26,0+92,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 4, 5, 7

2 день — 1, 4, 5, 7

3 день — 1, 4, 5, 7

4 день — 1, 4, 5, 7

Судорога и спазм

Набор частот: 6,0+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 19

2 день — 1, 2, 19

3 день — 1, 2, 19

4 день — 2, 19, 19

Табакокурение

Набор частот: 3,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4

2 день — 1, 4, 12, 19

3 день — 1, 4, 5

4 день — 1, 5, 6, 9, 19

Травмы

Набор частот: 1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+8,6+92,0

Зоны воздействия:

1 день — 4, 7, 10, 12, 14, 19, зона травмы

2 день — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19, зона травмы

3 день — 5, 10, 19, зона травмы

4 день — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19, зона травмы

2. Нервная система, расстройства поведения

Головная боль

Набор частот: 1,2+3, 8+3,9+6,3+7,5+32,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10, 12, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 19

3 день — 1, 2, 10, 12, 19

4 день — 1, 2, 10, 12

Головокружение и нарушение устойчивости

Набор частот: 4,0+89,0+89,5+95,0+97,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10

2 день — 1, 2

3 день — 1, 2, 10

4 день — 1, 2

Дистония нейроциркуляторная

Набор частот: 1,2+4,0+6,0+6,3+9,4

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 6, 9, 12

2 день — 2, 12, 19

3 день — 1, 2, 6, 9

4 день — 2, 12, 19

Истерия

Набор частот: 2,2+4,5+6,3+31,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 7, 10, 11, 19

2 день — 2, 6, 9, 19

3 день — 2, 10, 11, 19

4 день — 2, 10, 11

Неврастения

Набор частот: 2,2+4,5+6,3+31,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 10

2 день — 10, 12, 19

3 день — 2, 4, 5, 7, 8, 12

4 день — 5, 6, 7, 9, 10, 12, 19

Невралгия тройничного нерва

Набор частот: 7,5+10,0+30,0+87,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 12, 19

2 день — 1, 2, 4, 19

3 день — 1, 2, 12, 16

4 день — 1, 2, 19

Неврит лицевого нерва

Набор частот: 3,9+7,5+89,5+91,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 10, 19

2 день — 1, 6, 9

3 день — 1, 9, 10

4 день — 1, 9, 10, 19

Отсутствие аппетита (анорексия)

Набор частот: 25,0+31,0+35,0+94,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 12, 16

2 день — 2, 7, 18

3 день — 7, 8, 10, 12

4 день — 4, 5, 6, 9, 12

Отсутствие или потеря сексуального влечения

Набор частот: 2,5+12,5+32,0+38,0+55,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 12, 17, 19

2 день — 2, 7, 10, 19

3 день — 1, 4, 6, 7, 8, 9, 19

4 день — 4, 5, 9, 17, 19

Снижение памяти

Набор частот: 21,0+50,0+80,0+80,5+90,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 16, 19

2 день — 2, 4, 12

3 день — 2, 16, 19

4 день — 2, 4, 12, 19

Тревожно-депрессивные состояния

Набор частот: 3,5+5,5+19,0+92,5+93,5+98,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 5, 19

2 день — 6, 9, 10, 19

3 день — 5, 10, 17, 19

4 день — 6, 9, 10, 19

Расстройства сна

Набор частот: 2,5+3,6+3,9+5,0+8,1+34,0+92,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 11

2 день — 2

3 день — 2, 11

4 день — 1, 2, 11

Цереброваскулярная недостаточность

Набор частот: 47,5+50,0+50,5+52,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 16, 19

2 день — 2, 4, 12

3 день — 2, 16, 19

4 день — 2, 4, 11, 19

Эректильная дисфункция

Набор частот: 2,6+4,0+4,9+9,4+55,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 8, 10, 11, 15, 17

2 день — 2, 6, 9, 11, 17, 19

3 день — 1, 5, 7, 9, 11, 19

4 день — 7, 10, 13, 19

3. Органы чувств

Близорукость

Набор частот: 3,6+4,9+31,5+72,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 7, 8, 12, 19

2 день — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19

3 день — 1, 4, 5, 7, 12, 19

4 день — 4, 7, 10, 12, 19

Глаукома

Набор частот: 70,0+98,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 5, 6, 9, 12, 19

3 день — 1, 4, 7, 8, 9, 19

4 день — 12, 16, 19

Конъюнктивит

Набор частот: 11,0+65,5+66,5+70,0+75,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 7, 12, 19

2 день — 1, 2, 6, 7, 8, 9, 16, 19

3 день — 4, 12, 16, 19

4 день — 5, 7, 10, 12, 19

Неврит зрительного нерва

Набор частот: 3,6+4,9+94,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 7, 12, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 19

3 день — 1, 5, 6, 9, 10, 16

4 день — 7, 10, 12, 19

Неврит слухового нерва

Набор частот: 3,3+5,8+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 16, 19

2 день — 2, 4, 5, 10, 16, 19

3 день — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19

4 день — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

Отит

Набор частот: 3,3+5,8+9,2+27,0+98,0

Зоны воздействия:

1 день — 6, 9, 10, 12, 19

2 день — 2, 7, 8, 12, 16

3 день — 2, 12

4 день — 10, 12, 19

Снижение слуха

Набор частот: 5,8+6,0+9,25+9,8+60,0+95,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 16, 19

- 2 день — 2, 4, 5, 10, 16, 19
3 день — 1, 3, 5, 7, 12, 16, 19
4 день — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 19

4. Сердечно-сосудистая система

Варикозное расширение вен (нижние конечности)

Набор частот: 2,5+9,4+10,0+60,5+66,5+68,0+68,5+99,0

Зоны воздействия:

- 1 день — 7, 8, 12, 14, 19
2 день — 4, 5, 13, 17, 19
3 день — 5, 7, 8, 9, 14, 19
4 день — 7, 9, 16, 19

Головная боль сосудистая

Набор частот: 2,5+62,5+65,0+67,5+83,5+96,0+96,5

Зоны воздействия:

- 1 день — 2, 10, 12
2 день — 2, 7, 12, 16, 19
3 день — 2, 10, 12
4 день — 2, 12, 16, 19

Геморрой

Набор частот: 2,6+3,8+4,0

Зоны воздействия:

- 1 день — 1, 2, 5, 7, 13, 14
2 день — 6, 9, 10, 17
3 день — 7, 8, 9, 11, 19
4 день — 4, 5, 13, 17

Гипертензия артериальная

Набор частот: 3,3+6,0+9,45+9,5+62,5

Зоны воздействия:

- 1 день — 2, 4, 6, 9
2 день — 5, 10, 17
3 день — 2, 4, 6, 9
4 день — 10, 12, 15, 19

Гипотензия артериальная

Набор частот: 1,7+47,5+48,5+49,0+49,5+50,0+52,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 8, 11

2 день — 5, 6, 7

3 день — 2, 7, 11

4 день — 2, 5, 6, 9, 19

Ишемическая болезнь сердца

Набор частот: 1,2+3,3+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 7, 11

2 день — 4, 5, 7, 9

3 день — 2, 4, 5, 7, 9

4 день — 2, 6, 9, 12

Нарушение микроциркуляции

Набор частот: 7,0+9,4+9,45+19,5+40,5+46,0+50,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 6, 9

2 день — 5, 10, 17

3 день — 2, 4, 6, 9

4 день — 10, 12, 15, 19

Нарушение сердечного ритма (тахикардия)

Набор частот: 1,2+3,3+6,0+9,45+38,0+38,5+95,0+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 10, 11

2 день — 4, 5, 11, 19

3 день — 3, 4, 6, 10, 11

4 день — 4, 5, 11, 19

Сердечные заболевания (профилактика)

Набор частот: 1,2+3,8+8,0+9,45+41,0+43,0+43,5+97,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 10, 11

2 день — 4, 5, 11, 19

3 день — 3, 4, 6, 10, 11

4 день — 4, 5, 11, 19

5. Органы дыхания

Аллергический ринит

Набор частот: 2,5+2,9+7,5+12,0+74,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 12, 19

3 день — 1, 4, 5, 12, 18, 19

4 день — 4, 5, 7, 12, 16, 19

Ангина, тонзиллит

Набор частот: 9,45+20,5+52,0+71,5+75,5+82,0+86,0+89,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 12, 16, 19

2 день — 2, 4, 5, 7, 12, 19

3 день — 4, 5, 12, 19

4 день — 7, 8, 10, 12, 19

Бронхиальная астма

Набор частот: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 5, 6, 11

2 день — 2, 7, 8, 11

3 день — 4, 5, 16

4 день — 4, 19

Бронхоспазм

Набор частот: 3,8+5,9+7,7+9,4+50,0+55,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5

2 день — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3 день — 4, 7

4 день — 11, 19

Бронхит

Набор частот: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5

2 день — 4, 5, 6, 7, 9, 11

3 день — 4, 7
4 день — 11, 19

Гайморит (синусит)

Набор частот: 2,9+3,6+53,5
Зоны воздействия:
1 день — 1, 2, 6, 9, 12, 16, 19
2 день — 1, 2, 12, 16, 19
3 день — 1, 12, 19
4 день — 4, 5, 12, 19

Кашель

Набор частот: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+75,0+81,0
Зоны воздействия:
1 день — 2, 4
2 день — 4, 12, 16
3 день — 4, 5
4 день — 5, 6, 9, 19

Ларингит

Набор частот: 9,5
Зоны воздействия:
1 день — 1, 2, 4, 5, 11
2 день — 1, 2, 4, 7, 11, 16, 19
3 день — 4, 11, 19
4 день — 4, 11, 19

Плеврит

Набор частот: 2,5+9,4+11,5
Зоны воздействия:
1 день — 2, 5, 6, 9
2 день — 3, 4, 16
3 день — 4, 11
4 день — 4, 5, 19

Пневмония

Набор частот: 0,9+4,0+8,0+9,4+9,45+46,0+86,0
Зоны воздействия:
1 день — 2, 4, 5, 19

2 день — 2, 5, 7, 16

3 день — 4, 11, 19

4 день — 4, 5, 11

6. ЖКТ

Боль зубная

Набор частот: 3,6+4,9+8,0+9,5+17,3+30,5+31,0+79,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

2 день — 1, 2, 10, 12, 16, 19

3 день — 1, 4, 10, 12, 16, 19

4 день — 4, 5, 10, 12, 19

Гастрит и дуоденит

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 7, 10

2 день — 2, 6, 9, 12, 19

3 день — 4, 5, 10, 19

4 день — 5, 7, 12, 19

Гепатит хронический

Набор частот: 0,9+2,5+3,3+9,8+17,0

Зоны воздействия:

1 день — 19

2 день — 5, 6, 9, 12, 16

3 день — 7, 19

4 день — 4, 5, 16, 19

ДЖВП

Набор частот: 2,65+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 12, 19

2 день — 2, 12, 14, 19

3 день — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4 день — 7, 10, 18, 19

ЖКБ

Набор частот: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 12, 16

2 день — 7, 10, 19

3 день — 5, 6, 7, 9, 16

4 день — 7, 15, 19

Запор

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 9, 12, 17

2 день — 10, 15, 19

3 день — 7, 9, 12, 19

4 день — 7, 10, 19

Колика кишечная

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 9, 12, 19

2 день — 5, 7, 17, 19

3 день — 6, 7, 8, 9, 12, 19

4 день — 9, 17, 18, 19

Нарушение пищеварения (диспепсия)

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 6, 7, 8, 9, 10, 19

2 день — 2, 7, 19

3 день — 4, 5, 10, 19

4 день — 5, 7, 12

Полость рта

Набор частот: 4,9+33,6+84,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 12, 19

2 день — 1, 2, 4, 5, 7, 19

3 день — 4, 6, 7, 9, 12, 19

4 день — 4, 12, 16

Тошнота и рвота

Набор частот: 3,5+3,8+8,1+8,6+9,4+10,0+11,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 10, 19

2 день — 7, 10

3 день — 5, 6, 11

4 день — 5, 10, 11

Холецистит

Набор частот: 2,65+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 10, 19

2 день — 2, 12, 14, 19

3 день — 5, 6, 7, 9, 12, 16

4 день — 7, 10, 18, 19

Энтериты и колиты

Набор частот: 3,8+5,9+7,7+61,0+63,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 5, 7, 10, 12, 16

2 день — 2, 6, 7, 9, 12

3 день — 7, 8, 9

4 день — 4, 5, 10, 19

Язва (желудок, 12-и перстная к.)

Набор частот: 8,6+9,4+10,0+67,0+73,0+83,0+96,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 10, 12, 17

2 день — 2, 6, 7, 9, 19

3 день — 5, 10, 17

4 день — 4, 5, 10, 19

7. Кожа и подкожная клетчатка

Атопический дерматит (нейродермит)

Набор частот: 0,7+1,7+2,6+9,2+9,4+28,0+64,0

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 4, 5, 10, 11, 15, 18, 19

2 день — 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 19

3 день — 7, 9, 10, 11, 17, 19

4 день — 10, 11, 19

Экзема

Набор частот: $0,7+1,7+2,5+9,25+9,4+28,0+64,0$

Зоны воздействия:

1 день — 1, 2, 7, 10, 11, 15, 19

2 день — 1, 2, 4, 5, 10, 14, 19

3 день — 3, 4, 5, 7, 9, 19

4 день — 3, 7, 9, 11, 19

8. Опорно-двигательный аппарат

Боль в конечности

Набор частот: $3,8+6,8+33,5+54,0+64,0+70,5+95,0$

Зоны воздействия:

1 день — 2, 9, 18, 19

2 день — 13, 17, 19

3 день — 13, 14, 19

4 день — 6, 9, 14, 16, 19

Боль в спине (разные причины)

Набор частот: $1,2+2,5+3,6+3,8+3,9+7,5+33,0+79,0$

Зоны воздействия:

1 день — 7, 9, 10, 19

2 день — 7, 9, 15

3 день — 7, 8, 9, 10

4 день — 6, 9, 13

Коленного сустава артроз

Набор частот: $1,2+3,5+7,5+63,5+78,0+100,0$

Зоны воздействия:

1 день — 7, 13, 14, 19

2 день — 7, 13

3 день — 13, 15, 19

4 день — 9, 14, 19

Люмбаго, ишиас

Набор частот: $62,5+64,5+67,5+76,5+94,0$

Зоны воздействия:

1 день — 7, 8, 9, 10, 15

2 день — 2, 5, 6, 7, 9

3 день — 7, 9, 10, 15

4 день — 2, 6, 7, 8, 9

Миалгия

Набор частот: 4,0+10,0+47,5+50,0+52,5+99,5

Зоны воздействия:

1 день — 4, 7, 10, 12, 14, 19

2 день — 4, 5, 10, 12, 15, 17, 19

3 день — 5, 10, 19

4 день — 6, 9, 10, 12, 15, 16, 19

Остеохондроз шейно-грудной

Набор частот: 2,0+2,5+3,0+3,5+9,0+59,0+60,0+67,5

Зоны воздействия:

1 день — 1, 5, 10, 12, 19

2 день — 2, 5, 7, 10, 19

3 день — 2, 5, 7

4 день — 2, 5, 7, 12, 19

Остеохондроз пояснично-крестцовый

Набор частот: 9,6+76,0+84,5+95,0+100,0

Зоны воздействия:

1 день — 7, 9, 10, 19

2 день — 7, 9, 15

3 день — 7, 8, 9, 10

4 день — 6, 9, 13

9. Мочевыводящая система

Затрудненное выделение мочи

Набор частот: 8,1+9,4+81,0+86,0+88,0+90,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 13, 14, 19

2 день — 2, 7, 8, 17, 19

3 день — 3, 6, 9, 13, 17

4 день — 9, 19

Мочекаменная болезнь

Набор частот: 3,5+17,0+27,0+84,0+85,0+88,5+94,5+96,0

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 8, 9, 11, 19

2 день — 2, 4, 14, 17, 19

3 день — 4, 5, 7, 11, 19

4 день — 6, 7, 9, 11, 17, 19

Нефрит

Набор частот: 2,8+3,3+8,1+9,2

Зоны воздействия:

1 день — 2, 6, 7, 8, 9, 19

2 день — 2, 9, 11, 17

3 день — 3, 5, 7, 11, 14

4 день — 4, 7, 11, 15, 19

Цистит

Набор частот: 2,8+3,3+8,1+9,2+9,4

Зоны воздействия:

1 день — 2, 9, 13, 17

2 день — 5, 7, 13, 19

3 день — 7, 14, 17, 19

4 день — 7, 14, 19

10. Репродуктивные органы

Бесплодие женское

Набор частот: 2,5+3,5+4,0+4,9+8,5+9,4+9,5+9,6

Зоны воздействия:

1 день — 2, 4, 7, 8, 9, 14, 19

2 день — 2, 11, 13, 17, 19

3 день — 4, 5, 10, 17, 19

4 день — 6, 7, 9, 11, 19

Гинекологические проблемы (общие)

Набор частот: 2,5+4,0+4,9+5,5+9,4+9,5

Зоны воздействия:

1 день — 9, 11, 13, 19

2 день — 7, 11, 14, 19

3 день — 5, 8, 11, 17, 19

4 день — 6, 9, 11, 17, 19

Менопауза (женщины)

Набор частот: 2,2+4,0+4,9+6,3+9,5+31,5+98,5

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 11, 19

2 день — 2, 7, 8, 11, 17

3 день — 4, 5, 10, 19

4 день — 5, 7, 9, 19

Нарушение менструального цикла

Набор частот: 20,0+22,0+42,0+49,0+63,0

Зоны воздействия:

1 день — 9, 11, 13, 19

2 день — 7, 11, 14, 19

3 день — 5, 8, 11, 17, 19

4 день — 6, 9, 11, 17, 19

Предстательной железы гиперплазия

Набор частот: 2,5+2,6+4,0+4,9+9,4

Зоны воздействия:

1 день — 2, 7, 9, 17, 19

2 день — 2, 7, 8, 11, 14, 19

3 день — 11, 13, 17, 19

4 день — 6, 9, 11, 13, 19

Простатит

Набор частот: 2,6+4,0+4,9+9,4+19,5+57,0+88,5

Зоны воздействия:


1 день — 2, 5, 7, 15, 17

2 день — 2, 6, 7, 9, 17, 19

3 день — 7, 8, 9, 15, 19

4 день — 11, 13, 19

Атлас зон для воздействия цветом/светом
Перечень цифровых обозначений зон воздействия

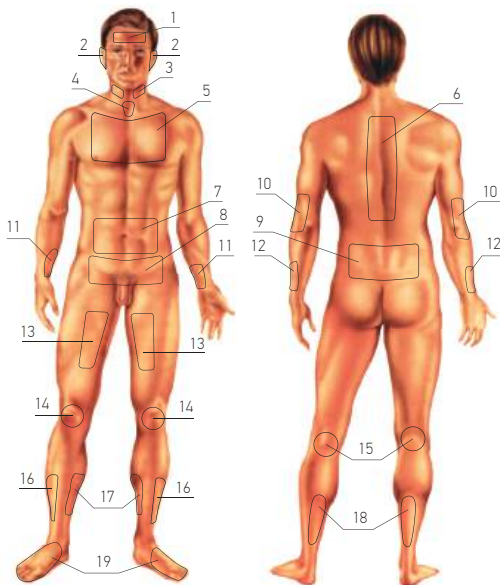

1. Лоб
2. Ухо
3. Шея
4. Яремная вырезка - грудина
5. Грудь
6. Спина
7. Живот
8. Нижняя часть живота и половые органы
9. Поясница
10. Наружная часть локтевого сгиба
11. Наружная поверхность предплечья
12. Тыльная поверхность предплечья
13. Бедро
14. Колено
15. Подколенная ямка
16. Наружная сторона нижней части голени
17. Внутренняя сторона нижней части голени
18. Задняя сторона голени
19. Стопа

Приложение 8 – «Список рекомендованных программ HV и зоны применения».

№ п/п	Направление воздействия	Частота, Гц	Положение активного «+» и пассивного «-» электрода
Общие проблемы			
1	Аллергия	1,7+3,8+8,1+9,6	+ правая (левая) рука; - правая (левая) нога
2	Воспаление	3,6	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
3	Воспаление гнойное	1,7	+ на зону поражения; - в руку со стороны поражения
4	Головные боли	9,45+9,5	+ лоб; - затылок
5	Кровоизлияния, травмы	2,5	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
6	Ожирение	4,0+4,9	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
7	Отеки	2,59	+ на зону отека; - ручной или ножной электрод с противоположной стороны
8	Утомление	2,2	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
9	Ушибы	2,5	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
10	Спазмы	3,8	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
Сердечно-сосудистая и дыхательная системы			
11	Артериосклероз	3,3	+ правая рука; - левая рука
12	Астма	0,94	+ область груди; - область спины
13	Бронхит	9,4	+ область груди; - область спины

14	Бронхит астматический	8	+ область груди; - область спины
15	Варикоз	2,5	+ на зону поражения; - на противоположную сторону
16	Геморрой	2,6+3,8+4,0	Последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; - правая нога. Далее: +ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
17	Гипертоническая болезнь	3,3+6,0+9,2+9,4+9,5	+ правая рука; - левая рука или + лоб; - затылок
18	Гипертензия систолическая	6	+ правая рука; - левая рука
19	Гипертензия диастолическая	9,2	+ правая рука; - левая рука
20	Гипертензия на фоне атеросклероза	3,3	+ правая рука; - левая рука
21	Гипотония (ноллапс)	1,7	+ правая рука; - левая рука
22	Пневмония	9,4	+ правая рука; - левая рука
23	Стенокардия	9,45	+ правая рука; - левая рука или + область сердца; - спина
24	Тахикардия	1,2	+ правая рука; - левая рука
25	Нарушение ритма (экстрасистолия)	6	+ правая рука; - левая рука
Желудочно-кишечный тракт			
26	Дискинезия желчевыводящих путей, гиперфункция	9,2	+ правая рука; - правая нога
27	Дискинезия желчевыводящих путей, гипофункция	2,65	+ правая рука; - правая нога

28	Воспаление 12-перстной кишки (дуоденит)	9,4	+ правая рука; - левая рука
29	Желчнокаменная болезнь	3,5	+ правая рука; - правая нога
30	Панкреатит	4	+ левая рука; - левая нога
31	Печени токсические и инфекционные поражения	0,9+2,5+3,3+9,8	+ правая рука; - правая нога
32	Язвенная болезнь 12-перстной кишки	8,6	+ правая рука; - левая рука
33	Язвенная болезнь желудка	9,4	+ правая рука; - левая рука
Опорно-двигательный аппарат			
34	Артриты - артрозы	1,2+1,6+9,2+9,6 +9,7	+ передняя (внешняя) сторона сустава; - задняя (внутренняя) сторона сустава
35	Артрит голеностопного сустава	9,6	+ внешняя сторона сустава; - внутренняя сторона сустава
36	Болезнь Бехтерева	9,6	Последовательно: + ручной электрод на область позвоночного столба; - правая нога. Далее: ручной электрод на область позвоночного столба; - левая нога
37	Ишиас	9,7	+ болевая зона; - задняя поверхность бедра или + ручной электрод на область поясницы; - правая или левая нога
38	Миалгии	6,8	+ область поражения; - противоположная сторона
39	Воспаление надкостницы (периостит)	2,65	+ зона поражения; - противоположная сторона
40	Переломы	8,6	+ зона перелома; - противоположная сторона

41	Подагра	9,29	+ зона поражения; - противоположная сторона
42	Позвоночные боли на фоне остеохондроза	9,6	+ ручной электрод на зону позвоночного столба; - правая или левая нога
43	Повышение тонуса затылочных мышц	4,96	+ область шеи; - правая или левая рука
44	Ревматизм	9,7	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
45	Слабость в коленных суставах	1,23	Последовательно: + ручной электрод на область поясницы; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область поясницы; - левая нога
46	Судороги мышц	6,8	+ зона поражения; - противоположная сторона
Нейроэндокринная система/Психологические расстройства			
47	Бессонница	2,5 или 8,5	+ лоб; - затылок
48	Вегетативные нарушения	2,5	+ правая рука; - левая рука
49	Гипофизарные нарушения	4	+ правая рука; - затылок или + правая рука; - левая рука
50	Депрессии	5,89	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
51	Меланхолия	3,5	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
52	Невралгии	3,9	+ на болевую зону; - противоположная сторона
53	Невралгия тройничного нерва	7,5	+ зона поражения; - правая или левая рука
54	Неврозы	6,3	+ лоб; - затылок
55	Нарушение функции надпочечников	9,45	+ правая нога; - левая нога

56	Паралич вялый	8,29	+ рука со стороны поражения; - затылок
57	Снижение чувствительности и слабость мышц (парезы)	9,4	+ зона поражения; - противоположная сторона
58	Плаксивость	3,6	+ лоб; - затылок
59	Паращитовидная железа (баланс Са и Р)	4,69	+ шея; - правая или левая рука
60	Раздражительность	3,66	+ лоб; - затылок
61	Расстройства сна (фазы засыпания)	3,9	+ лоб; - затылок
62	Страх	3,5	+ лоб; - затылок
63	Сотрясение головного мозга	6,3	+ лоб; - затылок
64	Сахарный диабет (действие -снижение глюкозы)	9,2	+ левая рука; - левая нога
65	Щитовидная железа	9,5	+ область шеи; - правая или левая рука
Мочеполовая система			
66	Воспаление придатков матки	9,4	+ правая или левая рука; - правая или левая нога
67	Гиперменорея	2,54	+ правая или левая рука; - правая или левая нога
68	Импотенция	2,6+4,0+4,9	Последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; - правая нога. Далее: + ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
69	Климакс (дисменорея)	4,0+4,9+9,5	+ правая рука; - левая рука

70	Миома матки	2,5	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога
71	Болезненные менструации	3,54	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога
72	Обильные менструации	2,5+4,0+4,9	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога
73	Мочегонное действие (регуляция электролитного баланса К и Na)	8,1	+ правая нога; - левая нога или + правая рука; - правая нога
74	Почечные колики	2,8+3,3+3,5+8,1	+ правая нога; - левая нога
75	Воспаление почек (пиелонефрит)	2,8+3,3+8,1+9,2	+ правая нога; - левая нога
76	Воспаление предстательной железы	9,4	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; правая нога. Далее: + ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
77	Воспаление мочевого пузыря (цистит)	8,19	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод на область лобна; - правая нога. Далее: + ручной электрод на область лобна; - левая нога

78	Воспаление слизистой матки (эндометрит)	9,4	+ правая нога; - левая нога или последовательно: + ручной электрод в области ректальной зоны; - правая нога. Далее: ручной электрод в области ректальной зоны; - левая нога
Стоматологические, кожные и ЛОР проблемы			
79	Гнойное воспаление миндалин (ангина)	9,45	+ на область шеи; - правая или левая рука
80	Воспаление кожи (дерматит)	0,7+1,7+2,6+9,2 +9,4	+ правая рука; - левая рука
81	Насморк	2,9	Последовательно: + на область пазух носа; - правая нога. Далее: + на область пазух носа; - левая нога
82	Отосклероз	3,39	+ область сосцевидного отростка; - со стороны поражения
83	Отсутствие голоса (афония)	9,5	+ гортань; - область шеи или затылок
84	Поражение десен (пародонтоз)	1,7+2,5+9,5	+ область поражения; - правая или левая рука
85	Воспаление пазух носа (синусит)	2,5	Последовательно: + область пазух; - правая нога. Далее: область пазух; - левая нога
86	Угри	1,7	+ на зону поражения; - рука со стороны поражения
87	Узловатая эритема	9,4	+ область поражения; - противоположная сторона
88	Фурункулез	1,7+3,3+4,9+9,2 +9,4	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; + правая нога
89	Экзема	0,7+1,7+2,5+9,2 + 9,4	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
90	Экзема пустулезная	2,2	+ зона поражения; - противоположная сторона

Специфические частоты при головных болях различного происхождения

91	Церебральная (при нарушении кровообращения)	1,26	+ лоб; - затылок
92	Менингеальная (при воспалении оболочек мозга)	4,9	+ лоб; - затылок или + правая рука; - левая рука
93	Головная боль при отите	5,89	+ лоб; - правая или левая рука
94	Головная боль при заболеваниях придаточных пазух носа	2,5	+ область пазух; - правая или левая рука
95	Головная боль при заболеваниях миндалин	9,45	+ область шеи (проекция миндалин); - правая или левая рука
96	Головная боль при заболеваниях печени	2,66	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
97	Головная боль при заболеваниях желудка	9,4	Последовательно: + левая рука; - левая нога. Далее: + правая рука; - правая нога
98	Головная боль при заболеваниях кишечника	2,6+8,0+9,4	Последовательно: + лоб или правая рука; - правая нога. Далее: + лоб или правая рука; - левая нога
99	Головная боль при заболеваниях почек	9,2	Последовательно: + лоб или правая рука; - правая нога. Далее: + лоб или правая рука; - левая нога
100	Головная боль при заболеваниях мочеполовой сферы	9,4	Последовательность: + лоб; - правая нога. Далее: + лоб; - левая нога
101	Головная боль при вегетосудистой дистонии	5,5+9,5	+ лоб; - затылок
102	Головная боль при вертебробазилярной недостаточности	9,6	+ лоб; - затылок или последовательно: + лоб; - правая нога. Далее: + лоб; - левая нога.